


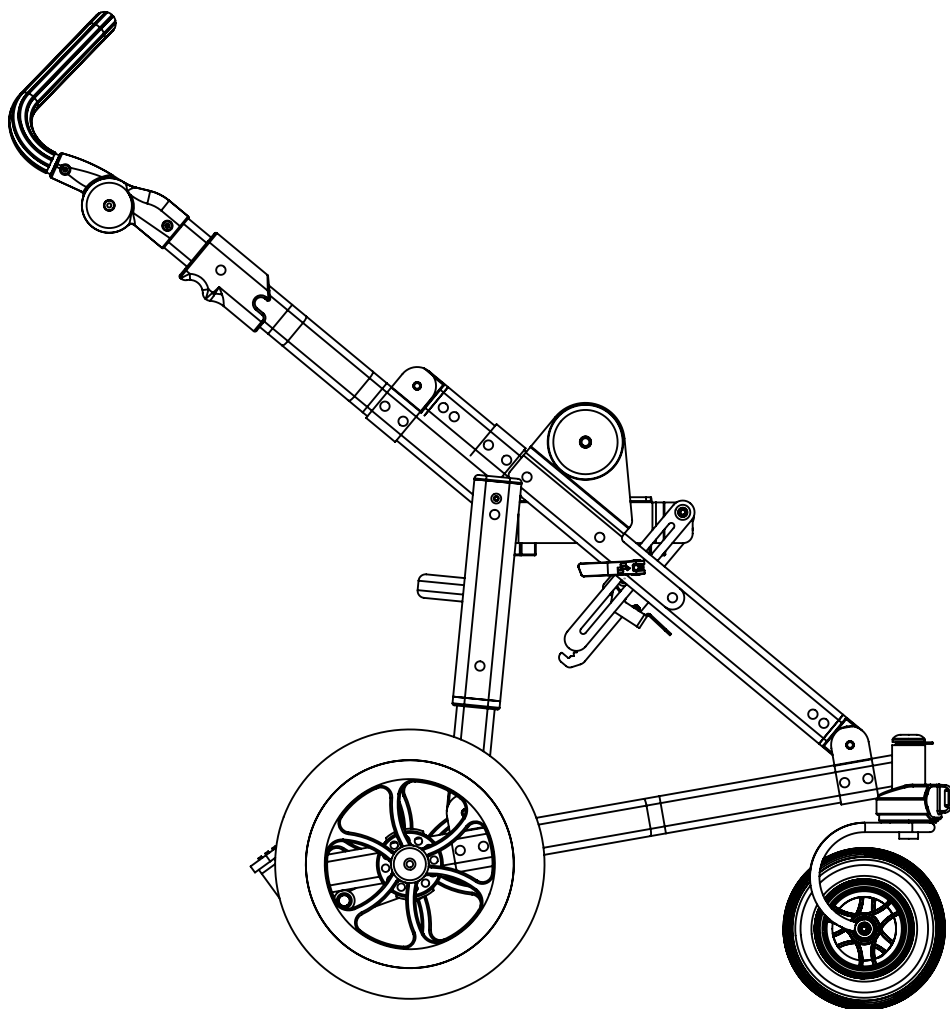

Käyttöohje

Zitzi Pengy rattaat

Sisällysluettelo

Turvavaroitomenpiteet	3	Kuljetusvarusteet	12
Johdanto.....	3	Kuljettaminen moottoriajoneuvossa	13
Käyttötarkoitus.....	3	Kunnossapito-ohjeet	14
Tuotetta koskeva yhteydenpito	3	Huoltoväli	14
Törmäystestattu	3	Puhdistus- ja pesuohjeet	14
Avaaminen ja kokoontaittaminen	4	Kunnostaminen	14
Avaaminen.....	4	Johdanto.....	14
Kokoon taittaminen.....	4	Puhdistaminen.....	14
Jarrut.....	5	Viimeistely	14
Suuntalukko	5	Merkintä	14
Etupyörien suuntalukitus ja avaaminen.....	5	Pyörät.....	14
Kallistus	6	Maalaus.....	14
Työntötanko	6	Tukevuus.....	15
Pengy-istuimen asentaminen	7	Putkirunko ja osat.....	15
Pengy-istuimen asentaminen.....	7	Pyöränhaarukat.....	15
Pengy-istuimen irrottaminen.....	7	Työntötanko.....	15
Delfi Pron asentaminen.....	8	Jarrut.....	15
Kiinteä asennus adapterilevyn päälle	8	Taittomekanismi ja kallistus.....	15
Anatomic Seat –kannatin ja muut adapterijärjestelmät.....	8	Toiminnan tarkastus.....	15
Carseat Pron asentaminen.....	9	Asiakaspalvelu	16
Carseat Pron asentaminen.....	9	Yhteenvedo ja jatkotoimenpiteet	17
Carseat Pron irrottaminen.....	9	Seurantatarkastukset.....	17
Pyörät.....	10	Sovittaminen ja yksilölliseksi muuntaminen.....	17
Vaihtaminen 12”pyöriin, edessä.....	10	Ohjeita ja suosituksia.....	17
Pyörien irrottaminen	10	Myyntiehdot.....	18
Jalkatuki	11	Takuu	18
Jalkatuen asentaminen.....	11	Takuuvaatimukset	18
Kallistussäätö	11	Tuotteiden palauttaminen.....	18
Korkeussäätö	11	Tekniset tiedot	19
Ylös taittaminen	11		

Turvavarotoimenpiteet

Johdanto

Zitzi Pengy –rattaiden kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeää lukea tämä ohjekirja huolellisesti. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat käyttäjän kanssa. Tuote on suunniteltu käyttäjille, joilla on istumiseen liittyviä ongelmia, ja soveltuu monille erityyppisille diagnooseille. Zitzi Pengy –rattaiden säätäminen tulee aina tapahtua lääkinällisesti pätevän henkilön toimesta.

Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Käyttötarkoitus

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi alustana Anatomic SITT AB:n valmistamien istuinjärjestelmien yhteydessä. Mikäli ilmenee tarvetta muunlaiseen käyttöön, tulee ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Tuotetta koskeva yhteydenpito

Zitzi Pengy lisävarusteineen ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Yksilöllinen sarjanumero löytyy aktivointikotelon alla olevasta tarrakilvestä. Tämä numero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa yhteydenpidossa.

Törmäystestattu

Törmäystestattu ja hyväksytty ISO 7176-19 –standardin mukaisesti.

Tämä tuote on Anatomic SITT AB:n valmistama

Postiosoite Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Käyntiosoite Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 602 29 Norrköping

Puhelin +4611-161800

Fax +4611-162005

Sähköposti info@anatomicsitt.com

Verkkosivut anatomicsitt.com, youtube.com/anatomicsitt

Rastita tämä ruutu, mikäli tuotteeseen on tehty henkilökohtaisia muutoksia. CE-merkintä ei tällöin ole voimassa ja tulee poistaa.

Liimaa tarra tähän

Avaaminen ja kokoontaittaminen

Avaaminen


Rattaiden avaaminen ja kokoon taittaminen on helppoa. Molempia lukkoja (A) vedetään ylöspäin nuolen suunnassa. Sitten nostetaan työntötankoa, jolloin rattaat avautuvat. Kun rattaat ovat täysin avautuneet pystyyn, kuuluu loksahdusääni.

Huom!

Varo sormien joutumista puristuksiin.

Kokoon taittaminen

Rattaiden taittamiseksi kokoon lukkoja (A) vedetään ylöspäin nuolen suunnassa. Sitten työntötanko taitetaan alas niin pitkälle kuin se menee. Rattaiden sulkeutuessa kuuluu loksahdusääni.

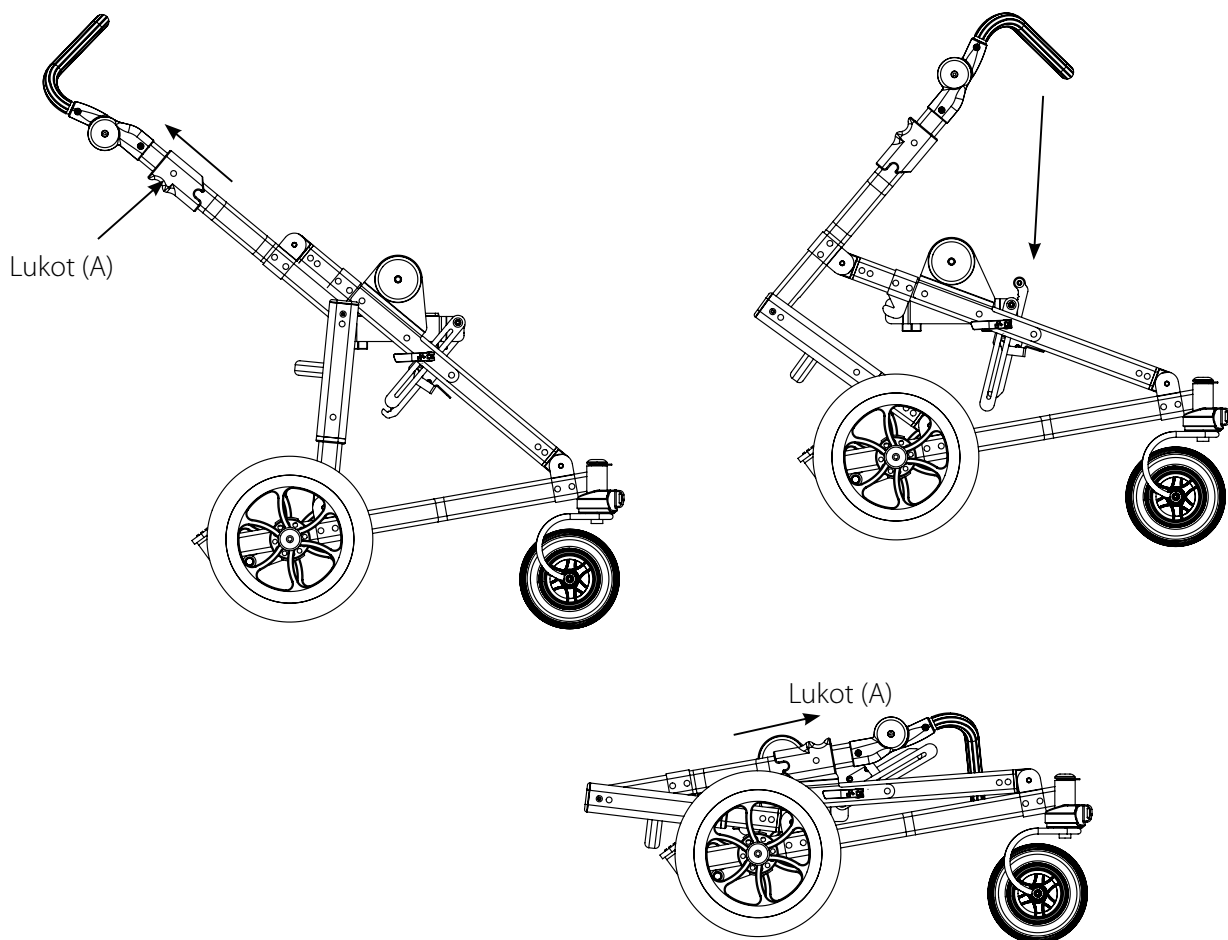


Jarrut

Pyörissä on seisontajarrut, jotka avustaja voi kytkeä päälle. Pyörien lukitsemiseksi painetaan jarrupoljinta (A). Jarrut vapautetaan painamalla jarrupoljinta jalalla ja sitä eteenpäin siirtämällä.

Huom!


Pyörät tulee aina lukita, kun rattaat jätetään viettävälle alustalle.

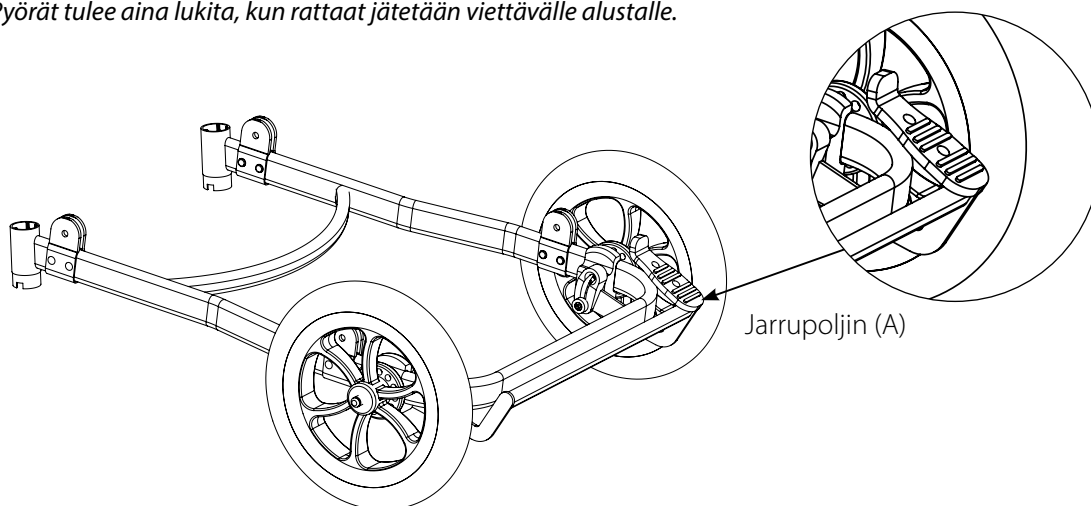

Suuntalukko

Etupyörien suuntalukitus ja avaaminen

Suuntalukkoa kierretään vasemmalle etupyöran suuntalukon kytkemiseksi päälle. Pyörät lukittuvat kuuluvasti loksautuen. Avaaminen tapahtuu suuntalukkoa oikealle kiertämällä.

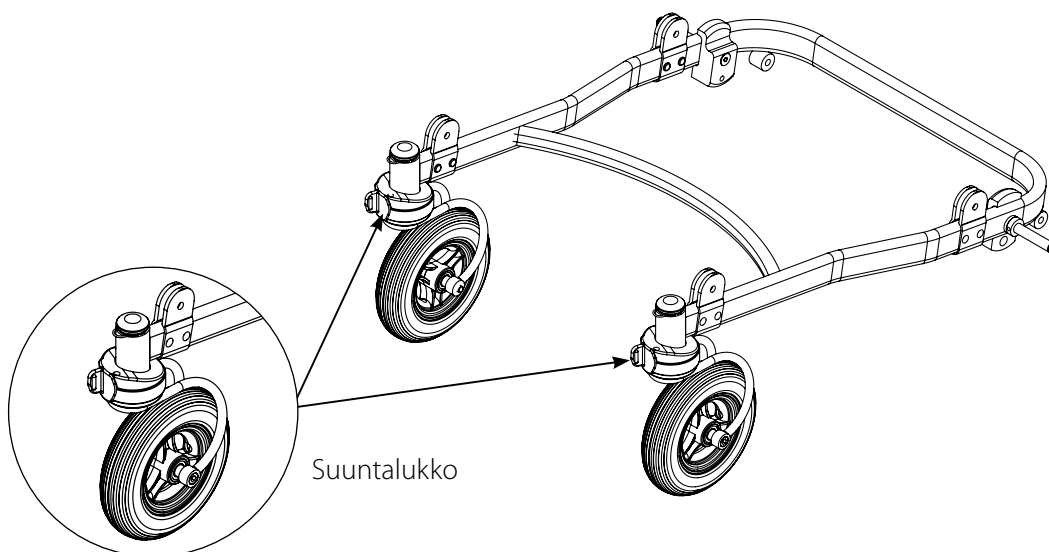


Kallistus

Rattaiden kallistaminen edellyttää oikealla puolella sijaitsevan lukitussokan (A) avaamista. Kallistus suoritetaan haluttuun asentoon vasemmalla puolella sijaitsevaa punaista aktivointivipua (B) nostaen. Kallistus lukittuu automaattisesti, minkä jälkeen lukitussokka (A) lukitaan uudelleen.

Huom!


Lukitussokan (A) tulee aina olla lukittuna rattaiden ollessa käytössä.

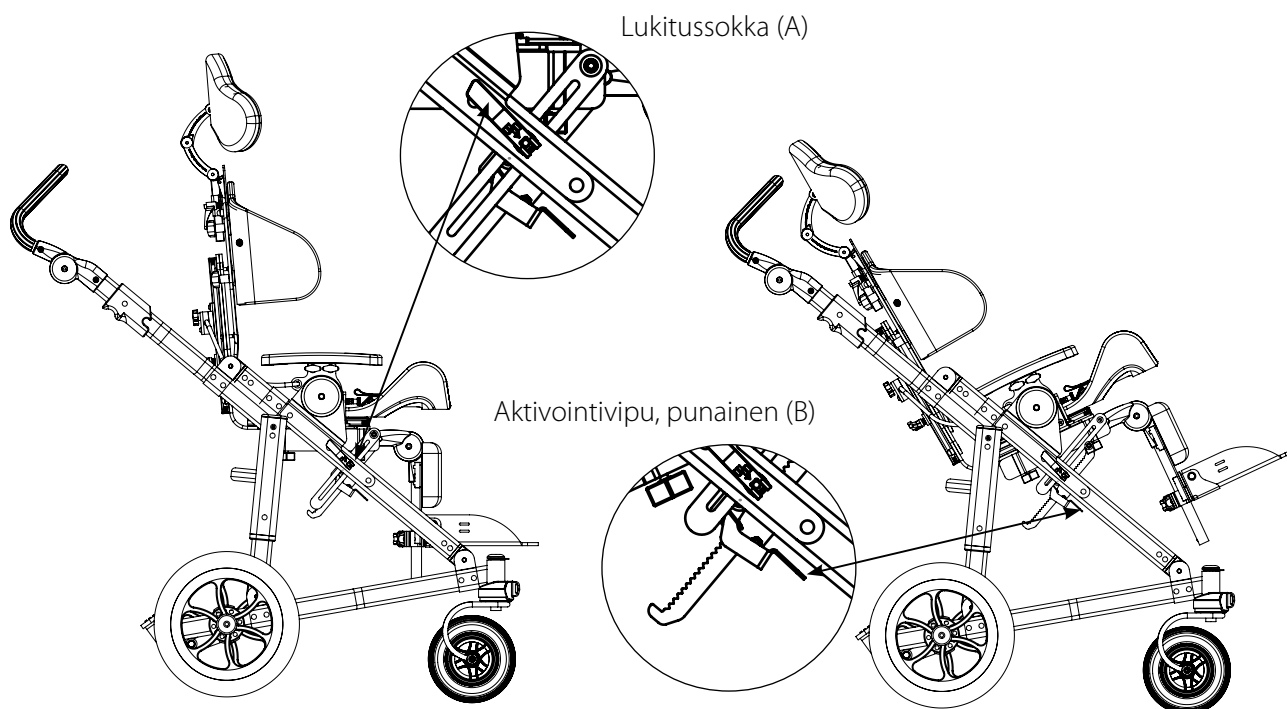

Työntötanko

Kulman säätäminen

Työntötangon kulman säätämiseksi painetaan molempia tangon sisäsvulla sijaitsevia painikkeita (A) samanaikaisesti, ja kulma säädetään halutunlaiseksi. Pikalukituspainikkeet lukittuvat automaattisesti.

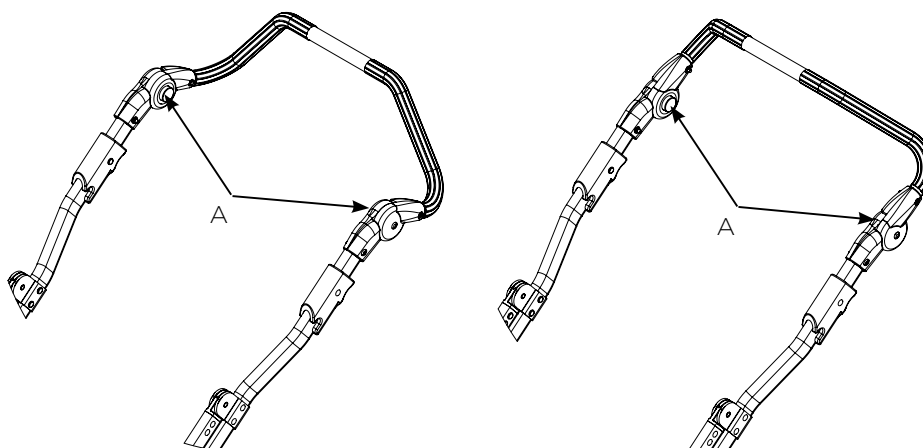

Pengy-istuimen asentaminen

Pengy-istuimen asentaminen

Pengy-istuinta käsinojista pidellen se lasketaan alas kiskojen päälle kuvassa esitetyllä tavalla. Varmista, että lukitussokka lukkiutuu, kun Pengy-istuin laskeutuu alimpaan asentoonsa kannattimessa.

Pengy-istuimen irrottaminen




Pengy-istuimen irrottamiseksi lukitussokka (A) avataan sitä vetämällä ja neljänneskierroksen verran kiertämällä. Kun lukitussokka on avattu, istuin nostetaan pois käsinojista ylös nostamalla.

Huom!

Sokan tulee olla lukittuna aina istuimen ollessa käytössä.

Vinkki!

Pengy-istuin voidaan asentaa menosuuntaan tai vastakkaiseen suuntaan.

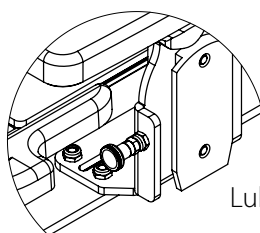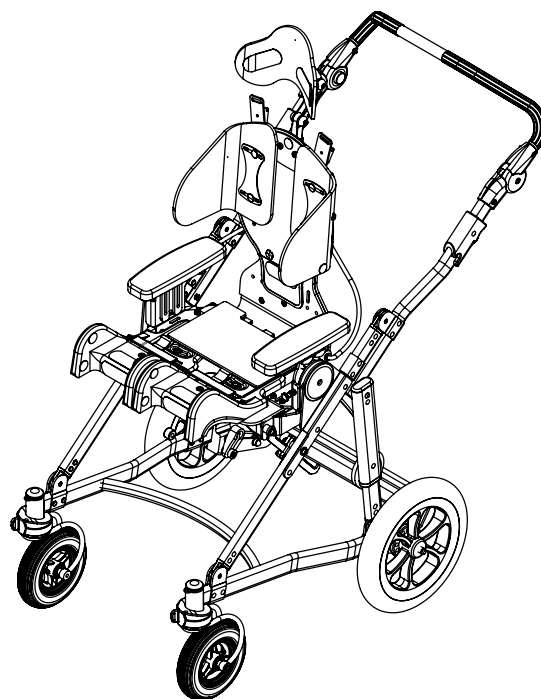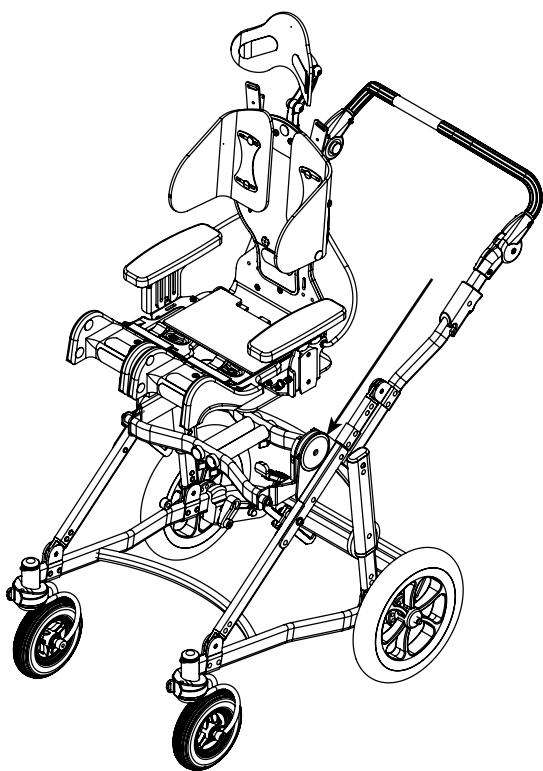

Lukitussokka (A)

Delfi Pron asentaminen

Kiinteä asennus adapterilevyn päälle



Asenna Delfi Pro adapterilevyn päälle. Mukana toimitetut ruuvit asennetaan kuvassa esitetyllä tavalla. Aseta pohjaprofili kiskotappien päälle ja säädä haluttuun kohtaan, lukitse sitten ruuvit (A). Istuinjärjestelmä on helppo asentaa tukevasti rattaisiin adapterilevyn kanssa. Muoviset kannattimet (D) asennetaan kiskoille ja varmistetaan, että lukitus-sokka on kytketty päälle.

Anatomic Seat –kannatin ja muut adapterijärjestelmät

Urat (E) on tarkoitettu adapterijärjestelmien ja Anatomic Sits –istuinten asentamiseen.

Huom!

Sokan tulee olla lukittuna aina istuimen ollessa käytössä.

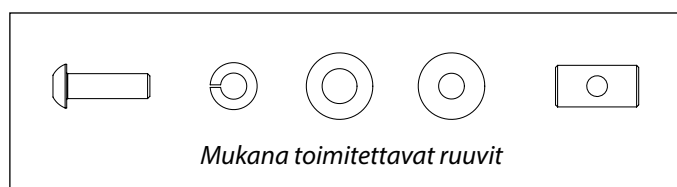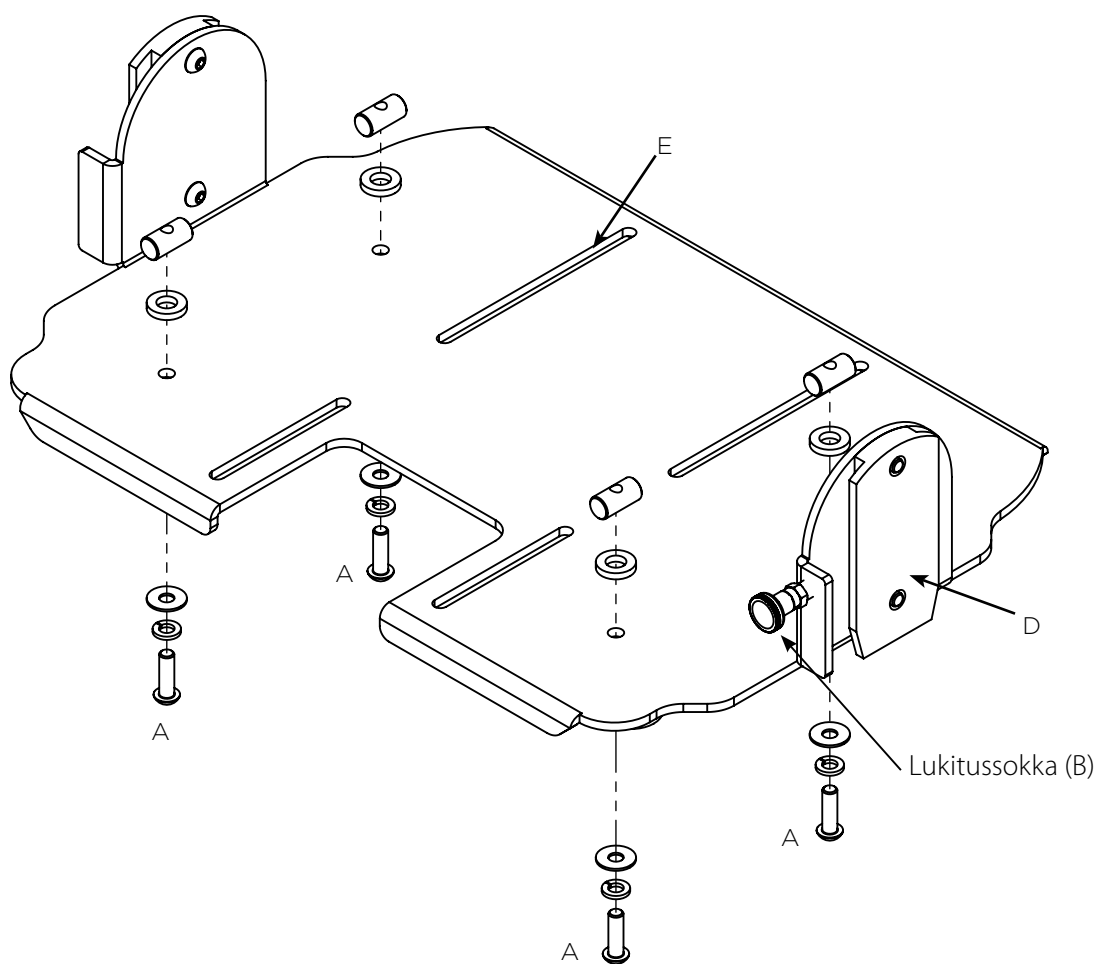

Carseat Pron asentaminen

Carseat Pron asentaminen Pengy-rattaisiin


Asenna adapterilevy rattaisiin. Lukitse lukitusmekanismilla (A). Liitä Carseat Pro sitten adapterilevyyn. Paina Carseat Protä edestä alaspäin siten, että lukitusmekanismi (B) loksauttaa paikoilleen. Kiinnitä takaosa takakannattimeen mukana toimitetulla hihnalla.

Carseat Pron irrottaminen

Carseat Pron irrottamiseksi adapterilevystä lukitusmekanismi (B) avataan sitä ulospäin vetämällä. Carseat Pro on tällöin irti ja voidaan nostaa pois. Carseat Pron irrottamiseksi adapterilevyn kanssa avataan lukitusmekanismi (A), jolloin Carseat Pro adapterilevyineen on irti ja voidaan nostaa suoraan ylös.

Huom!


Sokan tulee olla lukittuna aina istuimen ollessa käytössä.

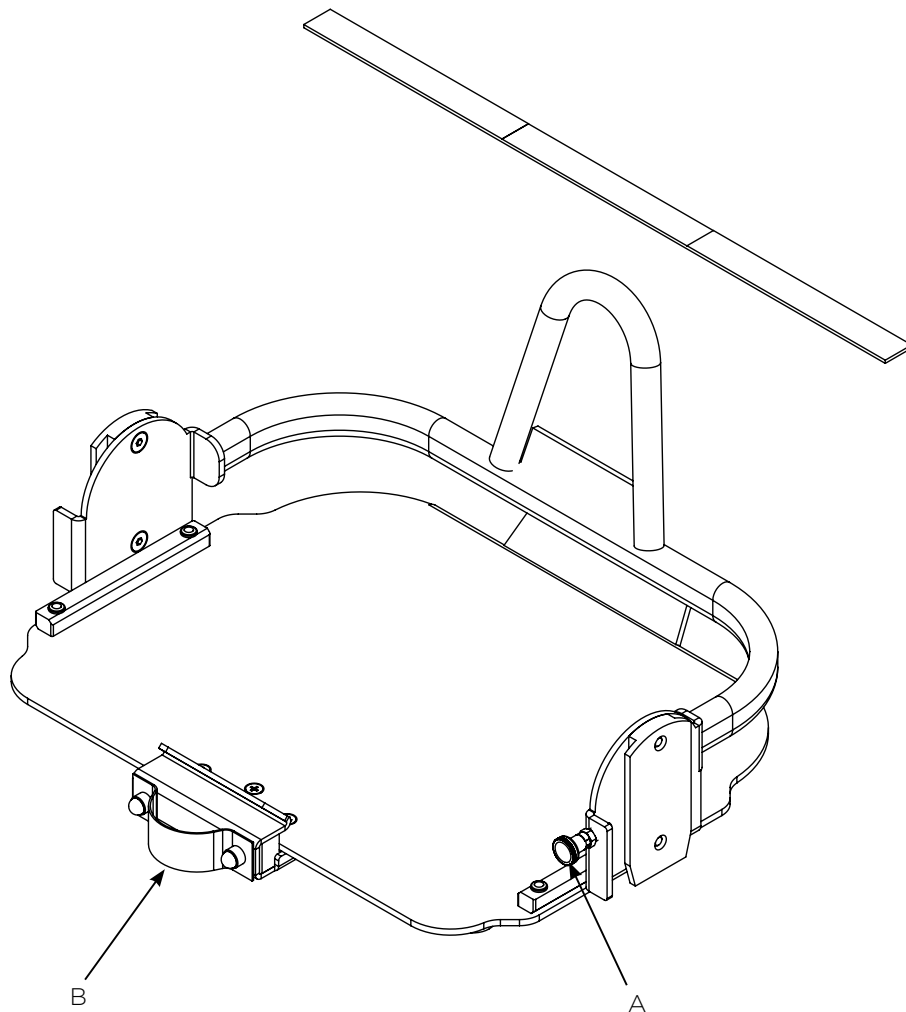

Pyörät

Vaihtaminen 12" pyöriin, edessä

Pyörät saadaan irti painamalla joustia (A), ja 12" pyöräyksikkö työnnetään reikiin. Pyörien lukittuminen tulee varmistaa pyörien kiinnitysholkkeja alas painamalla.

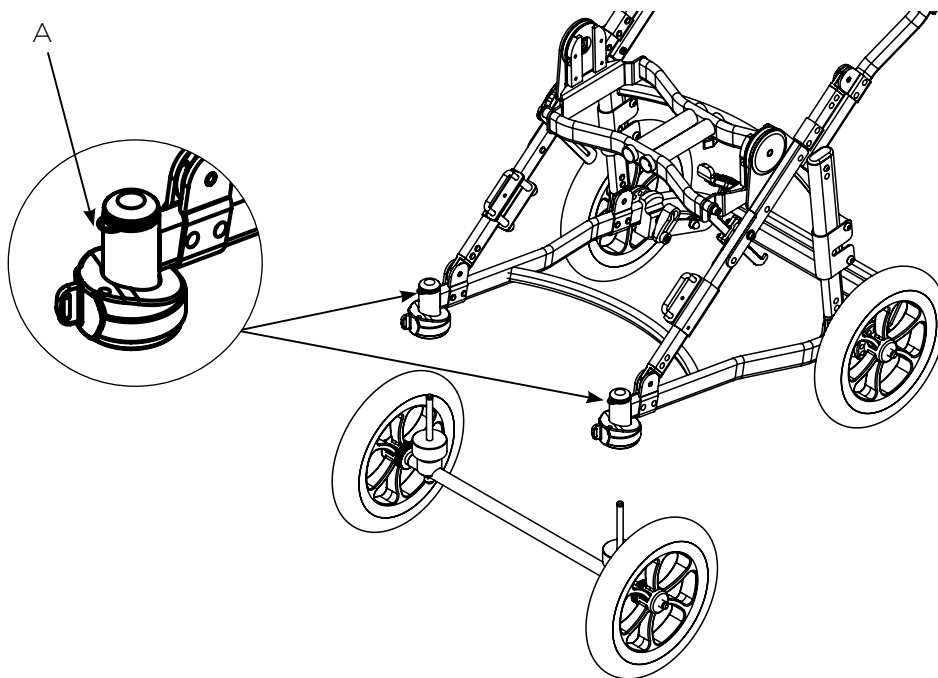


Pyörien irrottaminen

Etupyörän irrottamiseksi painetaan painiketta (A) ja pyörä irrotetaan alaspäin vetämällä. Takapyörä irrotetaan painamalla painiketta (B) ja pyörää sivusuunnassa vetämällä.

Tärkeää!

Varmista pyörien tukeva lukittuminen niitä takaisin rattaisiin asennettaessa.

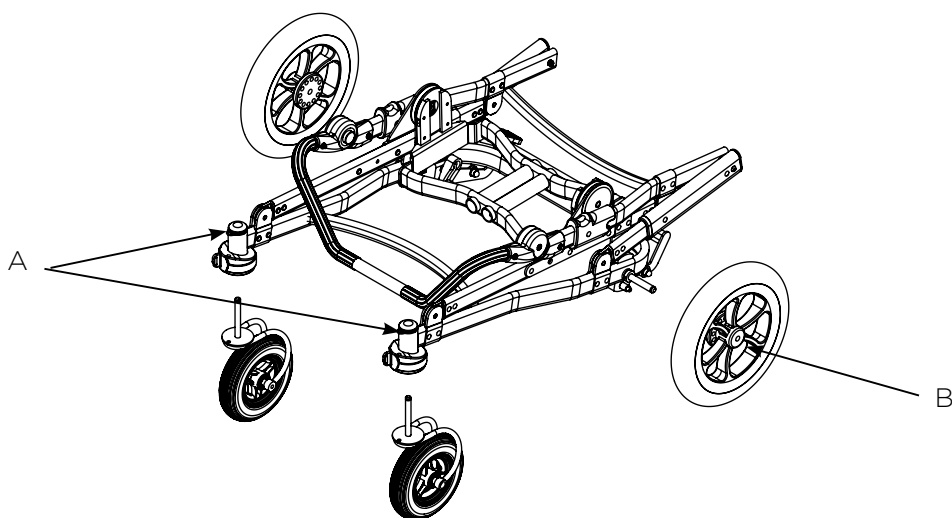

Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Jalkatuki kiinnitetään tangot reikiin (A) työntämällä. Lukitus tapahtuu putkien alapuolella sijaitsevilla sorminupeilla (B).

Vinkki!

Jalkatuki asentaa menosuuntaan tai vastakkaiseen suuntaan.

Kallistussäätö


Kallistusta säädetään painamalla polvinivelen vasemmalla puolella olevaa painiketta (C). Kulma lukittuu automaattisesti, kun painike vapautetaan.

Korkeussäätö

Korkeutta säädetään avaamalla jalkalaudan takana olevaa nuppia (D) ja suorittamalla säätö haluttuun asemaan. Korkeus lukitaan nuppi kiristämällä.


Ylös taittaminen

Jalkatuen taittamiseksi ylös tartutaan jalkalaudan etuosasta (E) ja nostetaan ylöspäin.

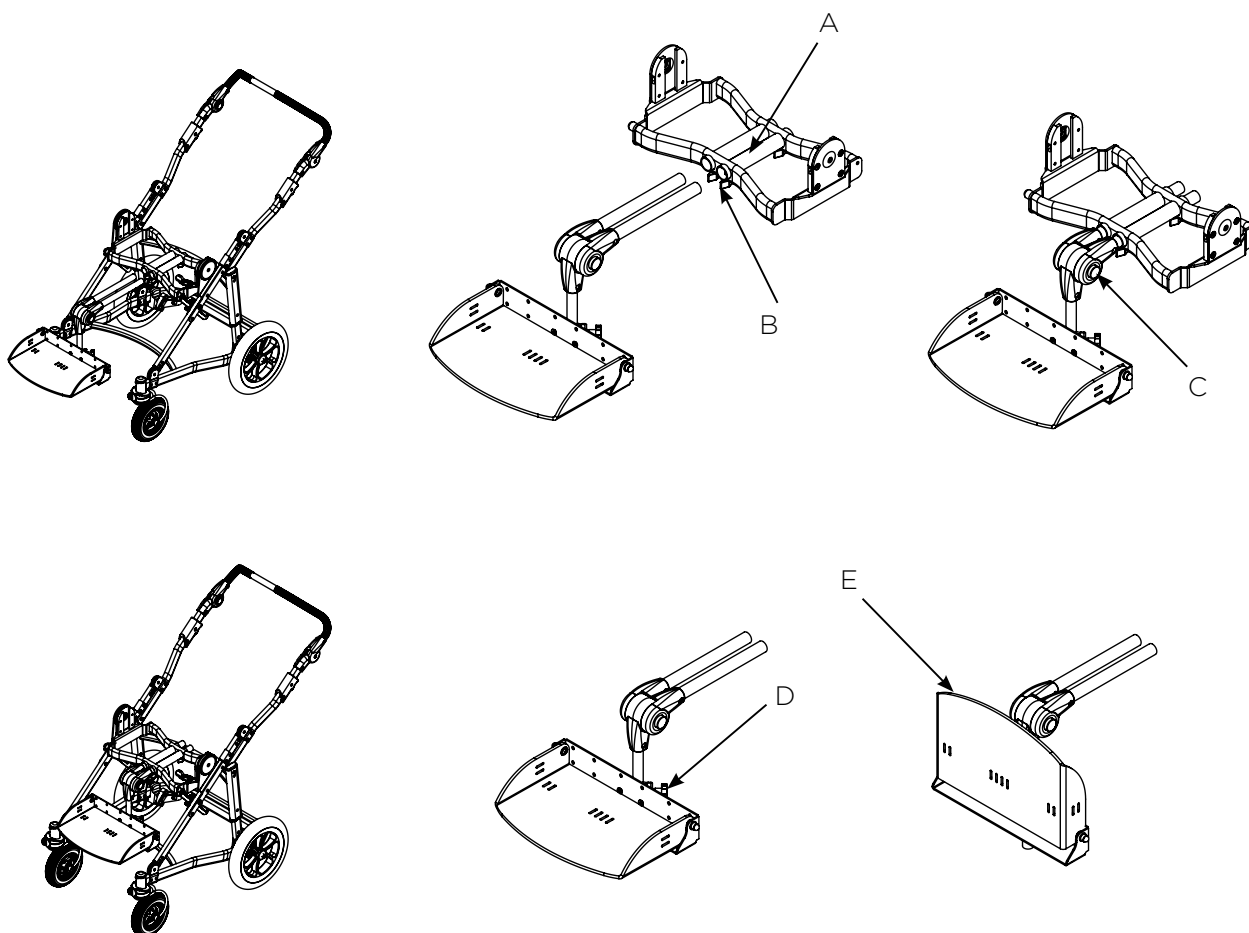

Kuljetusvarusteet

Kuljetusvarusteet asennetaan kuvissa esitetyllä tavalla.

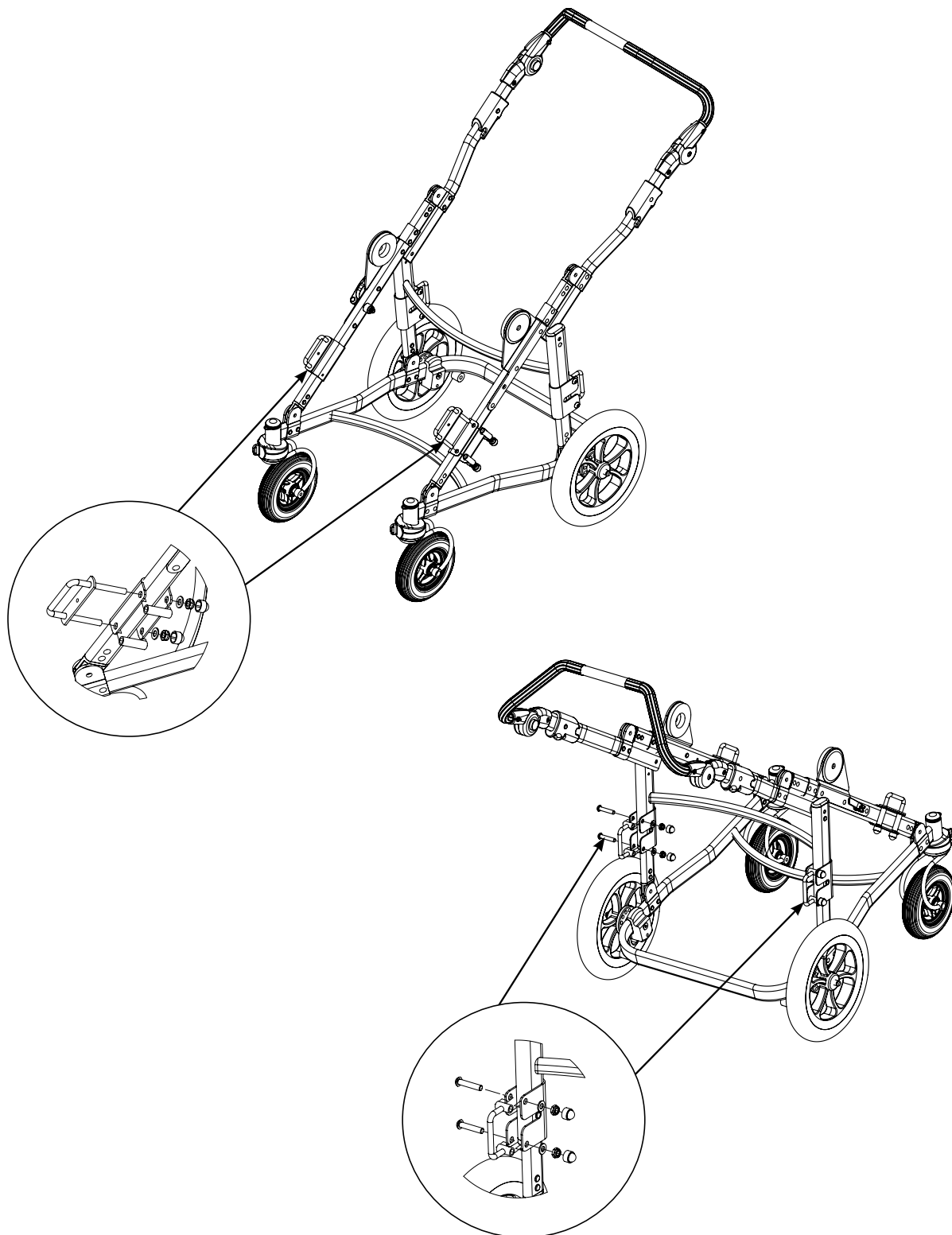

Kuljettaminen moottoriajoneuvossa

Ohjeet moottoriajoneuvossa kuljettamista varten

Kiinnittäminen tulee suorittaa hihnoilla, jotka ovat ISO 10542 –hyväksyttyjä.



Huom!

On tärkeää, että hihna kiristetään vain kevyesti. Hihnojen liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa rungon vääntymisen.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Pengy on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 7176-19 –standardin mukaisesti 43 kg:n painolle.

Huom!

Törmäystesti on hyväksytty korkeintaan 43 kg:n kuormituspainolle.

Kunnossapito-ohjeet

Huoltoväli

Rattaiden moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Huollontarve riippuu käytön määrästä ja kulumisesta. Tarkasta kaikkien liikkuvien osien ja kiinnitysosien kuluneisuus. Huollon suorittaminen kuuluu aina ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön suoritettavaksi. Mikäli olette huoltoasioiden suhteen epävarma, voitte aina ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Puhdistus- ja pesuohjeet

Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla. Ajattele vihreästi, ajattele ympäristöä! Käytä biohajoavia pesuaineita.

Tarkasta kunto säännöllisesti ja suorita tarvittaessa kunnossapito.

Kunnostaminen

Johdanto

Säännöllinen kunnossapito on tärkeää Pengy-rattaiden turvalliselle ja moitteettomalle toiminnalle. Huollontarve muuttuu ja on riippuvainen käytöstä ja kulumisesta. Tarkasta kaikki liikkuvat osat ja kiinnitysosat säännöllisesti. Pengy-rattaiden kunnostukseen tulee käyttää alkuperäisiä Anatomic SITT AB:n toimittamia osia.

Työn suorittaminen kuuluu aina ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön suoritettavaksi. Mikäli tarvitsette tukea, voitte aina mielellään ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Kunnostuksen tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Kaikki tarkistuskohdat tulee läpikäydä vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Moitteeton toiminta on varmistettava rattaiden jokaisen käyttökerran yhteydessä.

Puhdistaminen

Maalipinnat, etu- ja takapyörät ja kahvat puhdistetaan puhdistusnesteellä. Maalinohenteita, bensiiniä tai muita liuottimia ei saa milloinkaan käyttää.

Viimeistely

Pesun jälkeen on kaikki vaijerit, ontelot ja valumisreiät puhallettava kuiviksi ja voideltava ohuella öljyllä suihkuttamalla.

Merkintä

Varmista, että CE-merkintä on ehjä ja luettavissa. Merkintä löytyy rungon takaa.

Pyörät

Tarkasta, etteivät etu- ja takapyörät ole kuluneita ja pyörivät vaivattomasti ja äänettömästi.

Maalaus

Tarkasta maalipinnan mahdolliset vauriot syöpymisen estämiseksi. Korjausmaalia on tarvittaessa saatavissa Anatomic SITT AB:ltä.

Tukevuus

Varmista, että kaikki pyörät koskettavat tukevasti maata ja että rungossa ei ole vinoutta.

Putkirunko ja osat

Hitsatut ja pultein kiinnitetyt liitokset. Laakeriholkkien ja saranoiden tulee toimia äänettömästi. Voitele tarpeen mukaan. Tarkista myös nupit, ruuvit ja muuta asennusosat ja korvaa tarvittaessa uudella.

Pyöränhaarukat

Varmista, että liitoksissa ja laakereissa ei ole välystä ja että pyöräminen on vaivatonta. Tarvittaessa voitele etuhaarukat.

Työntötanko

Varmista, että pehmuste ja kahvat ovat tukevasti paikoillaan ja työntötangon korkeussäätö toimii.

Jarrut

Tarkista, että seisontajarru toimii moitteettomasti.

Taittomekanismi ja kallistus

Varmista, että rattaat on helppo taittaa kokoon ja kallistustoiminnon käyttäminen on vaivatonta. Varmista, että rattaat lukittuvat ylä- ja ala-asentoonsa.

Toiminnan tarkastus

Toiminnan tarkastuksella tarkoitetaan pyörien, tukevuuden, jarrujen ja työntötangon toiminnan tarkastamista.

Jousitus

Tarkasta jousitus ja voitele tarvittaessa.

***Huom!***

Varmista aina kunnostuksen yhteydessä ja ennen uudelle käyttäjälle toimittamista, ettei kyseessä ole yksilölliseksi rakennettu laite.

Asiakaspalvelu

Jälleenmyyjä

rehaco.

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping
Puh. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Seurantatarkastukset

Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti. Seuraavat kohdat on tarkistettava jokaisella kerralla, kun potilas käyttää laitetta.

- Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.
- Tarkista hihnojen ja tyynyjen kuluneisuus säännöllisesti.
- Tarkista lisävarusteiden säädöt siten, että käyttäjällä on oikeanlainen istuma-asento.

Sovittaminen ja yksilölliseksi muuntaminen

Ohjeita ja suosituksia

Aina kun Pengy-rattaisiin tehdään jollakin tavalla muutoksia, on suoritettava arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä sovittaminen vai yksilölliseksi muuntaminen (kustomointi).

Sovitus on mikä tahansa muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki muut muutokset ovat kustomointia. Sovitukset kuuluvat ainoastaan tehtävään päteväksi katsotun henkilön toimesta ja aina suoritettava ammattitaitoisesti. CE-merkintä tarkoittaa tuotteen täyttävän kaikki keskeiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Tulee huomioida, että lääkinnällisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi käyttää sovituksen jälkeen.

Tuote tulee varustaa ilmoituksella, joka kertoo sen olevan sovitettu tietylle käyttäjälle siten, ettei sitä voida vahingossa katsoa perusmalliseksi tuotteeksi.

Myyntiehdot

Takuu

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu mitätöityy, jos tuotteelle on aiheutettu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia vaurioita tai sitä on käsitelty huolimattomasti. Takuuvaatimuksen käsittely edellyttää viallisen tuotteen palauttamista valmistajalle. Mukaan tulee aina liittää alkuperäisen toimituksen pakkauslipuke.

Takuuvaatimukset

Vika ja sen mahdollinen aiheuttaja tulee kuvata mahdollisimman tarkkaan. Vaatikaa takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Mukaan tulee liittää kopio laskusta ja maininta, että tuote on palautettava käyttäjälle korjausten jälkeen. Tätä varten tulee ilmoittaa toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteiden palauttaminen

Virheellisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet on palautettava 20 päivän sisällä toimituksesta. Mukaan tulee aina liittää kopio sekä pakkauslipukkeesta että laskusta. Tuotteiden palauttamisen syy on mainittava.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteille, jotka on palautettu yli 20 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 80 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 60 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 60 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 150 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 40 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 360 päivän kuluttua toimituksesta


tuotteesta ei anneta hyvitystä

▲ Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa

Tekniset tiedot


KOOT1
 PYÖRÄT.....7", 12", maastopyörät
 KUORMITUSPAINO50 kg
 KALLISTUS23° - +40°

ISTUINKORKEUS54 cm
 VÄRI.....Musta
 PAINO12 kg
 TÖRMÄYSTESTATTUHyväksytty 43 kg:lle

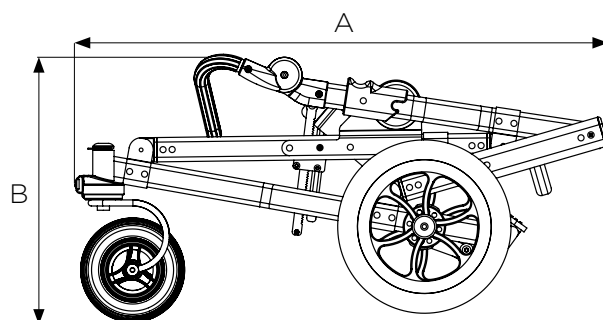


Mitat:

A 87 cm
 B 39 cm

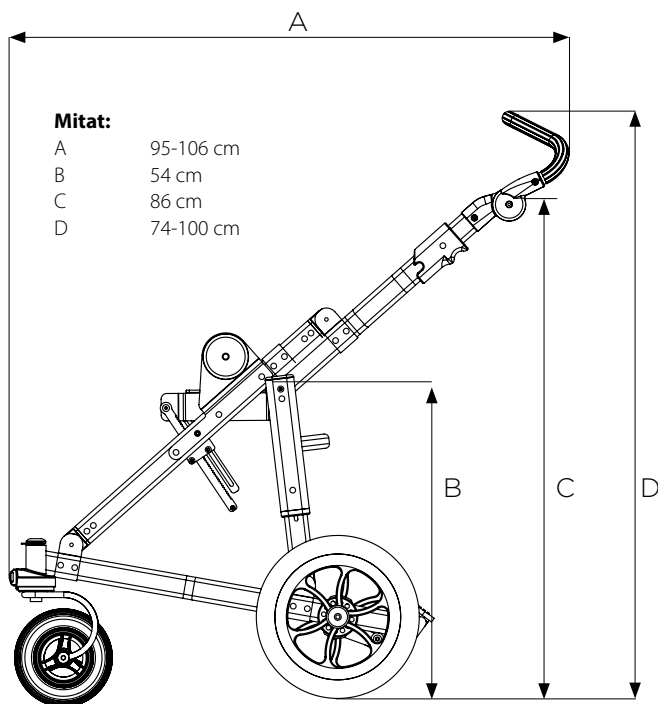

Mitat:

A 95-106 cm
 B 54 cm
 C 86 cm
 D 74-100 cm

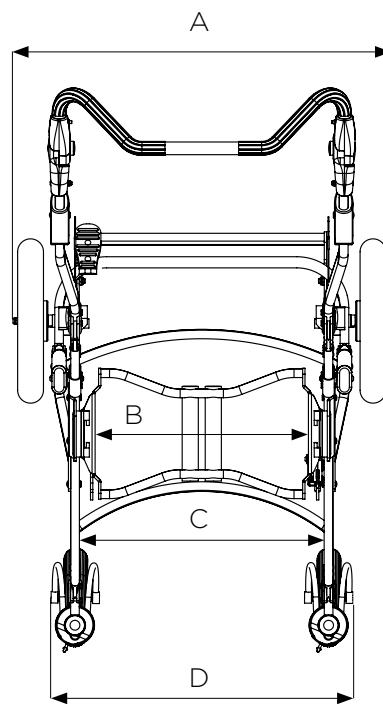

Mitat:

A 66 cm
 B 39 cm
 C 42 cm
 D 53 cm

SE

Anatomic SITT AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Puh. +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Asiakastuki +46 11 16 18 05

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Puh. +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NO

Bardum AS

Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge

Puh: +47 64 91 80 60

Fax: +47 64 91 80 66

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Puh. +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

