



**WC- ja
suihkutuolit**

Raz-AT600

Käyttäjän ja jälleenmyyjän opas



rehaco.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että Raz-suihkutuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti Raz-suihkutuolin turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan.

Suomi
Rehaco Oy
Haaransuontie 6, A 7
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

USA JA MUU MAAILMA
Raz Design Inc.
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

TUOLIN LUOKITUS SUURIMMAN KÄYTTÄJÄN PAINON MUKAAN

AT600

272 kg (600 lbs)

TURVALLISUUSVAROITUKSIA HUOMIOITAVAKSI KÄYTTÖTARKOITUKSESSA

LAITE ON SOPIVA TYYPIN A SUUREN KÄYTTÖKUORMITUKSEEN (esim. LAITOKSIIN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN

Vakaus eteenpäin

Kaikkien mallien pyörät on varustettu kaksoislukoilla. Jalkavipu aktivoi sekä rullauslukon että kääntymislukon. ***Parhaan vakauden saavuttamiseksi eteenpäin ja sivusuuntaan on tärkeää, että kaikki suihkutuilin pyörät ovat ulospäin ennen kuin lukot kiinnitetään.*** Avaa valinnainen pyörien suunnan lukko, jos se kuuluu tuolin varusteisiin, ennen kuin kierrät takapyöriä sisään päin ja kytket pyörien kaksoislukot.

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan Raz-suihkutuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa ramppia alaspäin ilman hoitajaa, joka voi pidätellä tuolia laskeutumisen aikana.

PYÖRIEN LUKOT EIVÄT OLE JARRU! Älä koskaan käytä pyörien lukkoja suihkutuilin hidastamiseen, kun laskeudutaan kaltevia pintoja, koska tästä voi aiheutua tuolin kaatuminen liikkeen suuntaan.

Vakaus sivusuunnassa

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin Raz-suihkutuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.



KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – käytä tartuntapihtejä tai pyydä apua.

KÄYTTÄJÄ EI SAA sijoittaa Raz-suihkutuolia sivukallistukselle, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

Rampit ja muut kaltevat pinnat

Rampit ja muut pinnat, jotka eivät ole suoria (kuten kallistukset pyörätuolisuihkuissa) on hoitajan testattava sen varmistamiseksi, että ne eivät vaaranna tuolin vakautta. Tähän prosessiin on pyydyttävä pätevän terveydenhuollon ammattilaisen apua.

ÄLÄ vedä tai työnnä Raz-AT600:ta ylös tai alas kaltevaa pintaa tai ramppia, joka on jyrkempi kuin 1:12 (5° kallistus).

ÄLÄ anna ketään käyttäjää liikuteltavan (vedettävän tai työnnettävän) Raz-AT600-suihkutuolissa muutoin kuin hoitajan toimesta.

TARKISTA AINA ENNEN KENENKÄÄN KÄYTTÄJÄN SIIRTÄMISTÄ TUOLIIN, ETTÄ RAZ-AT600-SUIHKUTUOLI ON VAKAA.

Upottaminen

Raz-suihkutuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi allastuolina. Älä upota suihkutuuolia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen kokonaan tai osittain. Siitä voi aiheutua vaurioita suihkutuuolin osille.

Siirtymiset

Vaarallisin vaihe minkä tahansa suihkutuuolin käytössä on siirtyminen. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan menettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, että siirtymisiä ei voida toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja vaihtoehdot. Henkilöiden, jotka eivät osaa asianmukaisia siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisen aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.



Siirtyminen Raz-AP600-suihkutuoliin

AINA lukitse kaikki neljä pyörää ulospäin (etupyörät eteenpäin/takapyörät taaksepäin) parhaan tuolin vakauden saavuttamiseksi.

Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuuoli on liukkaalla pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Kovat lattiapinnat, kuten laatat, puu tai betoni eivät ehkä tarjoa riittävää pitoa estämään lukittujen etu- ja/tai takapyörien liukuminen. Kokonaan matolla peitetty pinta on ihanteellinen. Huomaa, että rätti- ja suihkumatot voivat liukua lattioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.

ÄLÄ seiso millään osalla Raz-AT600-suihkutuolin runkoa.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkalevyjä apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Jalkatuet on käännettävä sivulle tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta suihkutuuoliin on esteetön pääsy.

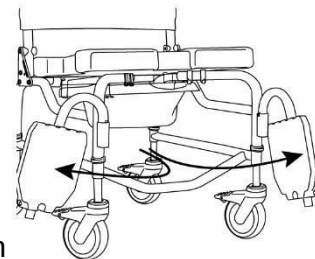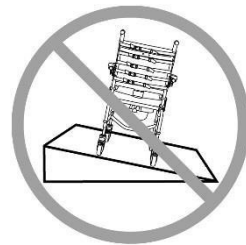

Kallistustoiminto

AINA tarkista kallistustoiminto ja varmista, että molemmat lukituskaasujouset ja vapautuskaapelirakenteet ovat täysin toimintakunnossa **ENNEN** kuin käyttäjä tulee tuoliin.

Lantiovyö voi toimia käyttäjän lisäturvatoimena. Raz-AT600:aan voidaan tilata lisävarusteena lantiotukihihna.

ÄLÄ yritä kallistaa tuolissa istujaa, jos hoitaja ei fyysisesti pysty suorittamaan kallistusta sujuvasti ja turvallisesti.

ÄLÄ KOSKAAN jätä käyttäjää Raz-AT600-suihkutuoliin ilman valvontaa.

Raz-AT600-suihkutuoli **Ei ole** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZ-SUIHKUTUOLIIN ILMAN VALVONTAA.


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ NOSTA RAZ-SUIHKUTUOLIA JA SEN KÄYTTÄJÄÄ KÄSINOJISTA TAI JALKATUISTA!

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KIINNITETTY. TAKAKOUKKUJEN ON OLTAVA TÄYSIN KYTKETTYJÄ JA ETUKANNATTIMIEN ON OLTAVA SALVATTUJA JA LUKITTUJA ISTUIMEN ETUTUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE.

VARMISTA, ETTÄ KUN TUOLI TOIMITETAAN ASIAKKAALLE, NIIN ISTUIMEN ASENNUSOHJEET LUOVUTETAAN ASIAKKAALLE JA/TAI HOITAJILLE.

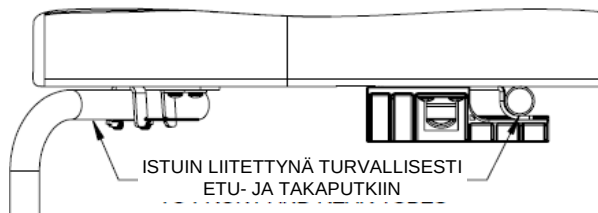


KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYYJÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0	YLEISIÄ TIETOJA	
1.1	Raz-AT600-suihkutuolien yleiskuvaus	6
1.2	Raz-AT600-suihkutuolien tekniset tiedot.....	6
2.0	VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN	
2.1	Pyörien asennus	7
2.2	Selkänojan asennus	7
2.3	Raz-istuimen asennus	8
2.4	Säädettävän jalkatuen asennus	8
2.5	Kiinnitysten asennus.....	8
3.0	SÄÄDÖT: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN	
3.1	Selkänojan säätö	9
3.1.1	Selkänojan kulman säätö	9
3.1.2	Säädettävän selkäpehmusteen säätö.....	9
3.2	Muotoillun istuimen säätö	9
3.2.1	Muotoillun istuimen syvyyssäätö	9
3.2.2	Muotoillun istuimen korkeussäätö	10
3.3	Muotoillun päntuen säätö.....	10
3.4	Säädettävän jalkatuen säätö.....	10
3.5	Painoavusteisen jousijärjestelmän (WASS) säätö.....	11
4.0	KÄYTTÖ JA TOIMINTA	
4.1	Kallistustoiminto.....	12
4.2	Moniasentoinen selkänoja	12
4.3	Säädettävä selkäpehmuste.....	13
4.4	Muotoiltu istuin.....	13
4.5	Muotoiltu päntuki	14
4.6	Säädettävät jalkatuet	15
4.7	Pyörät.....	15
4.8	Tilt-Assist-poljin	15
4.9	Alusastia.....	16
5.0	PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	
5.1	Puhdistus jokaisen käytön jälkeen	17
5.1.1	Alusastia	17
5.1.2	Muotoiltu istuin	17
5.2	Puhdistus tarvittaessa.....	17
5.2.1	Säädettävä selkäpehmuste	17
5.2.2	Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat	17
5.3	Suosittelut puhdistustuotteet	17
6.0	RAJOITETTU TAKUU	18
7.0	YHTEYSTIEDOT.....	19

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Raz-AT600-suihkutuolin yleiskuvaus

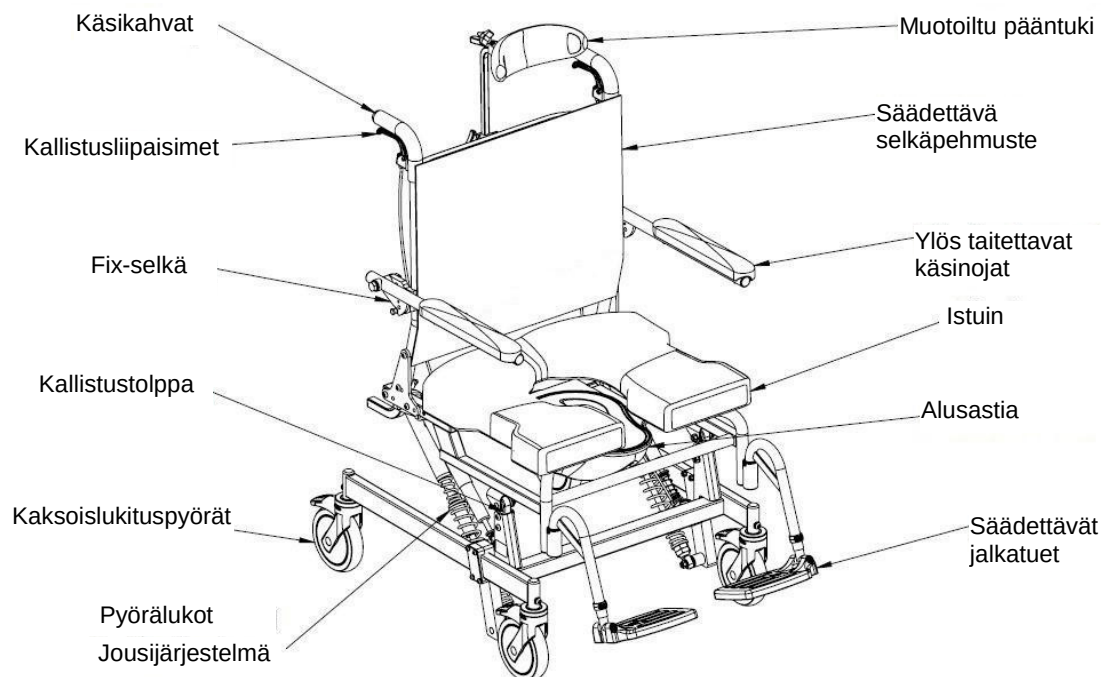

1.2 Raz-AT600-suihkutuolien tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raz-AT600
PAINOKAPASITEETTI	272 kg (600 lbs)
RUNGON LEVEYS (istuin ja takarunko)	56 cm (22")
KOKONAISLEVEYS	67 cm (26,5")
KOKONAISPITUUS (sis. jalkatuet)	99 cm (39")
ISTUIMEN LEVEYS (alusastia-istuin)	56 cm (22")
ISTUIMEN SYVYYS (takatolpan edestä istuimen etureunaan)	46 cm (18")
VAPAA KORKEUS alusastiakannattimilla: ilman alusastiakannattimia:	43-48,5 cm (18"-19") 47,5-50 cm (18,75"-19,75")
KÄSINOJAN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA	24cm (9,5")
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	55 cm ja 58 cm (21,75" ja 22,75")
TUOTTEEN PAINO (sis. jalkatuet)	38 kg (84 lbs)
KEHYKSEN JA RUNKO-OSIEN MATERIAALI	Ruostumaton teräs (Elinikäinen takuu ruostumista vastaan)
PIENIN KÄÄNTÖSÄDE	114 cm (45")


2.0 VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYYJÄN KÄYTTÖÖN

2.1 Pyörien asennus

Raz-AT600-tuolit toimitetaan ilman, että pyörät on asennettu paikoilleen. Tee pyörien asennus noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tarvittava työkalu: 6mm kuusioavain

1. Asenna pyörän varsi pohjarungon pyöräkoteloon.
 2. Kohdista pyörävarren kierrereikä reikään, joka on pyöräkotelossa.
 3. Aseta M8-1,25x30 mm pitkä nuppipääruuvi läpi M8-halkaistusta välilevystä ja pyöräkotelon reikään.
- HUOM.: Varmista, että jokaisella M8-ruuvilla on keskivahvaa kierreelukitusnestettä kierteissä ennen niiden käyttöä.**
4. Kierrä M8-ruuvi pyöräkotelon läpi ja pyörän varteen.
 5. Jatka M8-ruuvin kiertämistä, kunnes jaettu välilevy on täysin litteä ja M8-ruuvi on tiukalla.
 6. Toista vaiheita 1–5, kunnes kaikki neljä pyörää ovat tiukasti paikoillaan.

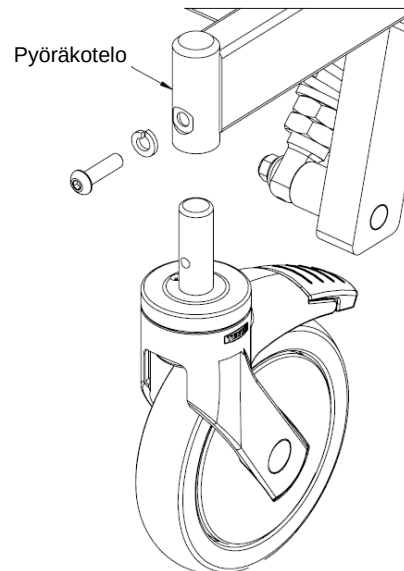

2.2 Selkänojan asennus

Tarvittavat työkalut: 6 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain


1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon.

VIHJE: Phillips-ruuvitaltta voidaan asettaa yhden levyn ja takatolppien läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.


3. Aseta mukana toimitettu 45 mm pitkä, nuppipääruuvi läpi toisesta selkänojalevyn kahdesta reiästä, ja työnnä ruuvi selkänojan runkoputken läpi.

HUOM.: Valitse etureikä 100° selkänojakulmalle tai takareikä 95° selkänojakulmalle.

4. Liitä ruuvin toinen pää kansialuslevyllä, litteällä aluslevyllä ja lukkomutterilla, kuten alla on esitetty.
5. Kiristä kokoonpano.
6. Toista vaiheet 3–5 toiselle jalkalevyllä.

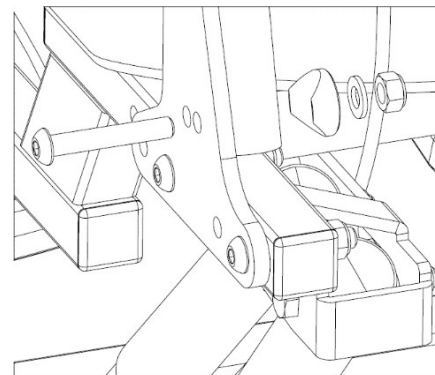


TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

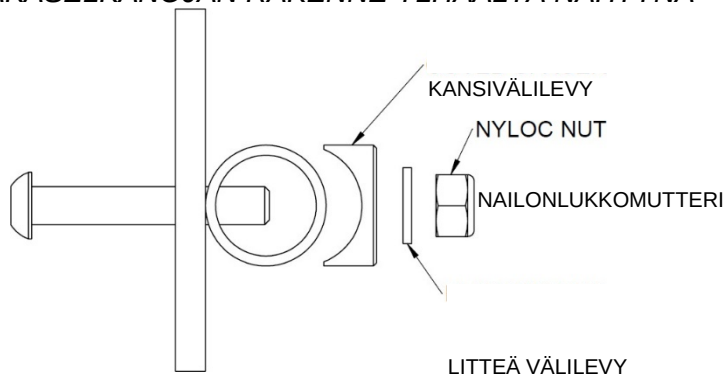


2.3 Raz-istuimen asennus

1. Varmista, että etupuolen jousikannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista niitä salvan avaamiseksi.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen kiinnikkeen, purista klipsiä ja sulje kiinnitin etutukiputkien ympärille.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

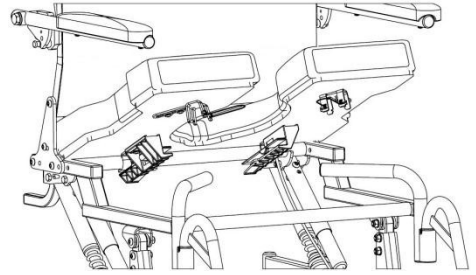

2.4 Säädetävän jalkatuen asennus

1. Poista pakatut jalkatuet pakkauksen sisällä olevasta varustelaatikosta.
2. Aseta jalkatuen ripustusputket vastakappaleisiin, jotka on hitsattu tuolin rungon etuosaan. *Jos tukiputket on suunnattu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.*

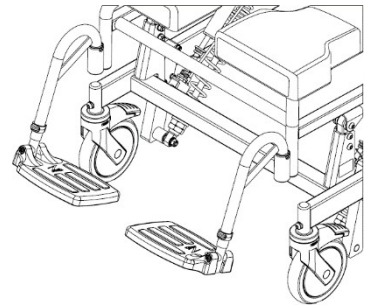

2.5 Kiinnitysten asennus

Kaikki kiinnitykset on asennettava tiukasti.


Lukkomutterit, jotka poistetaan jostain syystä, saattaa olla tarpeen vaihtaa uudelleen käytön sijaan.

Tarkista nailonlukkommutterien toiminta, kun kiinnität ruuvia takaisin paikoilleen.

Kiristettäessä on oltava havaittavissa huomattava vastus.

Jos sitä ei ole, vaihda nailonlukkommutteri uuteen.

Suositellaan tarkistamaan kaikkien kiinnitysten tiukkuus vuosittain.

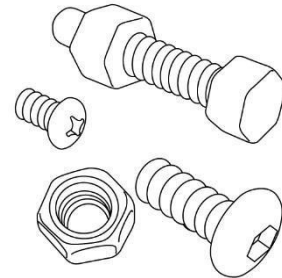

TÄRKEÄÄ!

SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.

3.1 Selkänojan säätö


3.1.1 Selkänojan kulman säätö

Tarvittavat työkalut: 6 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain

1. Löysää ja poista lukkomutterit ja kaarevat välilevyt molempien selkänojan pystyrunkoputkien sisältä.
2. Poista M8-1,25x45 mm keskiruuvit pystysuorista selkänojan rungon putkista molemmilta puolilta.
3. Kierrä selkänoja toiseen selkänojan asennuslevyn kahdesta asennosta.

HUOM.: Valitse etureikä 100° selkänojakulmalle tai takareikä 95° selkänojakulmalle.


4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit takaisin valittujen selkänojan asennuslevyn reikien läpi, ja työnnä ne kehysputkien läpi.
5. Kiinnitä ruuvin toinen pää kaarevilla aluslevyillä ja nailonlukkomuttereilla.
6. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella.

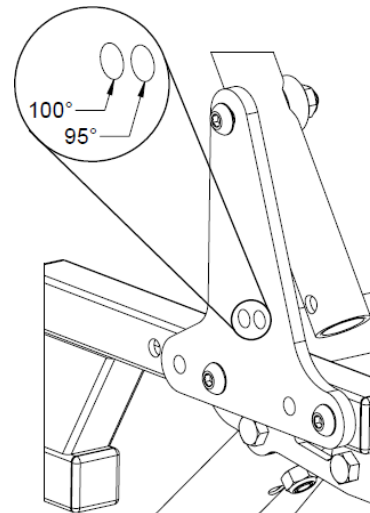

3.1.2 Säädetävän selkäpehmusteen säätö

Selän verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä soljista, mikä mahdollistaa monet eri asennot.

Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

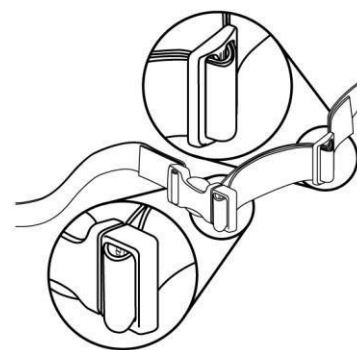


3.2 Muotoillun istuimen säätö

3.2.1 Muotoillun istuimen syvyyssäätö

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu/takasuuntainen säätövara.

Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta

1. Vapauta istuin avaamalla istuimen etuosan kannattimet.
2. Poista istuin nostamalla etureunaa ylös ja liu'uttamalla istuinta eteenpäin ja pois päin tuolista.
3. Löysää (älä irrota) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen.
4. Palauta istuin tuolin rungolle, asettaen istuimen etupuolen kannattimet etuosan tukiputkiin.
5. Liu'uta/kääntele istuin haluttuun asentoon.
6. Kiristä ruuveja juuri riittävästi pitämään kannattimet paikoillaan, varmistaen, että istuin on asennettu runkoon suoraan.
7. Kun istuin on tuolissa, liu'uta takakannattimia taakse kunnes ne osuvat tiukasti takaristiputkiin, ja kiristä ruuvit pitämään kannattimet paikoillaan.
8. Poista istuin (vaiheet 1 ja 2) ja kiristä kaikki kahdeksan ruuvia.
9. Kiinnitä istuin tuolin runkoon seuraamalla kohdassa 2.3 annettuja asennusohjeita.

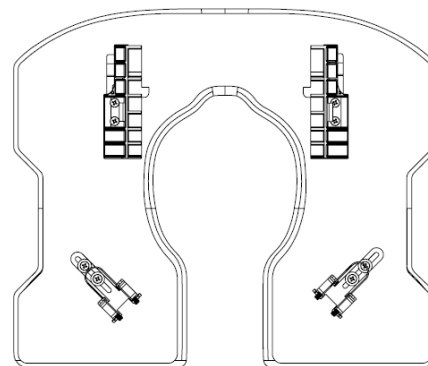


3.2.2 Muotoillun istuimen korkeussäätö

Istuimen korkeuden lattiasta säätämiseksi Raz-AT600-mallissa, istuimen runkoa nostetaan tai lasketaan pyöräjalustan suhteen istuimen tolpiasta molemmilta puolilta tuolia.

Tarvittavat työkalut: 5 mm kuusioavain, 6 mm kuusioavain, 10 mm kiintoavain, 13 mm avain

1. Poista ruuvit istuimen tolpiasta, jousitukilohkoista ja kaasujousien laajennusputkista.
2. Nosta tai laske tuolia käyttäjälle sopivaan korkeuteen.
3. Liu'uta jousien tukilohkot vastaamaan korkeuden muutosta.
4. Säädä istuin asentoon, jossa se on suorassa maanpintaan verrattuna.
5. Kiinnitä ruuvit takaisin omille paikoilleen.

Huom: Kaasujousien laajennusputken ruuvi on siirrettävä uuteen kohtaan, jotta istuin saadaan suoraan.

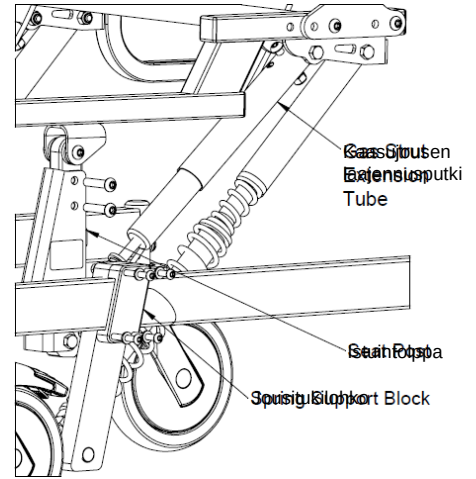


TÄRKEÄÄ!

SELKÄNOJAN KULMAN SUURENTAMINEN HEIKENTÄÄ VAKAUTTA TAAKSEPÄIN. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VAKAUSTARKISTUS SUORITETAAN, KUN JOKIN NÄISTÄ SÄÄDÖISTÄ ON TEHTY.

3.3 Muotoillun pääntuen säätö


Tarvittava työkalu: 5/32" kuusioavain

1. Löysää alaosan kolmiokantanutkia ja säädä pystysuoraa "joutsenkaula"-tankoa.
2. Löysää yläpuolen kolmionutkia ja säädä pääntuen tolppaa vaakasuunnassa sijainnin muuttamiseksi eteen/taaksepäin.
3. Muuttaaksesi pääntuen tyynyn kulmaa, löysää (älä irrota) muotoillun pääntuen takana olevat kolme ruuvia. Kierrä pääntukea pääntuen kiinnitystangon ympäri käyttäjälle sopivaksi, ja kiristä ruuvit kiinnittääksesi sen.
4. Varmista, että kaikki nupit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus.

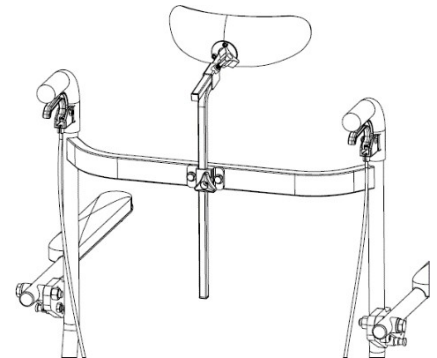

3.4 Säädettävän jalkatuen säätö

1. Poista muovinen napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Säädä jalkalevyn laajennusputki pystysuoraan sopivaan korkeuteen jalkatuen ripustusputken sisällä.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja jatkoputken läpi. Varmista, että napsautusnastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muovikliipsi napsahtaa tiukasti ripustusputkien ulkopuolelle.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle jalkalevylle.

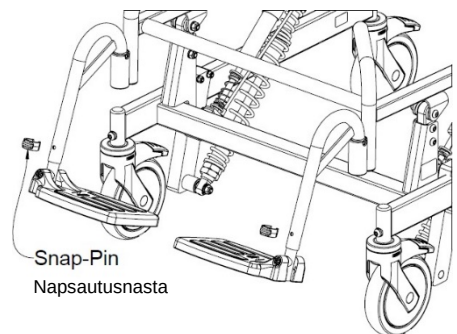


3.5 Painoavusteisen jousijärjestelmän (WASS) säätö

Tarvittava työkalu: 30 mm kiintoavain

WASS:n kytkentää voidaan muuttaa säätämällä kuusioruuveja tangon mitalla käyttäjän painon mukaisesti auttamaan hoitajaa kallistamisessa.

Siirrä kuusiomuttereita tankoa ylös virittääksesi jouset. Tätä suositellaan painavammille käyttäjille, koska jouset auttavat käyttäjän painon tukemisessa kallistuksen aikana. Siirrä kuusioruuveja tankoa alas irrottaaksesi jouset osittain, jos kallistustoiminto tuottaa vaikeuksia hoitajalle.

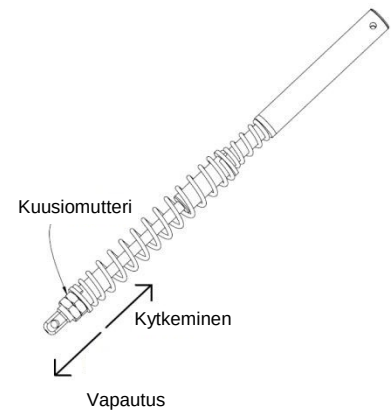


TÄRKEÄÄ!

SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.

4.1 Kallistustoiminto

Raz-AT600-suihkutuoli kallistuu enintään 40° ollakseen mukavampi ja helpottaakseen käyttäjän painetta. Kaksi kaasujousta helpottaa tätä toimenpidettä ja tekee kallistuksesta tasaisen käyttäjän kannalta, sekä helpottaa kallistusta hoitajalle. Kallistaakseen tuolia, hoitajan on puristettava molempia kallistusliipaisimia ja siirrettävä tuoli haluttuun kulmaan. Lukitaksesi tuolin paikalleen, vapauta vain liipaisimet. Uudessa tuotteessa liipaisimet ja jouset saattavat vaikuttaa jäykiltä. Jäykkyys on normaalia ja poistuu käytön mittaan. Tilt-Assist-polkimen käyttäminen auttaa kallistamaan tuolin runkoa taaksepäin. Kallistustoimintoa saa käyttää vain, kun pyörät ovat lukittuja. *HUOM.: Kun tuoli on asennettu matalimmalle korkeusasetukselle, niin suurin mahdollinen kallistuskulma on 40°. Mitä korkeammalle tuoli asetetaan, sitä pienemmän kulman sitä voi kallistaa taakse.*

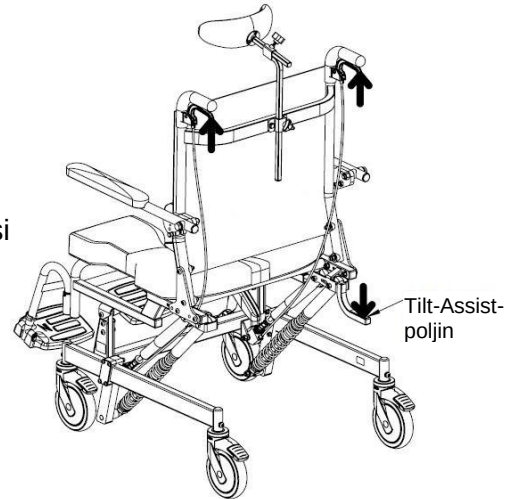


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ YRITÄ KALLISTAA TUOLISSA ISTUJAA, JOS HOITAJA EI FYYSISESTI PYSTY KÄYTTÄMÄÄN KALLISTUSMEKANISMIA SUJUVASTI JA TURVALLISESTI KÄYTTÄJÄN OLLESSA TUOLISSA. KAIKKIEN HOITAJIEN ON TUNNETTAVA OIKEAT KALLISTUSTEKNIIKAT ENNEN KUIN HE AUTTAVAT KÄYTTÄJÄÄ SUIHKUALUSASTIAN KANSSA. LAINTIOVYÖTÄ SUOSITELLAAN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE LISÄTURVATOIMENA.

4.2 Moniasentoinen selkänoja

Moniasentoselkänoja voidaan asettaa 95° tai 100° kulmaan. Käsinojat voidaan taittaa ylös mahdollistamaan helpomman siirron, ja ne lukittuvat automaattisesti, kun ne taitetaan takaisin alas. Moniasentoselkänojassa on vakiomallinen 20" selkäkorkeus.

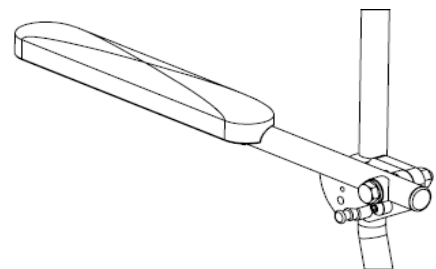

4.3 Säädetty selkäpehmuste


Moniasentoisessa selkänojassa on säädetty selkäpehmuste, joka tukee vartaloa parhaassa asennossa ja mukavimmalla mahdollisella tavalla. Pehmuste on irrotettava konepesua varten.

Asentaaksesi säädetty selkäpehmusteen:

1. Aseta kangas selkätuen tankojen etupuolta vasten varmistaen, että kun se kiedotaan ympäri, hihnojen kiinnikkeet osoittavat kankaasta pois päin ja silmukat osoittavat alaspäin.
2. Ensimmäinen (1) ja toinen (2) hihna ovat ristitangon yläpuolella.
3. Kolmas (3), neljäs (4) ja viides (5) hihna on sijoitettu ristitangon ja käsinojen kiinnityslevyjen väliin.
4. Kuudes (6) hihna on käsinojen kiinnityslevyjen alapuolella.
5. Säädy kaikki hihnat käyttäjän tarpeen mukaisesti.

Selän verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä soljista, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.


Säädetty selkäpehmusteen irrottamiseksi avaa hihnojen soljet.

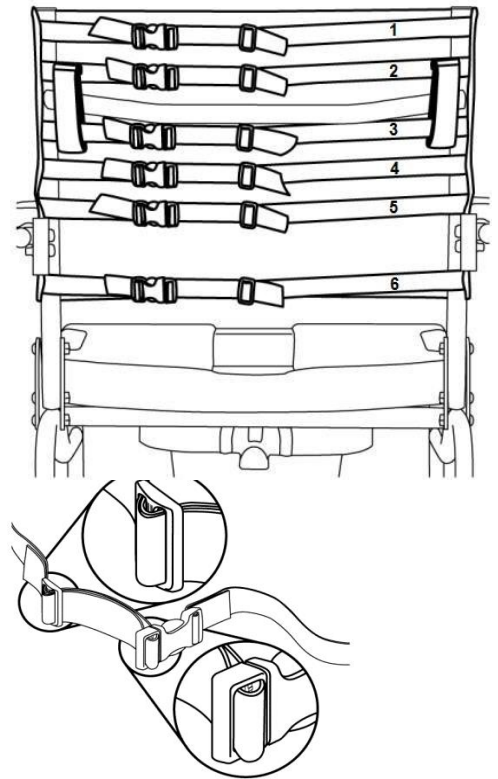

4.4 Muotoiltu istuin

Vakiomallinen, muotoiltu Raz-AT600-suihkutuolin istuin on suunniteltu auttamaan lantion pysymistä tasapainossa ja se on muotoiltu vähentämään painetta. Muotoillut istuimet on valmistettu pehmeästä, kiinteäpintaista vaahdosta, ja niitä on saatavana vakiomallisena 58 cm (23") leveänä, 46 cm (18") syvänä istuimena. Paineen vähennyksen päivityksenä on myös saatavana Visco-Foam-rajapintaistumia. Visco-Foam-istuimia on saatavana viitenä mallina: edestä yhtenäinen, edestä avoin, takaa avoin, vasemmalta avoin ja oikealta avoin.

Kaikissa istuimissa on erityinen Ischial Pelvic Alignment System (IPAS), joka mahdollistaa 5 cm (2") etu- ja takasäädön, lukkiutuu paikoilleen siirtoja varten, ja joka on helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisävalikappaleita on saatavana istuimen etu- ja takakulmalle. Kaikki Raz-tuolit sopivat useimpien vakiomallisten WC-istumien päälle, kun alusastia ei ole paikoillaan.

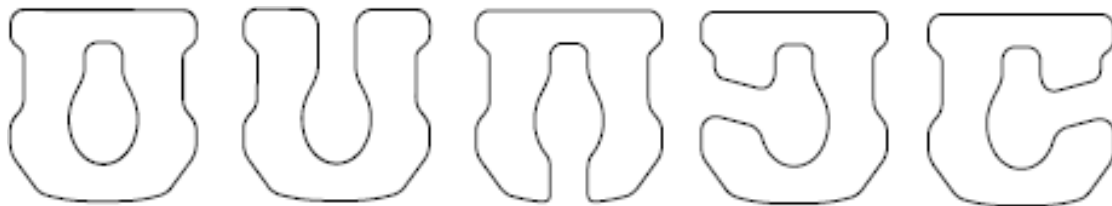

Yhtenäinen
etuosa

Avoin
etuosa


Avoin
takaosa

Avoin
vasemmalle

Avoin
oikealle

Asentaaksesi Raz-istuimen:

1. Varmista, että etupuolen jousikannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista niitä salvan avaamiseksi.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen kiinnikkeen, purista klipsiä ja sulje kiinnitin etutukiputkien ympärille.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

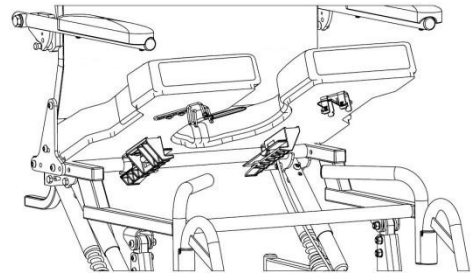

TÄRKEÄÄ!


ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA ISTUIMEN KORKEUTTA ILMAN VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN APUA. KORKEAMMAT ISTUIMEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN JA LOUKKAANTUMISEEN.

4.5 Muotoiltu pääntuki

Kaikkiin Raz-AT600-suihkutuoleihin kuuluu muotoiltu pääntuki. Muotoiltu pääntuki on muotoiltu suojaamaan päätä mukavasti ja se on helppo puhdistaa. Muotoiltua pääntukea voidaan säätää portaattomasti eteen- ja taaksepäin 125 mm (5") alueella, ja pystysuunnassa 29,2 cm (11½") alueella.

Säätääksesi muotoiltua pääntukea:

1. Löysää alaosan kolmiokantanuppia ja säädä pystysuoraa "joutsenkaula"-tankoa.
2. Löysää yläpuolen kolmionuppia ja säädä pääntukea vaakasuunnassa sijainnin muuttamiseksi eteen/taaksepäin.
3. Muuttaaksesi pääntuen tyynyn kulmaa, löysää (älä irrota) muotoillun pääntuen takana olevat kolme ruuvia. Kierrä pääntukea pääntuen kiinnitystangon ympäri käyttäjälle sopivaksi, ja kiristä ruuvit kiinnittääksesi sen.
4. Varmista, että kaikki nupit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta varmistetaan käyttäjän turvallisuus.

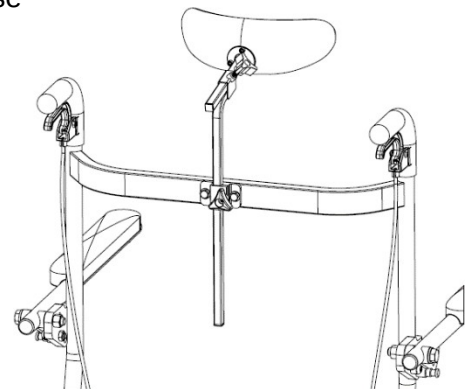

4.6 Säädetävät jalkatuet


Säädetävät jalkatuet ovat vakiovaruste kaikissa Raz-suihkutuoleissa. Kuljetusta varten jalkatuet voidaan taittaa ylös, kiertää sivulle tai poistaa kokonaan. Säädetäviä jalkatukia voidaan laajentaa pitempijalkaisille käyttäjille lisävarusteena saatavilla jalkatuen laajennusputkilla, 5 cm (2") pitemmillä putkilla, joita voidaan tilata kaikkiin Raz-suihkutuoleihin.

Asettaaksesi säädetävät jalkatuet:

1. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
2. Jos ripustusputket on kohdistettu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

Säätääksesi säädetävien jalkatukien pituutta:

1. Poista napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sijoita jalkalevy uudelleen käyttäjälle sopivaan pituuteen.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja sisäputken läpi.

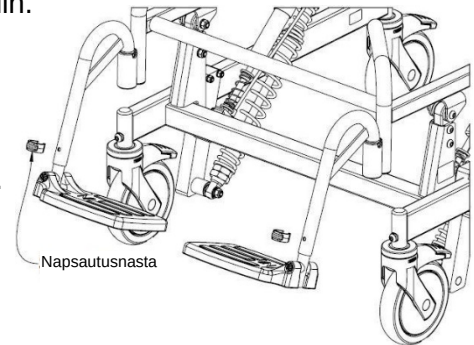


Kierrääksesi säädetäviä jalkatukia:

1. Nosta jalkatukien ripustusputkia irrottaaksesi tapit.
2. Kierrä jalkatukia ulospäin tai sisäänpäin.

Poistaaksesi säädetävät jalkatuet nosta jalkatuet pois rungon vastaholkeista.

4.7 Pyörät


Jokainen Raz-suihkutuolin pyörä on varustettu kaksoislukitusominaisuudella, joka samanaikaisesti estää pyörää kääntymästä ja pyörimästä. Kytkeäksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon vivun päätä, kunnes se asettuu "päällä"-asentoon. Avataksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon koholla olevaa päätä, kunnes se asettuu "pois"-asentoon.

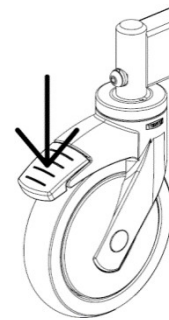

AINA ennen käyttäjän siirtämistä tai kallistamista, vapauta suuntalukko (jos käytössä) ja käännä kaikki neljä kääntyvää pyörää ulospäin parhaan vakauden saavuttamiseksi.

4.8 Tilt-Assist-poljin


Tilt-Assist-poljin on saatavana Raz-AT600-suihkutuoliin helpottamaan hoitajalle tuolin kallistamista.

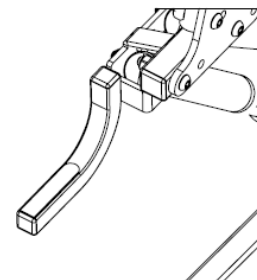

4.9 Alusastia

Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin.

HUOM.: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.

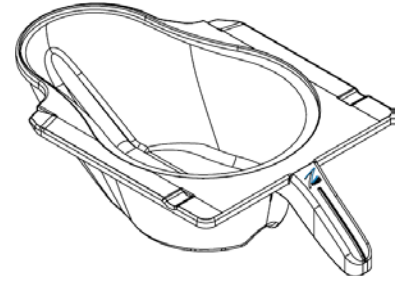

TÄRKEÄÄ!

VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA ON OTETTAVA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN RAZ-JÄLLEENMYYJÄÄN KAIKKIEN KIINNITYSTEN, PYÖRIEN JA PYÖRÄLUKKOJEN, LAITTEISTON JA KAIKKIEN MUIDEN LIIKKUVIEN OSIEN TARKASTAMISTA VARTEN

TÄRKEÄÄ!

KAIKKIEN HOITAJIEN ON TUNNETTAVA OIKEAT KALLISTUSTEKNIIKAT ENNEN KUIN HE AUTTAVAT KÄYTTÄJÄÄ SUIHKUALUSASTIAN KANSSA. LAINTIOVYÖTÄ SUOSITELLAAN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE LISÄTURVATOIMENA.

5.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

5.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

5.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

HUOM.: Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiaine-puhdistusliuoksen.

5.1.2 Muotoiltu istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.
ÄLÄ UPOTA istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.
3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympärykseen pääsee käsiksi paremmin.

5.2 Puhdistus tarvittaessa

5.2.1 Säädetty selkäpehmuste

1. Poista muovisalvat ja kolmiliu'ut selkäpehmusteen hihnoista, kiinnittäen poiston aikana huomiota siihen, miten hihnat kulkevat kunkin osan läpi.
2. Poista selkäpehmuste selkänojan rungosta ja konepese se miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä, normaalilla tai hellävaraisella ohjelmalla. Asenna myös muut hihnojen tarvikkeet, kuten H-hihna sekä lantio- ja rintatukihihnat.
3. Asenna selkäpehmuste ja muut kohdistustarvikkeet tuoliin ja anna niiden kuivua.
ÄLÄ kuivaa selkäpehmustetta vaatteiden kuivauslaitteessa, tai se voi vaurioitua.
4. Kokoa kaikki muovisoljet ja kolmiliu'ut hihnoin.
5. Sääda hihnat haluttuun kireyteen.

5.2.2 Runko, käsinojat, säädettyt jalkatuet ja muut osat

1. Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.
2. Tarvittaessa suihkuta runko ja osat laimennetulla (10 osaa vettä 1 osaan liuosta) kalkin/kattilakiven poistoaineella (kuten CLR), harjaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee perusteellisesti vedellä. **ÄLÄ** sekoita kalkin/kattilakiven poistoliuosta mihinkään muuhun nesteeseen, tai voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toimintaan liittyen havaitaan mahdollisia ongelmia.

Suihkutuoli ja sen osat on useita kertoja vuodessa pyyhittävä laimennetulla kalkin/kattilakiven poistoliuoksella, jotta vähennetään kuumavesihuuhtelun aiheuttamia kerrostumia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko tuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

5.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Tuberkuloottinen pintapuhdistusaine Keskitalon desinfiointiaine	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.) SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkki- ja kattilakivisuojaus	CLR

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raz-suihkutuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan valtion/alueen lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design takaa kahden (2) vuoden ajan valmistuspäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla Raz-suihkutuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Raz-suihkutuolisi. Jos et saa tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen tämän ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisia:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä Raz-kuntoutussuihkutuolin takuun. Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä sisältää, rajoittumatta, muutokset valtuuttamattomia osia ja liitäntöjä käyttämällä, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdyistä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja sitä sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoa pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan Raz-suihkutuoliin.

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAAVIA JAUHEITA TAI HANKAUSTYÖNYJÄ RAZ-SUIHKUTUOLIN PUHDISTUKSESSA.

ÄLÄ UPOTA RAZ-SUIHKUTUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINELAJÄÄMÄT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEISIIN JA RYHTYMÄTTÄ ASIANMUKAISIIN VAROTOIMENPITEISIIN IHMISTEN KEMIKAALEILLE ALTISTUMISEN SUHTEEN.

7.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että Raz-kuntoutussuihkutuoli kootaan oikein, ja että kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä joko jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Suomi
Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

USA JA MUU MAAILMA
Raz Design Inc.
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATSO LISÄTIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA LIITTYEN OIKEAAN HÄVITTÄMISEEN.

OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS MISSÄÄN VAIHEESSA TUNTUU, ETTÄ JOKIN RAZ-SUIHKUTUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTAA TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SUIHKUTUOLIN TOIMITTANEeseen JÄLLEENMYYJÄÄN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA ENNEN TUOLIN KÄYTTÖÄ. JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTAVA SELKEÄSTI, ETTÄ SUIHKUTUOLI ON KORJAUKSEN TARPEESSA, EIKÄ SITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU JA KAIKKI ONGELMAT RATKAISTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN:

SÄHKÖPOSTILLA	info@razdesigninc.com
PUHELIMELLA	+1 877 720 5678

rehaco.