

JAKELUKETJUN TOIMIJAT / TUNNISTUSKAAVIO

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Tuotteen tunnustekilpi:
Valmistaja—tuotteen lopputarkastus / nimi:	
Allekirjoitus:	

<u>Maahantuoja / EU-jakelija:</u> (nimi, osoite, yhteystiedot)	Maahantuoja / EU-jakelija (leima):

<u>Myyntipaikka / Huoltoedustus:</u> (nimi, osoite, yhteystiedot)	Myyntipaikka / Huoltoedustus (leima):
 Rehaco Oy Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu 040 705 5886 info@rehaco.fi	

Myyntipäivä (pv, kk, v):	Myyjän nimi (painokirjaimin), puhelinno, leima ja allekirjoitus:
____ : ____ : ____	



KÄYTTÖOHJE (Fi)
=> lääkinällinen laite: kuntoutusrattaat (lastenrattaat)

PIPER
(ver. Comfort / koot: UNI)



Valmistus ja jakelu:
 PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419, CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
 http:// www.patron.eu

KAAVAKUVA



TEKNISET TIEDOT

TEKNINEN TIETO:	PIC34
Selkänojan korkeus (mm)	680
Istuimen syvyys (mm)	290
Istuimen leveys (mm)	250-350
Istuimesta jalkatukeen (mm)	250-375
Selkänojan kulma	90°, 135°
Istuinkulma	26°
Kokonaispituus (mm)	1080
Kokonaisleveys (mm)	590
Kokonaiskorkeus sis. kahvan (mm)	1000
Kokonaispaino (kg)	14,5
Maksimikuormitus (kg)	50,0
Pituus kokoonlaitettuna (mm)	1000
Leveys kokoonlaitettuna (mm)	310
Korkeus kokoonlaitettuna (mm)	300

TAKUUEHDOT:

1. Tähän tuotteeseen sovelletaan 24 kuukauden takuuta myyntipäivästä lukien. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
2. Tuotetta on käytettävä ainoastaan suunniteltuun käyttötarkoitukseen käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudattaen.
3. Tuotetta on käytettävä, pidettävä kunnossa, puhdistettava ja säilytettävä asianmukaisesti käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Tunnistuskilpeä ei saa vetää irti. Sen on oltava luettavissa ja vahingoittumaton koko takuuajan.
5. Takuuvaatimus tulee esittää myyjälle, jolta tuote on ostettu. Asianmukaisesti täytetty ”takuukaavake” ja ostotodistus on liitettävä takuuhakemukseen. Vioista tulee ilmoittaa välittömästi.
6. Takuuvaatimusmenettely voidaan käynnistää, kun tuote on lähetetty täydellisenä alkuperäisessä pakkauksessa huolellisesti pakattuna ja vaurioilta suojattuna. Omistaja on velvollinen toimittamaan tuotteen puhtaana yleisten hygieniatoimenpiteiden mukaisesti. Perushuoltoa ja puhdistusta ei voida vaatia takuuvaatimuksen yhteydessä.
7. Takuu ei kata: vikoja, jotka aiheutuvat tuotteiden ylikuormittamisesta, onnettomuudesta, tahallista vaurioittamisesta, tuotteeseen ja/tai sen lisävarusteisiin ilman valtuutusta tehdyistä muutoksista, osien kulumisesta, etenkin verhoiluun likaantumisesta ja vaurioitumisesta, muoviosien, renkaan kulutuspinnan kulumisesta, renkaan puhkeamisesta jne.
8. Takuu lakkaa olemasta voimassa, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: käyttäjä jättää noudattamatta tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja valmistajan ehdottamia säilytys- ja kunnossapitotoimenpiteitä, tai mikäli tuotetta on huoltanut muu kuin valtuutetut huoltokeskukset, tai kun tunnistuskilpi ei ole paikallaan rattaissa sekä takuukaavakkeessa.
9. Takuuaikaa ei voi vaihtaa käyttöaikaan, eli käyttöikään, vaikka tuotetta olisi käytetty oikein ja huollettu käyttöohjeen mukaisesti.
10. Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa mahdollisista tappioista ja vammoista, jotka aiheutuvat tuotteen manipuloinnista ja käytöstä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastaisesti.

Valmistaja, PATRON Bohemia a.s., varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin.

MERKINTÖJÄ:

KAAVIOKUVAN SELITYS


- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. | Kahva | 18. | Kuljetuslukitus |
| 2. | Taittuva kahva | 19. | Selkänoja |
| 3. | Turvavyö | | |
| 4. | Pohjetuki | | |
| 5. | Pohjetuen sarana | | |
| 6. | Jalkatuki | | |
| 7. | Jalkatuen lukitussokka | | |
| 8. | Jalkatuen irrotuspainikkeet | | |
| 9. | Etupyörät | | |
| 10. | Suuntalukko | | |
| 11. | Kääntyvät tukipyörät | | |
| 12. | Takapyörät | | |
| 13. | Takapyörien irrotuspainikkeet | | |
| 14. | Jarruvipu | | |
| 15. | Avauspoljin | | |
| 16. | Kokoontaittokahva | | |
| 17. | Selkänojan kallistuksen lukitussalpa | | |



Kuva 1




Kuva 2

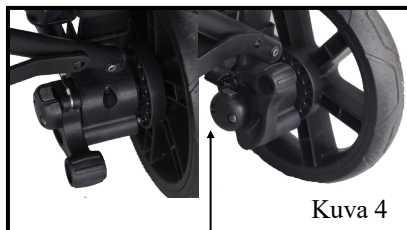

Kuva 4



Kuva 3

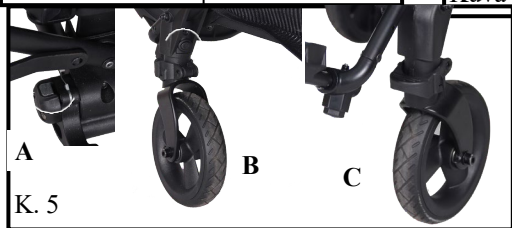


A

B

C

K. 5

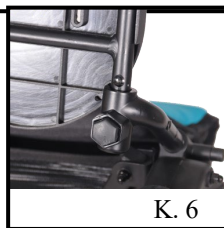


K. 6



Kuva 7




Kuva 8

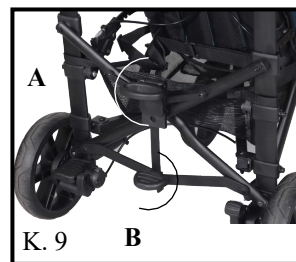

A

B

K. 9

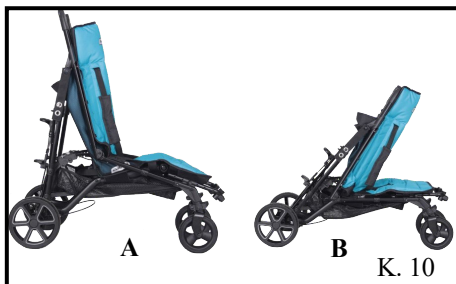

A

B

K. 10



Kuva 11



Kuva 12

Rattaiden manuaalinen kuljettaminen:

- Hyödynnä luiskia ja hissejä, kun niitä on tarjolla
- Portaita tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tarvitaan ainakin yksi avustaja toimimaan apuna
- Rattaita ei tule yrittää ajaa ylös tai alas portaikkoja, ellei työntäjä avustajineen pysty hallitsemaan rattaita ja käyttäjän painoa.
- Pidä lepotauko säännöllisin välein, mikäli väsymys uhkaa
- Käyttäjän tulee pitää kätensä rattaiden sisäpuolella kuljetuksen aikana
- Rattaita EI MILLOINKAAN saa nostaa turvatangosta tai jalkatuesta!

Laskeutuminen portaissa:

Sijoita rattaat tiukasti kahvasta pitäen kohtisuoraan etupyörät ylimmällä portaalla, kallista kahvaa taaksepäin ja työnnä rattaita eteenpäin, kunnes takapyörät ovat yläportaan päällä; avustaja seisoo etupuolella rattaita tukien ja laskee ne alas eturungosta tarttuen; painoa kantaen takapyörät lasketaan alas portaalta ja jatketaan porras portaalta alas asti.

Portaiden nouseminen:

Sijoita rattaat tiukasti kahvasta pitäen kohtisuoraan etupyörät alinta porrasta vasten, kallista kahvaa taaksepäin ja nosta seuraavalle askelmalle; avustaja seisoo etupuolella rattaita tukien ja nostaa rattaita erurungosta tarttuen, ja jatketaan porras portaalta ylös asti.

Kokoontaitettujen rattaiden kantaminen:

Rattaiden kantaminen edellyttää kuljetuksen tukihinnan kiinnittämistä. Tartu ainoastaan päärungosta. Muista osista piteleminen ei ole sallittua!

KUNNOSSAPITO, TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN:

- Nämä rattaat ovat korkealaatuisen suunnittelun tulosta ja oikein käytettynä ja huollettuna tarjoavat vuosien ongelmattomaa käyttöä
- Tarkasta lukituslaitteet, salvat, jalkatuki, nivelliitokset säännöllisesti niiden tukevuuden ja toimintakunnon varmistamiseksi
- Jarrut, pyörät ja renkaat ovat alttiita kulumiselle ja ne tulee tarvittaessa vaihtaa rattaiden toimittajan valtuuttaman korjaajan toimesta.
- Suosittelemme rattaiden tarkastamista ja hyväksyntää valtuutetulla korjaajalla vuosittain.
- Suosittelemme käyttämistä huollossa 24 kuukauden käytön jälkeen.
- Mikäli rattaat ovat vaurioituneet tai korjauksen tarpeessa, valtuutettu korjaaja pystyy neuvomaan mitä toimenpiteitä tarvitaan.
- Tuotetta koskevaa tietoa on vaihtoehtoisesti saatavissa PATRON Bohemia a.s.:n asiakaspalvelusta.
- Korjauksiin tulee käyttää ainoastaan PATRON Bohemia a.s.:n toimittamia varaosia.
- Mikäli rattaiden osissa ilmenee jäykkyyttä tai niiden käyttäminen on vaikeaa (6 kuukauden sisällä), tulee varmistaa, ettei synny ole lika; tällöin voidaan käyttää voitelusuihketta, esim. WD 40 (ei öljyä tai rasvaa). Varmista, että voiteluaine tunkeutuu komponenttien väliin kuitenkin liiallista suihkutusta välttämällä, sillä se voi lisätä lian kertymistä. Pyyhi kaikkia ylimääräisiä suihke pois. Liikkuvien osien säännöllinen voitelu pidentää rattaiden toimintaikaa ja helpottaa rattaiden taittamista auki ja kokoon.
- Varmista, että olet perehtynyt rattaiden toimintaan. Niiden tulisi aina avautua ja taittua kokoon vaivatta. Mikäli näin ei ole, älä pakota mekanismia – pysähdy ja lue ohjeet.
- Pyörät, muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä pyhtaaksi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Istuinkangas voidaan pestä käsin (max. 30 °C).
- Älä käytä hankaavia, ammoniakkipohjaisia, valkaisevia tai alkoholityyppisiä puhdistusaineita.
- Kosteille olosuhteille altistumisen jälkeen rattaat tulee pyyhkiä kuivaksi pehmeällä liinalla ja jättää kokonaan avattuna lämpimään.
- Säilytä rattaat kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Tarkista ja kiristä ruuviliitokset säännöllisesti.
- Mikäli rattaissa on käyttövajereita (jarrut, teleskoopit, kallistus), ne tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa säätää ja voidella.

Tuotteen toimintaikä: odotettavissa oleva ikä 5 vuotta. Tätä toimintaikaa käytettiin pohjana tuotekehitykselle ja tuotteen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen koskevien vaatimusten määrittelylle. Näihin tietoihin sisältyvät myös kunnossapitoa koskevat vaatimukset tuotteelta vaaditun tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Hävittämisohteet: noudatettava käyttämään paikallisesti voimassa olevia ympäristönsuojelusäädöksiä.

Jalkalaudan korkeussäätö:

Vedä jalkatuen lukitussokkaa eturungon molemmilta puolin (kuva 2). Säädä jalkalaudan korkeus molemmilta puolin siirtämällä siten, että reidet ovat lähes yhdensuuntaiset istuimen kanssa. Älä nosta jalkalautaa liian ylös, koska tämä voisi aiheuttaa epämiellyttävää painetta pakaroille. Lukitse uudelleen sokalla. Kokeile vetämällä jalkatuesta, että se on tukevasti kiinni. Lukituessa kuuluu loksahdusääni.

Pysäköintijarru:

Jarru kytketään päälle painamalla takapyörällä olevaa jarruvipua (kuva 4). Varmista, että rattaat eivät pääse liikkumaan. Pysäköintijarru kytketään pois päältä jarruvipua ylöspäin vetämällä.

Etupyörän suuntalukko:

Etupyörien haarukat voidaan tarvittaessa lukita kääntymisen estämiseksi. Pyörät lukittuvat kulkusuuntaan. Lukitseminen tapahtuu painamalla lukitusvipu alas (kuva 5c).

Varmista lukittuminen kummastakin pyörästä kevyesti kokeilemalla. Pyörien lukitus avataan nostamalla vipu yläasentoon.

Pohjetuen säätäminen:

Paina tukisaranan ulkosivuilla olevia painikkeita (kuva 3), säädä haluttuun kulmaan ja vapauta painike. Kokeile kevyesti tukea painamalla, että se on tukevasti kiinni. Lukituessa kuuluu loksahdusääni.

Pohjetukea nostettaessa sen asema säädetään painikkeita painamalla.

Selkänöjan kallistus:

Selkänöja on säädettävissä 6 eri asentoon (kuva 1)

Tartu selkänöjan kallistuksen lukitussalvasta (kuva 7), vedä säätömekanismista ylöspäin ja kallista selkänöja haluttuun asentoon. Vapauta lukitussalpa ja paina selkänöjaa varmistaaksesi, että se on tukevasti lukittunut (ei siirrettävissä).

Perusvarusteet

Viisipistevyö:

Avaa kaikki muoviset pikalukitukset, aseta lapsi rattaisiin ja säädä vyö sopivan pituiseksi. Kiinnitä vyö ja varmista vetämällä, että se on tukevasti kiinni.

Pituuden säätäminen – aseta lapsi rattaisiin, ja vedä olkahihnat lapsen pituuden mukaisesti suojuksen aukon läpi (kuva 11) ja suojuksen alta selkänöjassa olevaan aukkoon, paina olkahihna tämän aukon läpi (kuva 12).

Kori:

Kiinnitetään painokiinnikkeillä runkoon

Valinnaiset varusteet:

Täytepehmuste

Sadesuojus

Flexi-pehmusteet – sivupehmusteet istuinlevyden säädölle

Kuomu Classic

Säädettävä päätuki

Jalkapeite

Tämä tuote on varustettavissa laajalla valikoimalla kiinnitys- ja asentotukivarusteita. Vastaavat käyttöohjeet löytyvät erillisistä esitteistä.

2) Rattaiden käyttö:

Rattaisiin nouseminen:

varmista, että jarrut ovat päällä. Jalkatuki voidaan irrottaa pääsyn helpottamiseksi; mikäli mahdollista, rattaiden selkäpuoli sijoitetaan seinää tai liikkumatonta esinettä vasten (vaihtoehtoisesti toinen henkilö; aseta lapsi varovasti rattaisiin, kiinnitä turvavyö ja asenna jalkatuki. Lapsen tulee aina tuntea olonsa miellyttäväksi.

Rattaista pois siirtyminen:

kytke pysäköintijarru päälle. Tarvittaessa pyydä toista henkilöä pitämään rattaista tukevasti kiinni. Mikäli poistaminen sitä edellyttää, säädä jalkatuen asentoa ja poista mahdolliset kiinnitys- ja asentotukivälineet. Poista turvatanko ja nosta lapsi varovasti pois rattaista.

Reunakiveysten ja matalien esteiden ylittäminen:

Älas- siirrä etupyörät kiveyksen reunalle, pidä tukeva ote kahvoista ja kallista rattaista hieman taaksepäin. Paino takapyörillä pitäen laske rattaat reunakiveykseltä takapyörilleen.

Ylös - nosta etupyörät reunakiveykselle. ÄLÄ MILLOINKAAN törmää etupyörillä kiveykseen! Tukeva ote kahvoista pitäen kallista rattaista taaksepäin ja kallista ne takapyörien varaan. Aja eteenpäin ja nosta etupyörät reunakiveyksen päälle. Sijoita takapyörät reunakiveyksen pohjalle ja nosta ylemmälle tasolle.

Fi

(Käyttöohje – uusimman version pvm: 10.05.2021)

JOHDANTO:

Hyvä asiakas, lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Noudata kaikkia tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta ja sen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä ammattihenkilökuntaan tai huoltoon. Ilmoita tuotteeseen liittyvästä vakavasta haittatapahtumasta tai tuotteen käyttöön liittyvästä käyttäjän terveydentilan heikkenemisestä välittömästi tuotteen viralliselle jälleenmyyjälle maassasi tai tuotteen valmistajalle. Tämän tuotteen viimeisimmät turvallisuus- ja/tai takaisinvetotiedot sekä tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavissa ottamalla yhteyttä tuotteen viralliseen jälleenmyyjään maassasi tai tuotteen valmistajaan. Säilytä tämä asiakirja turvallisessa paikassa myöhempiä tarvetta varten.



..... VAROITUS, HUOMIO:

① **HUOMIO! Kahvaan ripustettu kuorma (laukku, ...) vaikuttaa rattaiden vakauteen!**

② **Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa!**

③ **Suosittelut rengaspaine: 180 kPa**



.....maksimikuormitus.

VAROITUS! Sormet ja suojuksen pidettävä erillään liikkuvista osista rattaita käytettäessä.

VAROITUS! Lasta ei milloinkaan saa jättää ilman valvontaa, vaikka käytettäisiin vöitä ja jarruja.

VAROITUS! Ennen käyttöä tulee varmistaa, että kaikki lukitukset ja turvalaitteet ovat toiminnassa.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että istuin on tukevasti lukittunut runkoon.

VAROITUS! Istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.

VAROITUS! Tätä tuotetta ei tule käyttää lenkkeillessä eikä luisteluradalla.

HUOMIO! Tämä käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen rattaiden ensimmäistä käyttökertaa ja säilyttää myöhempiä tarvetta varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, mikäli käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja turvahuomautuksia ei noudateta.

TUOTE - KUVAUS, OMINAISUUDET, TUNNISTAMINEN:

Hankkimanne tuote on tarkoitettu monipuoliseen jokapäiväiseen käyttöön ulkosalla sekä sisätiloissa kotona. Ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa tulee loukkaantumisvaaran välttämiseksi huolellisesti tutustua sen käyttöön, käsittelyyn ja kaikkien ominaisuuksien toimintaan. Erityisesti tulee huomioida seuraavat ohjeet:

- Pätevän henkilöstön tulee opastaa kaikki käyttäjät ja heidän avustajansa tuotteen käyttöön. Käyttäjien ja/tai avustajien velvollisuutena on lukea ja saada opastus etenkin tähän tuotteeseen liittyvistä erityisistä riskeistä, joita käsitellään tähän asiakirjaan sisältyvissä turvaohjeissa.
- Tuote on säädetty käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Lisämuutokset kuuluvat ainoastaan pätevän henkilöstön tehtäväksi.
- Suosittelemme tuotteen kustomoinnin tarkistamista kerran vuodessa tuotteen käyttäjälle optimaalisten säätöjen varmistamiseksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa anatomia muuttuu (esim. vartalon mitat ja paino), jolloin säätämistä suositellaan puolivuositain.

- Nimenomainen tuotteenne saattaa poiketa tässä esitetyistä vaihtoehtoista. Etenkin kaikkia tässä kuvattuja lisävarusteita ei välttämättä ole asennettu tuotteeseen.
- Valmistaja varaa oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tässä käyttöohjeessa kuvattuun rakenteeseen.

Tuotteen ominaisuudet:

Tämä tuote luokitellaan luokan 1 ei-invasiiviseksi hoitolaitteeksi. Tuote on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön. Tuotetta hallitsee avustava henkilö ja sitä käytetään lasten kuljettamiseen toisen henkilön avustamana. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kiinteällä pinnalla sisä- ja ulkotiloissa. Tuotetta käyttävät lapset, joilla on tilapäisesti tai pysyvästi rajoittunut kävelykyky, jotka eivät pysty kävelemään tai seisomaan. Tuote sopii käyttäjille, joiden anatomia (esim. kehon mitat ja paino) mahdollistaa tuotteen käytön tiettyyn tarkoitukseen ja joiden iho on ehjä. Tuotetta saa käyttää vain tilauslomakkeessa mainittujen lisävarusteiden kanssa.

Käyttöaiheet: käyttäjän liikuntarajoite, joka on asteeltaan lievästä vaikeaan tai täydellinen. Vasta-aiheet: ehdottomia vasta-aiheita ei ole tiedossa. Suhteelliset vasta-aiheet – fyysisten tai henkisten edellytysten puuttuminen, pintakudoksen (esim. iho yms.) huomattava pintavaurio. Liitännäisilmiöt: seuraavia liitännäisilmiöitä voi poikkeustapauksissa ilmetä tuotetta käytettäessä – kipu niskalihaksissa, lihas- ja nivelkipu, verenkiertohäiriöt, painehaavojen riski. Tällaisten liitännäisilmiöiden tai ongelmien tapauksessa tulee kääntyä lääkäriin tai terapeutin puoleen.

Tuotteen tunnistaminen:

Tuotekilvessä olevat tiedot:

	Kauppanimikkeiden maailmanlaajuinen yksilöintinumero. GS1-standardin mukainen = UDI-DI – Unique Device Identifier - Device Identifier.
	Sarjanumero. GS1-standardin mukainen = UDI-PI – Yksilöllinen laitetunniste - Tuotetunniste.
	Valmistajan tunniste – tuoteversio
Mod.:	Tuoteversio / teksti
Spec.:	Tuoteversio / väriversio
	Valmistaja – osoite

Valmistuspäivä: sarjanumeroon sisältyy (ensimmäiset 3 numeroa) valmistuspäivämäärä („253“ = 253 kuukautta 01.01.2000 jälkeen = Tammikuu 2021).

TURVALLISUUS JA SUOJAUS:

- Avustajan tulee olla perehtynyt tässä käyttöohjeessa annettuihin ohjeisiin.
- Ennen käyttöä on kysyttävä ammatillista lääkärin neuvoa tämän tuotteen sopivuudesta.
- Aina ennen liikkeelle lähtöä on varmistettava, että lapsi istuu mukavasti ja että vaatteet, peitot, yms. eivät riipu irrallaan siten, että ne voivat tarttua pyöriin.
- Varmista ennen säätöjen tekemistä loukkaantumisen välttämiseksi, etteivät lapsen ruumiinosat joudu liikkuviin osiin.
- Istuimen ja selkänojan kallistus- ym. säätöjä tehtäessä on varottava äkillisiä hallitsemattomia liikkeitä.
- Rattaita EI TULE käyttää lapsen istuimenä moottoriajoneuvossa tai bussissa matkustettaessa, mikäli ajoneuvo ei ole varustettu tätä varten ja rattaat eivät ole törmäystestattua mallia ISO 7176-19 -standardin tai lisäksi ANSI/RESNA WC-4:2012, kappale 19, liite A:n mukaisesti.
- Älä anna lapsen kiivetä rattaisiin ja niistä pois ilman avustajaa.
- Rattaisiin siirryttäessä ja niistä poistuttaessa tulee pysäköintijarrut aina kytkeä päälle.
- Rattaita ei ole suunniteltu ajettavaksi alas portaita.
- Varmista, että kiinnitysosat, turvatanko ja muut varusteet on asennettu ja säädetty oikein.

- Älä seiso jalkatuen päällä.
- Jarrut on aina kytkettävä päälle rattaiden ollessa paikoillaan.
- Reunakiveyksen ylittämistä tulee harjoitella ensin tyhjiillä ratteilla.
- Avustajan tulee varautua tulipalon riskiin. Rakennusten sisällä tulee selvittää hätäpoistumistiet ja varmistaa, että poistumismenettely tulee ymmärretyksi.
- Lasten ei tule antaa leikkiä ratteilla tai roikkua niissä.
- Kuljetuksen aikana tulee huomioida ympäristöä vaarallisten tilanteiden tai törmäysten välttämiseksi.
- Rattaita ei saa ylikuormittaa. Rungon, istuimen, laukun tai korin ylikuormittaminen heikentää rattaiden vakautta.
- Rattaiden käsittelyssä on ehdottomasti vältettävä aiheuttamasta lapsen tai avustajan loukkaantumista.
- Käytä aina ajoluiskia tai hissiiä sen ollessa mahdollista.
- Rattaiden nostaminen tulee tehdä kahden henkilön toimesta.
- Rattaita ei milloinkaan saa kuljettaa, mikäli kuljettaminen vaarantaa lapsen turvallisuuden.
- Rattaita yleisellä tiellä käytettäessä on noudatettava liikennesääntöjä.
- Rattaita ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Rattaat on suunniteltu vain yhden lapsen kuljettamiseen.
- Ainoastaan tätä tuotetta varten suunniteltuja alkuperäisiä PATRON-lisävarusteita tulee käyttää.
- Rattaita kokoon ja auki taitettaessa tulee huolellisesti seurata käyttöohjetta rakenteelle aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi, jotka voisivat vaikuttaa tuotteen vakauteen.
- Mikäli havaitaan ilmeinen vika, joka rajoittaa tuotteen turvallista käyttöä (esim. rungon vaurio, osan irtoaminen tai muu näkyvä vaurio, halkeamat yms.), on tuotteen käyttö välittömästi lopetettava ja käännytävä paikallisen jälleenmyyjään tai huoltokeskuksen puoleen.
- PATRON-yhtiö ei ole vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat muiden kuin yhtiön toimittamien alkuperäisten PATRON-lisävarusteiden käytöstä.
- PATRON-yhtiö ei ole vastuussa vaurioista ja onnettomuuksista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä.

KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELUT, KÄYTTÖ:

1) Rattaiden kokoaminen ja säätäminen:

Rattaiden taittaminen auki:

Aseta kokoonlaitetut rattaat alustalle. Kääntyvien etupyörien asentaminen – työnnä molemmat etupyörät paikoilleen, kunnes kuulet klikkaavan äänen, joka osoittaa pyörän lukkiutuneen paikalleen. Ensi kertaa tehtävä asentaminen tulee suorittaa varovaisuudella. Takapyörien asentaminen – työnnä kumpikin pyöränakseli paikalleen, kunnes tapahtuu lukittuminen. Klikkaava ääni osoittaa pyörän lukkiutuneen paikalleen. Ensi kertaa tehtävä asentaminen tulee suorittaa varovaisuudella. Avaa kuljetuksen lukitusarpa (osa 18). Avaa rattaat osittain pystyasentoon (kuva 10a). **Tarkista 5-pistevyön soljet niiden jumiutumisen ja mahdollisen rikkoutumisen välttämiseksi kokoonlaittamisen aikana.** Seiso rattaiden takapyörien välissä ja paina jalalla poljinta (kuva 9b) rattaiden taittamiseksi auki, kunnes kuuluu klikkaava ääni, joka osoittaa rungon avautuneen kokonaan ja lukittuneen. Vedä taittokahvaa sitten ylös (kuva 8), kunnes saranakahva tuottaa klikkaavan äänen.

Jalkalaudan asentaminen – aseta jalkalauta kannattimeen eturungon molemmilla sivuilla ja paina, kunnes kuuluu klikkaava ääni. Kiristä jalkatuki sen tukevan kiinnittymisen varmistamiseksi.

Rattaiden taittaminen kokoon:

Kytke pysäköintijarru päälle. Jalkatuen irrottaminen – irrota jalkatuki eturungon molemmilla puolilla olevia painikkeita painamalla (kuva 6). Avaa selkänojan lukitus (kuva 7) ja säädä selkänoja pystyasentoon. Avaa sitten ohjaustanko nivelessä olevaa painiketta painamalla ja taita se alaspäin painamalla – aina pois päin itsestäsi / kohti rattaita (kuva 8). Mikäli tanko ei taitu helposti, varmista että painike on painettu kokonaan ja oikein pohjaan ja että tankoa ollaan taittamassa oikeaan suuntaan (nuolen mukaisesti)! Tartu tukikahvasta ja vedä ylöspäin (kuva 9A). Taita rattaat osittain kokoon kahvaa itseäsi kohti vetämällä ja käännä se eteenpäin (kuva 10). Viimeistele toimenpide kuljetuslukitus päälle kääntämällä (osa 18).

Kääntyvien etupyörien irrotus – paina etupyörän irrotuspainiketta (kuva 5b).

Takapyörien irrotus – paina takapyörän irrotuspainiketta (kuva 5a).

Verhoilu:

Rattaiden purkaminen pakkauksesta – rattaat toimitetaan suojus osittain irrotettuna. Ennen ensimmäistä käyttöä verhoilu on kiinnitettävä alustarungon päälle. Tämä tehdään käyttäen neljää painonappikiinnitystä alustarungon molemmille sivuille. Varmista kiinnittyminen suojusta painaen kokeilemalla.

Verhoilun irrottaminen ja kiinnittäminen – Irrota suojus rungon päältä nappikiinnikkeet avaamalla. Seuraavaksia avataan tarrakiinnikkeet ja vyöt viisipistevyön soljista.

Verhoilun kiinnittämiseksi toimitaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Istuinverhoilu voidaan pestä alhaisessa lämpötilassa (max. 40 °C).