

JAKELUKETJUN TOIMIJAT / TUNNISTUSKAAVIO

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Tuotteen tunnustekilpi:
Valmistaja—tuotteen lopputarkastus / nimi:	
Allekirjoitus:	

<u>Maahantuoja / EU-jakelija:</u> (nimi, osoite, yhteystiedot)	Maahantuoja / EU-jakelija (leima):

<u>Myyntipaikka / Huoltoedustus:</u> (nimi, osoite, yhteystiedot)	Myyntipaikka / Huoltoedustus (leima):
 Rehaco Oy Haaranvuontie 6 A 7, 90240 Oulu 040 705 5886 info@rehaco.fi	

Myyntipäivä (pv, kk, v):	Myyjän nimi (painokirjaimin), puhelinno, leima ja allekirjoitus:
____ . ____ . ____	



KÄYTTÖOHJE (Fi)

=> lääkinällinen laite: kuntoutusrattaat (lastenrattaat)


TOM 5 (ver. Streeter / koot: MINI, STD, MAXI)



Valmistus ja jakelu:

PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419, 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
 http:// www.patron.eu

KAAVIOKUVA

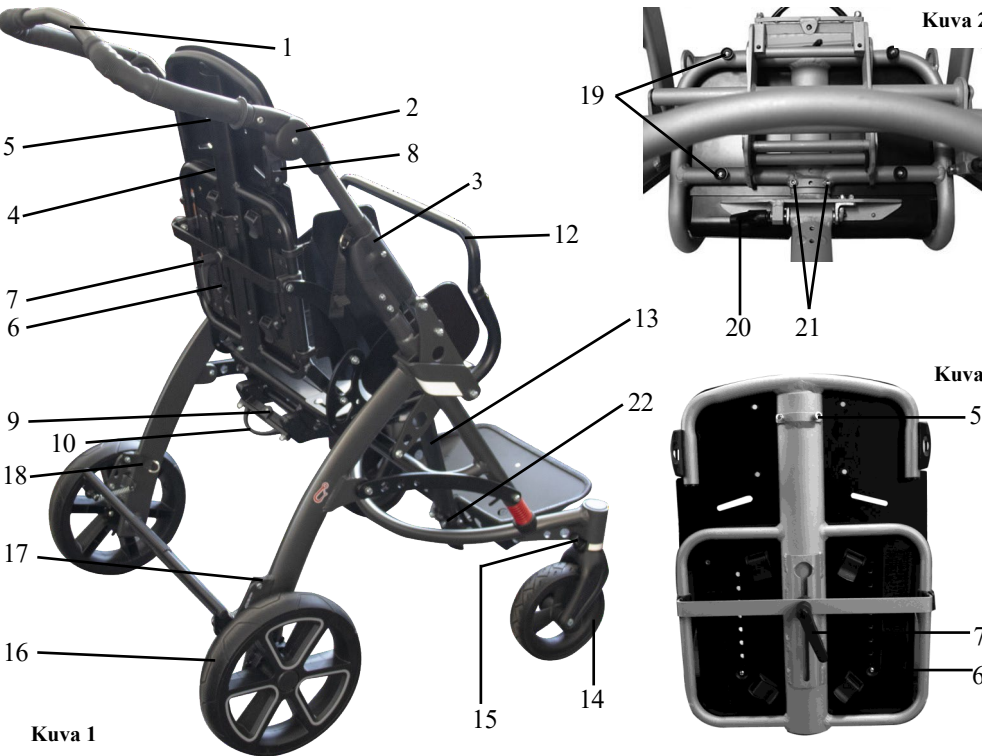

TEKNISET TIEDOT

Tekninen tieto:	T5S MINI	T5S STD	T5S MAXI
Selkänojan korkeus (mm)	440-570	510-680	550-700
Istuimen syvyys (mm)	185-270	230-330	290-400
Istuimen leveys (mm)	220-280	250-350	270-390
Istuimesta jalkatukeen (mm)	90-260	120-360	120-390
Selkänojan kulma	0°-170°	0°-170°	0°-170°
Isuinkulma	+40/-20°	+40/-20°	+40/-20°
Kokonaispituus (mm)	760 (860*)	760 (870*)	760 (870*)
Kokonaisleveys (mm)	590	630	670
Kokonaiskorkeus sis. kahvan (mm)	950/1100	950/1110	970/1180
Kokonaispaino (kg)	15,5	17,5	19,0
Maksimikuormitus (kg)	35,0	40,0	50,0
Pituus kokoonlaitettuna (mm)	840 (850*)	850 (860*)	860 (870*)
Leveys kokoonlaitettuna (mm)	590	630	670
Korkeus kokoonlaitettuna (mm)	360	370	370

(*)...Versio kiintein etupyörin

tuotetta on huoltanut muu kuin valtuutetut huoltokeskukset, tai kun tunnistuskilpi ei ole paikallaan rattaissa sekä takuukaavakkeessa.

9. Takuuaikaa ei voi vaihtaa käyttöaikaan, eli käyttöikään, vaikka tuotetta olisi käytetty oikein ja huollettu käyttöohjeen mukaisesti.
10. Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa mahdollisista tappioista ja vammoista, jotka aiheutuvat tuotteen manipuloinnista ja käytöstä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastaisesti.

Valmistaja, PATRON Bohemia a.s., varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin.

MERKINTÖJÄ:

KUNNOSSAPITO, TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN:

Nämä rattaat ovat korkealaatuisen suunnittelun tulosta ja oikein käytettynä ja huollettuna tarjoavat vuosien ongelmatonta käyttöä.

- Varmista, että olet perehtynyt rattaiden toimintaan. Niiden tulisi aina avautua ja taittua kokoon vaivatta. Mikäli näin ei ole, älä pakota mekanisme – pysähdy ja lue ohjeet.
- Tarkasta kahvan taittomekanismi, turvatangon kiinnitykset, lukituslaitteet, salvat, jalkatuki, nivelliitokset ja kahvantaiton turvaklipsi säännöllisesti niiden tukevuuden, puhtauden ja toimintakunnon varmistamiseksi.
- Jarrut, pyörät ja renkaat kulumia osia ja ne tulee tarvittaessa vaihtaa huoltopalvelun toimesta.
- Mikäli rattaissa on paineilmarenskaat, niiden ilmanpaine tulee tarkistaa säännöllisesti. Renkaan pinnan epätasaisuus saa olla korkeintaan +/- 2 mm
- Mikäli rattaat ovat vaurioituneet tai korjauksen tarpeessa, ainoastaan valtuutetut huoltopalvelut ovat oikeutettuja suorittamaan korjauksen.
- Korjauksiin tulee käyttää ainoastaan PATRON Bohemia a.s.:n toimittamia varaosia.
- Mikäli rattaiden osissa ilmenee jäykkyyttä tai niiden käyttäminen on vaikeaa, tulee varmistaa, ettei synnä ole lika; tällöin voidaan käyttää voitelusuihketta, esim. WD 40 (ei öljyä tai rasvaa). Varmista, että voiteluaine tunkeutuu komponenttien väliin kuitenkin liiallista suihkutusta välttämällä, sillä se voi lisätä lian kertymistä. Pyyhi kaikkia ylimääräisiä suihke pois. Liikkuvien osien säännöllinen voitelu pidentää rattaiden toimintaikää ja helpottaa rattaiden taittamista auki ja kokoon.
- Sateella suositellaan käytettäväksi sadesuojasta (suojaus ei ole rattaiden vakiovaruste).
- Älä altista rattaita pitkäaikaisesti auringonvalolle.
- Rattaiden ja/tai lisävarusteiden tekstiilikomponentteja tule käyttää ja säilyttää siten, läpinäkyvät Muoviosat eivät taitu eikä niihin tehdä tiukkoja taitoksia. Ne voivat vaurioitua -5 °C:n lämpötilassa.
- Pyörät, muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä pyhtaaksi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Istuinkangas voidaan pestä käsin korkeintaan 40 °C:ssa, rumpukuivainta ei saa käyttää.
- Älä käytä hankaavia, ammoniakkipohjaisia, valkaisevia tai alkoholityyppisiä puhdistusaineita.
- Kosteille olosuhteille altistumisen jälkeen rattaat tulee pyyhkiä kuivaksi pehmeällä liinalla ja jättää kokonaan avattuna lämpimään.
- Säilytä rattaat kuivassa ja turvallisessa paikassa; suositeltu lämpötila on 5-20 °C.
- Suosittelemme rattaiden tarkastamista ja hyväksyntää valtuutetussa huoltopalvelussa vuosittain.
- Suosittelemme käyttämistä huollossa 24 kuukauden käytön jälkeen.
- Tarkista ja kiristä ruuviliitokset säännöllisesti.
- Mikäli rattaissa on käyttövaijereita (jarrut, teleskoopit, kallistus), ne tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa säätää ja voidella.

Tuotteen toimintaikä: odotettavissa oleva ikä 5 vuotta. Tätä toimintaikää käytettiin pohjana tuotekehitykselle ja tuotteen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen koskevien vaatimusten määrittelylle. Näihin tietoihin sisältyvät myös kunnossapitoa koskevat vaatimukset tuotteelta vaaditun tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Hävittämisohteet: noudatettava käyttömaan paikallisesti voimassa olevia ympäristönsuojelusäädöksiä.

TAKUUEHDOT:

1. Tähän tuotteeseen sovelletaan 24 kuukauden takuuta myyntipäivästä lukien. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
2. Tuotetta on käytettävä ainoastaan suunniteltuun käyttötarkoitukseen käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudattaen.
3. Tuotetta on käytettävä, pidettävä kunnossa, puhdistettava ja säilytettävä asianmukaisesti käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Tunnistuskilpeä ei saa vetää irti. Sen on oltava luettavissa ja vahingoittumaton koko takuuaajan.
5. Takuuvaatimus tulee esittää myyjälle, jolta tuote on ostettu. Asianmukaisesti täytetty ”takuukaavake” ja ostotodistus on liitettävä takuuhakemukseen. Vioista tulee ilmoittaa välittömästi.
6. Takuuvaatimusmenettely voidaan käynnistää, kun tuote on lähetetty täydellisenä alkuperäisessä pakkauksessa huolellisesti pakattuna ja vaurioilta suojattuna. Omistaja on velvollinen toimittamaan tuotteen puhtaana yleisten hygieniatoimenpiteiden mukaisesti. Perushuoltoa ja puhdistusta ei voida vaatia takuuvaatimuksen yhteydessä.
7. Takuu ei kata: vikoja, jotka aiheutuvat tuotteiden ylikuormittamisesta, onnettomuudesta, tahallista vaurioittamisesta, tuotteeseen ja/tai sen lisävarusteisiin ilman valtuutusta tehdyistä muutoksista, osien kulumisesta, etenkin verhoiluun likaantumisen ja vaurioitumisesta, muoviosien, renkaan kulutuspinnan kulumisesta, renkaan puhkeamisesta jne.
8. Takuu lakkaa olemasta voimassa, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: käyttäjä jättää noudattamatta tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja valmistajan ehdottamia säilytys- ja kunnossapitotoimenpiteitä, tai mikäli

Kuva 9



Kuva 10




Kuva 12



KAAVION SELITYS

- | | |
|---|--|
| 1. Kahva | 16. Takapyörä |
| 2. Kahvan korkeussäädön sarana | 17. Pysäköintijarru |
| 3. Kahvan taittolukitus | 18. Korin kannatimet |
| 4. Selkänoja | 19. Istuinleveyden muoviset säätömutterit |
| 5. Selkänojan korkeussäädön kuusiopultit | 20. Jalkatuen kulman säätövipu |
| 6. Selkänojan korkeussäädön muovimutterit | 21. Istuimen syvyysäädön kuusiopultit |
| 7. Selkänojan kallistuksen säätövipu | 22. Jalkatuen korkeussäädön kuusiopultit |
| 8. Kuomun kannatin | 23. Jalkalaudan kallistussäädön kuusiokolopultit |
| 9. Lukituksen turvasokka | 24. Jalkalaudan kallistussäädön liukulevy |
| 10. Lukituksen avaus | 25. Jalkalaudan taralukitus |
| 11. Istuinkallistuksen säätövipu | 26. Jalkalauta |
| 12. Turvatanko | 27. Pehmustettu rungon suoja |
| 13. Jalkatuki | 28. Lonkatuki |
| 14. Kääntyvä tukipyörä (etupyörä) | 29. Kuljetuslukitus |
| 15. Suuntalukko | |

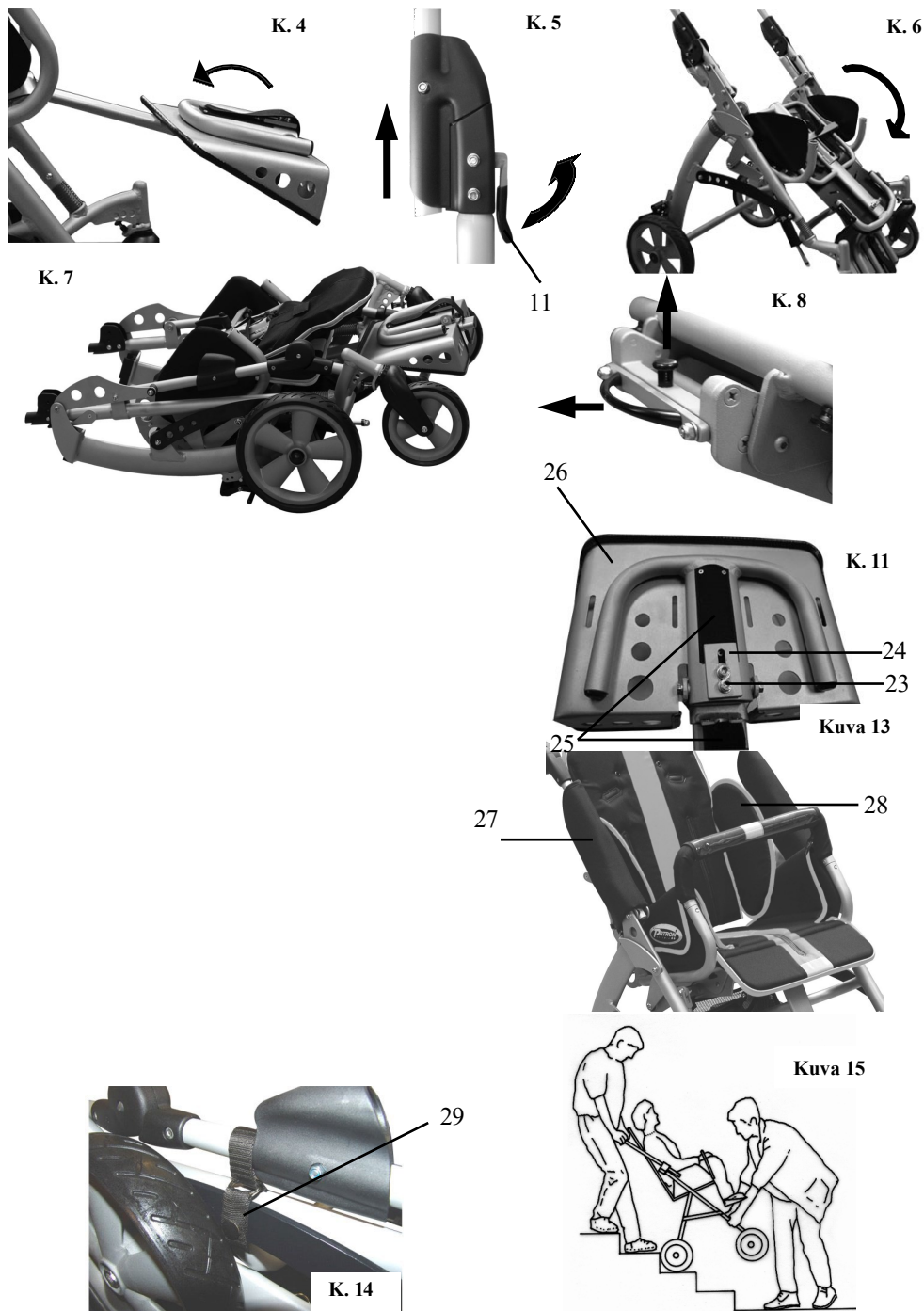

varovasti rattaisiin. Kiinnitä turvatanko ja säädä jalkatuki. Kiinnitä ja säädä kaikki kiinnitys- ja asentotukivälineet, joilla rattaat on varustettu. Varmista aina, että lapsi istuu mukavasti rattaissa.

Rattaista pois siirtäminen:

kytke pysäköintijarru päälle. Tarvittaessa pyydä toista henkilöä pitämään rattaista tukevasti kiinni. Mikäli poistaminen sitä edellyttää, säädä jalkatuen asentoa ja poista mahdolliset kiinnitys- ja asentotukivälineet. Poista turvatanko ja nosta lapsi varovasti pois rattaista.

Reunakiveysten ja matalien esteiden ylittäminen:

Alas - siirrä etupyörät kiveyksen reunalle, pidä tukeva ote kahvoista ja kallista rattaista hieman taaksepäin. Paino takapyörillä pitäen laske rattaat reunakiveykseltä takapyörilleen.

Ylös - nosta etupyörät reunakiveykselle. ÄLÄ MILLOINKAAN törmää etupyörillä kiveykseen! Tukeva ote kahvoista pitäen kallista rattaista taaksepäin ja kallista ne takapyörien varaan. Aja eteenpäin ja nosta etupyörät reunakiveyksen päälle. Sijoita takapyörät reunakiveyksen pohjalle ja nosta ylemmälle tasolle.

Rattaiden manuaalinen kuljettaminen:

- Hyödynnä luiskia ja hissejä, kun niitä on tarjolla.
- Portaita tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tarvitaan ainakin yksi avustaja toimimaan apuna.
- Rattaista ei tule yrittää ajaa ylös tai alas portaikkoo, ellei työntäjä avustajineen pysty hallitsemaan rattaista ja käyttäjän painoa.
- Pidä lepotauko säännöllisin välein, mikäli väsymys uhkaa.
- Käyttäjän tulee pitää kätensä rattaiden sisäpuolella kuljetuksen aikana.
- Rattaista EI MILLOINKAAN saa nostaa turvatangosta tai jalkatuesta!

Laskeutuminen portaissa:

Sijoita rattaat tiukasti kahvasta pitäen kohtisuoraan etupyörät ylimmällä portaalla, kallista kahvaa taaksepäin ja työnnä rattaista eteenpäin, kunnes takapyörät ovat yläportaan päällä; avustaja seisoo etupuolella rattaista tukien ja laskee ne alas eturungosta tarttuen; painoa kantaen takapyörät lasketaan alas portaalta ja jatketaan porras portaalta alas asti (kuva 15).

Portaiden nouseminen:

Sijoita rattaat tiukasti kahvasta pitäen kohtisuoraan etupyörät alinta porrasta vasten, kallista kahvaa taaksepäin ja nosta seuraavalle askelmalle; avustaja seisoo etupuolella rattaista tukien ja nostaa rattaista erurungosta tarttuen, ja jatketaan porras portaalta ylös asti (kuva 15).

Verhoilu:

Istuinverhoilu on kokonaan irrotettavissa ja voidaan pestä alhaisessa lämpötilassa (max. 40 °C).

Selkänöjan suojuspäällinen – pane suojuksen yläosa selkänöjan yläosan päälle, ja työnnä suojus selkänöjan ja istuinalustan väliseen rakoon. Kiinnitä suojuksen alapää tarrakiinnikkeellä selkänöjan taakse.

Istuinalustan suojuspäällinen – pane istuimen sivupaneelien suojukset paikoilleen yksi kerrallaan, aseta suojus oikeaan asentoon istuinalustan päälle ja peitä sivupaneelit päällekkäisillä osuuksilla, kiinnitä vetoketjulla.

4) Perusvarusteet

Pehmustettu rungon suojus:

Kiinnittäminen – pane suojukset sivuputkien päälle ja sulje vetoketju. Vedä lukitusmekanismin päälle (vasen puoli). Vedä lukitusmekanismin ja kallistuksensäätövivin päälle (27, kuva 13) (oikea puoli). Sulje molemmat vetoketjut kokonaan ylös asti.

Irrutus – avaa molemmat vetoketjut ja ota pehmustetut runkosuojukset pois (rattaista kokoon taitettaessa suojukset vain avataan osittain yläosastaan ja vedetään lukitusmekanismin yli ylöspäin).

Lonkkatuki:

Kiinnittäminen – kiinnitä lonkkatuki muoviklipsillä selkänöjan pystyputkien päälle (28, kuva 13).

Irrutus – taita lonkkatuki selkänöjan sisään ja irrota muoviklipsi sivuputkesta.

Rattaiden alla oleva kori:

Kiinnittäminen – kiinnitä korin keskiosa alustan keskellä olevaan poikittaistankoon neppareilla. Kiinnitä korin takaosa kiinnityshihnoilla takarungon profiileissa oleviin lenkkeihin.

Kiinnitä neppareilla. Kiinnitä korin etuosa hihnoilla alustarungon etumaiseen kaarevaan poikittaistankoon ja kiinnitä neppareilla (kuva 12).

Irrutus – irrota kaikkia kiinnityshihnat kiinnityspisteistä.

Kuljetuksen turvalukitus:

Kiinnittäminen – vedä kuljetuksen turvalukitushihna tangon ja eturungon pystyputken ympäri. Vie hihna lenkin läpi ja kiinnitä nepparilla (kuva 14).

Irrutus – irrota kiinnityshihna.

5) Valinnaisvarusteet:

Tämä tuote on varustettavissa laajalla valikoimalla kiinnitys- ja asentotukivarusteita. Vastaavat käyttöohjeet löytyvät erillisistä esitteistä.

Istuimen kiinnittäminen kulkusuuntaan

Aseta istuin tarkasti rungon istuinkiinnikkeisiin. ALUKSI työnnetään ainoastaan istuimen sivu VAPAASEEN kiinnitysvastakkeeseen (ilman lukitustappeja). Istuin lukittuu automaattisesti toista puolta alas painettaessa (kuuluvan lukittumisäänen kanssa). Varmista istuimen kunnollinen lukittuminen lopuksi istuinyksikköä kevyesti nostamalla. Istuimen ei tällöin tule irrota alustarungosta.

Istuimen kiinnittäminen kulkusuunnan vastaisesti:

Istuimen sijoittamiseksi kulkusuunnan vastaisesti noudatetaan samaa menettelyä kuin edeltävässä kappaleessa, paitsi että istuinta käännetään 180° selkäpuoli eteenpäin.

Pysäköintijarru:

Jarru kytketään päälle painamalla jarrutanko kokonaan pohjaan, ja otetaan pois päältä tanko ylös nostamalla (kuva 9).

Suuntalukko:

Etupyörien haarukat voidaan tarvittaessa lukita siten, etteivät ne pääse kääntymään. Lukitseminen tapahtuu nostamalla lukitusvipua ja kääntämällä lukitusvipua 90° molemmissa pyöriissä (kuva15) ja päästämällä se lukittumaan pyöränhaarukassa olevaan reikään (kuva 10).

Kahvan korkeussäätö:

Kahvan korkeusasemaa muutetaan painamalla kahvan saranoinnissa olevia mustia muovipainikkeita molemmilla puolilla samanaikaisesti (kuva 2), säätämällä kahva haluttuun kohtaan ja vapauttamalla painikkeet. Kahva lukittuu uuteen asemaan automaattisesti ja samalla kuuluu lukittumisääni.

Turvatanko:

Turvatangon (kuva12) irrottamiseksi painetaan lukituspainikkeita molemmilla puolin samanaikaisesti ja tankoa vedetään ylöspäin sen irrottamiseksi. Sen kiinnittäminen edellyttää molempien lukituspainikkeiden suuntautumista eteenpäin. Paina molempia painikkeita hieman ja työnnä turvatanko paikalleen, kunnes lukituspainikkeet lukittuvat. Varmista turvatangon kunnollinen kiinnittyminen sitä kevyesti ylöspäin vetämällä; tangon ei tule nousta paikaltaan.

2) Istuinyksikön sijoittaminen ja säätäminen:

Istuinyksikön kallistussäätö:

Avaa oikeanpuoleisen pehmustetun runkosuojuksen vetoketjua osittain alhaalta ylös päästäksesi käsiksi kallistusvipuun (kuva 5). Tue selkänöjää tukevasti vasemmalla kädellä. Vedä istuinkallistuksen vipua oikealla kädellä ja säädä istuimen asento (kuva 5). Vapauta vipu ja sulje pehmustetun runkosuojuksen vetoketju kokonaan alas asti.

Istuimen syvyyssäätö:

Irrota istuinalustan verhoilu alustasta (kiinnitetty tarrakiinnikkeillä). Löysennä kahta istuimen etuosan keskellä olevaa kuusiopulttia kiintoavaimella (21, kuva 2). Kiintoavain on selkänöjan takataskussa. Avaa käsin neljää istuimen alla olevaa muovimutteria (19, kuva 2). Säädä istuinta haluttuun kohtaan vetämällä tai työntämällä. Kiristä kaikki kuusiopultit ja muovimutterit ja pane istuinalustan verhoilu takaisin paikoilleen.

Istuinalustan leveyssäätö:

Irrota istuinalustan verhoilu sivulevyistä. Avaa käsin neljää istuimen alla olevaa muovista säätömutteria (19, kuva 2). Säädä istumen leveys sivulevyistä vetämällä tai työntämällä. Kiristä kaikki muovimutterit ja pane sivupaneelien verhoilut paikoilleen.

Selkänöjan kallistussäätö:

Pitele selkänöjaa tiukasti. Löysennä selkänöjan kallistuksen säätövipua (7, kuvat 1 ja 3). Säädä selkänöjan asento ja kiristä vipu tiukkaan. Toimenpidettä voidaan tarvittaessa helpottaa avaamalla selkänöjan päällisen takana olevaa vetoketjua osittain. Tarkista selkänöjan asennon oikea lukittuminen. Selkänöjan on pysyttävä säädetyssä asennossa.

Selkänöjan korkeussäätö:

Irrota selkänöjan verhoilu selkänöjan takaa ja edestä (kiinnitetty tarrakiinnikkeillä). Löysennä kahta selkänöjan takaosan yläosassa olevaa kuusiopulttia (5, kuva 3). Avaa kahta selkänöjan takana olevaa muovimutteria (6, kuvat 1 ja 3). Säädä selkänöjan korkeus nostamalla tai alas painamalla. Kiristä kaikki kuusiopultit ja muovimutterit ja pane selkänöjan verhoilu paikoilleen.

Jalkatuen kulman säätäminen:

Pitele jalkatukea tiukasti. Avaa jalkatuen kulman säätövipu (20, kuva 2). Säädä kulma. Kiristä vipu tiukkaan kulman lukitsemiseksi.

Jalkatuen korkeussäätö:

Löysennä kahta jalkatuen liukuprofiilin takana olevaa kuusiopulttia (22, kuva 1). Säädä korkeus. Kiristä molemmat kuusiopultit tiukkaan.

Jalkalaudan kulman säätäminen:

Löysennä kahta jalkalautojen alla olevaa kuusiopulttia (23, kuva 11). Säädä jalkalaudan kulma vaaditun kulman määrittävää kulmasäädön sivulevyä vetämällä tai painamalla (24, kuva 11). Kiristä molemmat kuusiopultit tiukkaan.

Jalkalaudan tarralukitus:

Kiristä jalkalaudan alla oleva tarralukitus (25, kuva 11) jalkatuen asennon säilyttämiseksi (estää jalkalaudan taittumisen).

3) Rattaiden käyttö:

Rattaisiin nouseminen:

Kytke pysäköintijarru päälle. Pyydä tarvittaessa avustajaa pitelemään rattaita tukevasti. Aseta lapsi

Fi

(Käyttöohje – uusimman version pvm: 06.03.2023)

JOHDANTO:

Hyvä asiakas, lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Noudata kaikkia tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta ja sen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä ammattihenkilökuntaan tai huoltoon. Ilmoita tuotteeseen liittyvästä vakavasta haittatapahtumasta tai tuotteen käyttöön liittyvästä käyttäjän terveydentilan heikkenemisestä välittömästi tuotteen viralliselle jälleenmyyjälle maassasi tai tuotteen valmistajalle. Tämän tuotteen viimeisimmät turvallisuus- ja/tai takaisinvetotiedot sekä tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavissa ottamalla yhteyttä tuotteen viralliseen jälleenmyyjään maassasi tai tuotteen valmistajaan. Säilytä tämä asiakirja turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.



..... **VAROITUS, HUOMIO:**

① **HUOMIO! Kahvaan ripustettu kuorma (laukku, ...) vaikuttaa rattaiden vakauteen!**

② **Rungon pehmustettuja sivusuojuksia on käytettävä kaikkina aikoina oikein!**

③ **Suositteltu rengaspaine: 180 kPa**

Jalkatuen tarralukitus on kiristettävä kunnolla rattaita käytettäessä!



.....**maksimikuormitus.**

VAROITUS! Sormet ja suojus on pidettävä erillään liikkuvista osista rattaita käytettäessä.

VAROITUS! Lasta ei milloinkaan saa jättää ilman valvontaa, vaikka käytettäisiin voitiä ja jarruja.

VAROITUS! Ennen käyttöä tulee varmistaa, että kaikki lukitukset ja turvalaitteet ovat toiminnassa.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että istuin on tukevasti lukittunut runkoon.

VAROITUS! Istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.

VAROITUS! Tätä tuotetta ei tule käyttää lenkkeillessä eikä luisteluradalla.

HUOMIO! Tämä käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen rattaiden ensimmäistä käyttökertaa ja säilyttää myöhempää tarvetta varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, mikäli käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja turvahuomautuksia ei noudateta.

TUOTE - KUVAUS, OMINAISUUDET, TUNNISTAMINEN:

Hankkimanne tuote on tarkoitettu monipuoliseen jokapäiväiseen käyttöön ulkosalla sekä sisätiloissa kotona. Ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa tulee loukkaantumisvaaran välttämiseksi huolellisesti tutustua sen käyttöön, käsittelyyn ja kaikkien ominaisuuksien toimintaan. Erityisesti tulee huomioida seuraavat ohjeet:

- Pätevän henkilöstön tulee opastaa kaikki käyttäjät ja heidän avustajansa tuotteen käyttöön. Käyttäjien ja/tai avustajien velvollisuutena on lukea ja saada opastus etenkin tähän tuotteeseen liittyvistä erityisistä riskeistä, joita käsitellään tähän asiakirjaan sisältyvissä turvaohjeissa.
- Tuote on säädetty käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Lisämuutokset kuuluvat ainoastaan pätevän henkilöstön tehtäväksi.
- Suosittelemme tuotteen kustomoinnin tarkistamista vuosittain tuotteen käyttäjälle optimaalisten säätöjen varmistamiseksi.

- Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa anatomia muuttuu (esim. vartalon mitat ja paino), jolloin säätämistä suositellaan puolivuositain.
- Nimenomainen tuotteenne saattaa poiketa tässä esitetyistä vaihtoehtoista. Etenkin kaikkia tässä kuvattuja lisävarusteita ei välttämättä ole asennettu tuotteeseen.
 - Valmistaja varaa oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tässä käyttöohjeessa kuvattuun rakenteeseen..

Tuotteen ominaisuudet:

Tämä tuote luokitellaan luokan 1 ei-invasiiviseksi hoitolaitteeksi. Tuote on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön. Tuotetta hallitsee avustava henkilö ja sitä käytetään lasten kuljettamiseen toisen henkilön avustamana. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kiinteällä pinnalla sisä- ja ulkotiloissa. Tuotetta käyttävät lapset, joilla on tilapäisesti tai pysyvästi rajoittunut kävelykyky, jotka eivät pysty kävelemään tai seisomaan. Tuote sopii käyttäjille, joiden anatomia (esim. kehon mitat ja paino) mahdollistaa tuotteen käytön tiettyyn tarkoitukseen ja joiden iho on ehjä. Tuotetta saa käyttää vain tilauslomakkeessa mainittujen lisävarusteiden kanssa. Tämän tuotteen valmistaja ei ole vastuussa yhdistelmistä muiden valmistajien lääkinnällisten laitteiden ja/tai lisävarusteiden kanssa. Vain tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta arvioidut tuoteyhdistelmät ovat sallittuja. Tämä tuotteen ja lisävarusteen yhdistelmä on sallittava ja mainittava tuoteyhdistelmäsovimuksessa. Käyttöaiheet: käyttäjän liikuntarajoite, joka on asteeltaan lievistä vaikeaan tai täydellinen. Vasta-aiheet: ehdottomia vasta-aiheita ei ole tiedossa. Suhteelliset vasta-aiheet – fyysisten tai henkisten edellytysten puuttuminen, pintakudoksen (esim. iho yms.) huomattava pintavaurio. Liitännäisilmiöt: seuraavia liitännäisilmiöitä voi poikkeustapauksissa ilmetä tuotetta käytettäessä – kipu niskalihaksissa, lihas- ja nivelkipu, verenkiertohäiriöt, painehaavojen riski. Tällaisten liitännäisilmiöiden tai ongelmien tapauksessa tulee kääntyä lääkärin tai terapeutin puoleen.

Tuotteen tunnistaminen:

Tuotekilvessä olevat tiedot:

	Kauppanimikkeiden maailmanlaajuinen yksilöintinumero. GS1-standardin mukainen = UDI-DI – Unique Device Identifier - Device Identifier.
	Sarjanumero. GS1-standardin mukainen = UDI-PI – Yksilöllinen laitetunniste - Tuotetunniste.
	Valmistajan tunniste – tuoteversio
Mod.:	Tuoteversio / teksti
Spec.:	Tuoteversio / väriversio
	Valmistaja – osoite

Valmistuspäivä: sarjanumeroon sisältyy (ensimmäiset 3 numeroa) valmistuspäivämäärä („253“ = 253 kuukautta 01.01.2000 jälkeen = Tammikuu 2021)

TURVALLISUUS JA SUOJAUS:

- Avustajan tulee olla perehtynyt tässä käyttöohjeessa annettuihin ohjeisiin.
- Ennen käyttöä on kysyttävä ammatillista lääkärin neuvoa tämän tuotteen sopivuudesta.
- Aina ennen liikkeelle lähtöä on varmistettava, että lapsi istuu mukavasti ja että vaatteet, peitot, yms. eivät riipu irrallaan siten, että ne voivat tarttua pyöriin.
- Varmista ennen säätöjen tekemistä loukkaantumisen välttämiseksi, etteivät lapsen ruumiinosat joudu liikkuviin osiin.
- Istuimnen suunna muuttaminen tulee tehdä ilman käyttäjää ja istuinyksikön ollessa tyhjä.
- Rattaita EI TULE käyttää lapsen istuimena moottoriajoneuvossa tai bussissa matkustettaessa, mikäli ajoneuvo ei ole varustettu tätä varten ja rattaat eivät ole törmäystestattua mallia ISO 7176-19 -standardin tai lisäksi ANSI/RESNA WC-4:2012, kappale 19, liite A:n mukaisesti.
- Älä anna lapsen kiivetä rattaisiin ja niistä pois ilman avustajaa.

- Rattaisiin siirryttäessä ja niistä poistuttaessa tulee pysäköintijarrut aina kytkeä päälle.
- Rattaita ei ole suunniteltu ajettavaksi alas portaita.
- Varmista, että kiinnitysosat, turvatanko ja muut varusteet on asennettu ja säädetty oikein.
- Älä seiso jalkatuen päällä.
- Jarrut on aina kytkettävä päälle rattaiden ollessa paikoillaan.
- Reunakiveyksen ylittämistä tulee harjoitella ensin tyhjiillä ratilla.
- Avustajan tulee varautua tulipalon riskiin. Rakennusten sisällä tulee selvittää hätäpoistumistiet ja varmistaa, että poistumismenettely tulee ymmärretyksi.
- Lasten ei tule antaa leikkiä ratilla tai roikkua niissä.
- Kuljetuksen aikana tulee huomioida ympäristöä vaarallisten tilanteiden tai törmäysten välttämiseksi.
- Rattaita ei saa ylikuormittaa. Rungon, istuimen, laukun tai korin ylikuormittaminen heikentää rattaiden vakautta.
- Rattaiden käsittelyssä on ehdottomasti vältettävä aiheuttamista lapsen tai avustajan loukkaantumista.
- Käytä aina ajoluiskia tai hissiä sen ollessa mahdollista.
- Rattaiden nostaminen tulee tehdä kahden henkilön toimesta.
- Rattaita ei milloinkaan saa kuljettaa, mikäli kuljettaminen vaarantaa lapsen turvallisuuden.
- Rattaita yleisellä tiellä käytettäessä on noudatettava liikennesääntöjä.
- Rattaita ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Rattaat on suunniteltu vain yhden lapsen kuljettamiseen.
- Ainoastaan tätä tuotetta varten suunniteltuja alkuperäisiä PATRON-lisävarusteita tulee käyttää.
- Rattaita kokoon ja auki taitettaessa tulee huolellisesti seurata käyttöohjetta rakenteelle aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi, jotka voisivat vaikuttaa tuotteen vakauteen.
- Mikäli havaitaan ilmeinen vika, joka rajoittaa tuotteen turvallista käyttöä (esim. rungon vaurio, osan irtoaminen tai muu näkyvä vaurio, halkeamat yms.), on tuotteen käyttö välittömästi lopetettava ja käännytävä paikallisen jälleenmyyjään tai huoltokeskuksen puoleen.
- PATRON-yhtiö ei ole vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat muiden kuin yhtiön toimittamien alkuperäisten PATRON-lisävarusteiden käytöstä.
- PATRON-yhtiö ei ole vastuussa vaurioista ja onnettomuuksista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä.

KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELUT, KÄYTTÖ:

1) Alusta:

Rattaiden kokoaminen (istuimen kanssa):

Aseta kokoonlaitetut rattaat pyöriilleen. Avaa rungossa oleva kuljetuslukitus. Kuljetusalustan taittamiseksi auki seistään takapyörien välissä ja pidetään tiukasti kahvasta. Siirrä kahvaa ylös ja taaksepäin, kunnes kahvan taittomekanismi on täysin lukittunut. Lukitusasennon varmistamiseksi kahvaa siirretään ylöspäin molempien mekanismien lukittumisen varmistamiseksi (kuljetusalustan ei tule lähteä taittumaan). Vedä istuinkallistuksen säätövipua (kuva 5) ja siirrä istuin haluttuun asentoon. Vedä pehmustettuja runkosuojuksia alaspäin yli lukitusmekanismin ja sulje molemmat suojukset kunnolla vetoketjuin. Avaa selkänöjan kallistuksen säätövipu ja säädä selkänöjan asento. Kiristä vipu tiukka. Avaa jalkatuen kulman säätövipu, säädä jalkatuen asento ja kiristä vipu uudelleen. Taita jalkalauta auki ja lukitse se tarrakiinnikkeellä. Kiinnitä turvatanko. Tarvittaessa kiinnitä ja säädä lisävarusteet. Rattaat on nyt koottu.

Rattaiden taittaminen kokoon (istuimen kanssa):

Kytke pysäköintijarru päälle ja irrota turvatanko. Avaa jalkatuen kulman säätövipu, säädä jalkatuen asento hieman vaakasuoraa alemmaksi, noin 20 asteeseen (kuva 4). Avaa jalkatuen tarralukitus ja sulje jalkalauta (kuva 4). Avaa selkänöjan kallistuksen säätövipu ja paina selkänöja mahdollisimman pitkälle eteen, istuimen pohjaa kohden (on suositeltavaa irrottaa muut kiinnitettyt lisävarusteet ja säätää istuimen leveys sivulevyillä ääriasentoonsa, mikä mahdollistaa kokoonlaitetun istuimen koon pienentämisen). Kiristä vipu. Avaa pehmustettujen sivusuojusten vetoketjua osittain ja vedä ylöspäin yli lukitusmekanismin. Vedä istuinkallistuksen säätövipua (kuva 5) ja säädä istuimen asento eteenpäin kallistuvaksi maksimiinsa (kuva 6). Nosta kahvan taittomekanismin lukituksen liikkuvia osia (kuva 6) molemmilta puolilta ja taita kahvaa eteenpäin etupyöriä kohden. Kiinnitä kokoonlaitettu kuljetusalusta kuljetuslukitsimella. Rattaat on nyt taitettu kokoon (kuva 7).

Kuljetusalustan kokoaminen ja purkaminen:

Kokoonlaittaminen - Kytke pysäköintijarru päälle. Avaa pehmustettujen sivusuojusten vetoketjua osittain ja vedä ylöspäin yli lukitusmekanismin. Nosta kahvan taittomekanismin lukituksen liikkuvia osia (kuva 5) ja taita kahvaa eteenpäin etupyöriä kohden. Kiinnitä kokoonlaitettu kuljetusalusta kuljetuslukitsimella. Kuljetusalusta on nyt taitettu kokoon (kuva 7).

Kokoaminen – noudata samaa menettelyä, mutta aloita yllä olevan ohjeen lopusta.

Alustan ja istuimen liitos (CSI):

Istuimen nostaminen pois:

Kytke jarru päälle. Avaa liitoksen lukitusokka (kuva 9) ja pitele sitä. Vedä samanaikaisesti (kuva 10) ja avaa istuimen liitoksen lukitus (kuva 8). Nosta istuin pois.