

# SANGO

## ADVANCED



Sango-tuoteperheen sähköpyörätuolien tuotekehityksessä on asiakkaillamme tärkeä rooli niin muotoilun kuin rakenteenkin suhteen. Sangossa on hyödynnetty useiden vuosien kokemusta; käyttäjien vaatimukset, huollon helppous sekä osien sujuvan vaihdon ja purkamisen tärkeys.

Sango-tuoteperheestä löytyvät myös **kapeat Sango Slimline** sähköpyörätuolit keski- ja takavetoisena, joissa kokonaisleveys alkaen 53 cm (kts. erillinen esite)

**Junior**-istuimet lapsille ja pienille aikuisille ovat saatavissa kaikkiin Sangon runkomalleihin

**UUTTA!** Sango Advanced keskiveto on nyt saatavilla **16" ajopyörillä, 6 pyöräinen versio 9"etupyörillä ja 8" takapyörillä.**

Loistavat ajo-ominaisuudet maastossa ja silti ketterä sisällä.

Sangon ylläpito ja huolto on helppoa, sillä osat kuten virtamoduuli (power module), istuintoimintojen ohjausmoduuli (ISM) sekä akut ovat helposti saavutettavissa.

Sangon rakenne on kestävä ja selkeä, mikä tekee sähköpyörätuolista erittäin tukevan. Sangon keskiveto takaa ainutlaatuisen vakaan ajokokemuksen, käyttäytyen keinumatta myös silloin kun ote irrotetaan ohjaussauvasta.


Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä mainittakoon Sango sähköpyörätuolien pehmeät ajo-ominaisuudet.



reha**co.**

Intohimo yhdistettynä kokemukseen on Poweria!

 **DIETZ**<sup>®</sup>  
**POWER**

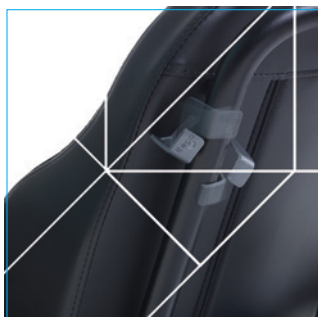

| Malli/tyyppi                        | Etuveto       |      | Takaveto      |      | Keskiveto     |      |         |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------|
| Tekniset tiedot*                    | min.          | max. | min.          | max. | min.          | max. | yksikkö |
| Käyttäjän paino                     |               | 160  |               | 160  |               | 160  | kg      |
| Ajonopeus                           | 6 / 10 / 12,5 |      | 6 / 10 / 12,5 |      | 6 / 10 / 12,5 |      | km/h    |
| Akut                                | 60 / 78       |      | 60 / 78       |      | 60 / 78       |      | Ah      |
| Kokonaispituus sis.jalkatuet        | 985           | 1680 | 980           | 1680 | 1070          | -    | mm      |
| Kokonaisleveys                      | 615           | 700  | 615           | 700  | 615           | 700  | mm      |
| Istuinkulma                         | 0 / 4 / 8     |      | 0 / 4 / 8     |      | 0 / 4 / 8     |      | °       |
| Toiminnallinen istuinsyvyys         | 420           | 560  | 420           | 560  | 420           | 560  | mm      |
| Toiminnallinen istuinleveys         | 420           | 540  | 420           | 540  | 420           | 540  | mm      |
| Istuinkorkeus edessä istuinraamassa | 390           | 480  | 390           | 480  | 390           | 480  | mm      |
| Selkäosan kulma                     | 90            | 120  | 90            | 120  | 90            | 120  | °       |
| Selkäosan korkeus                   | 500           | 570  | 500           | 570  | 500           | 570  | mm      |
| Etupyörät                           | 8 / 9         |      | 8 / 9         |      | 7 / 8         |      | "       |
| Ajopyörät                           | 12 / 14       |      | 12 / 14       |      | 12 / 14       |      | "       |

\* Tekniset tiedot on mitattu 9" ja 14" pyörillä.

Sango Advanced sähköpyörätuolit on varustettu R-net elektroniikalla. R-netiin voi lisätä Omni-moduulin millä tahansa erityisohjauksella yksilöllisiin tarpeisiin. Integroidun bluetoothin sekä infrapunayhteyden avulla voi R-netin ohjausyksikön yhdistää ulkoisiin laitteisiin, kuten älypuhelin tai tv. Näitä laitteita voi tällöin käyttää sähköpyörätuolin ohjaussauvalla. Gyro ajonvakautusmoduulin voi lisätä R-netiin, jolloin ajo-ominaisuudet ovat entistä vakaammat ja miellyttävämmät.

Mukavuus on minimivaatimus.

**Sego** istuinjärjestelmä takaa erinomaisen tuennan vartalolle, päälle sekä ylä- ja alaraajoille.

- Alin istuinkorkeus on 39 cm, jopa istuimen kallistusmoduulin kanssa. Hissin kanssa alin istuinkorkeus on 40 cm
- Helposäätöinen istuinsyvyys ja -leveys
- Laaja valikoima istuintyynyjä ja selkätyynyjä
- Valittavissa useita sähköisiä istuintoimintoja (hissi, selkäosa, istuimen kallistus)
- Useita jalkatukivaihtoehtoja : säädettävät jalkalevyt, vaakatasoon säätävät jalkatuet joko kaasujousella tai sähkötoimisina, keskikiinnityksellä sähkötoiminen jalkatuki (vaakatasoon säätö ja/tai pituussäätö).



EN12184 (2014)  
ISO 7176-19

reha**co**.

info@rehaco.fi  
www.rehaco.fi



Vlamovenweg 12  
5708 JV Helmond  
The Netherlands  
T +31 492 792 196  
info@dietz-power.com  
www.dietz-power.com





Sähkösäätöiset  
jalkatuet



Yhtenäinen sähkötoiminen  
jalkatuki



Yhtenäinen jalkatuki



Amputaatio tuki




Sähkösäätöinen  
katapultti-istuin




Säädettävä reisituki



Vartalotuki

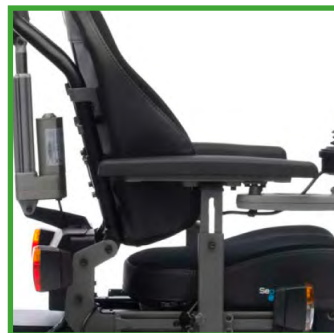

Säädettävät ja irroitettavat  
käsinojat

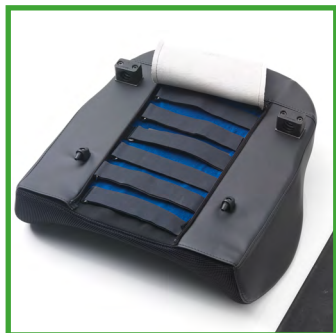

Contour syvä säädettävä  
selkänöja



Omni-moduuli



Dac-box



Leukaohjaus



Avustajanohjaus



Joystickit



Erilaiset pöytälevy  
ja ohjausyksiköt



Junior-istuin

## HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy

2447737-2

Kaavarinkatu 8 H 5

33840, Tampere

040 705 5886

info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7

90240, Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi

rehaco.