



Anatomic Sits -yksilölliset istuimet





Yksilölliset istuimet ovat olleet Anatomic Sitt yhtiön perusta vuodesta 1988. Tänäpä, yli 30 000 istuimen valmistuksen jälkeen voidaan sanoa, että se on yksi maailman johtavimista yksilöllisten istuimien valmistajista. Visiona on ollut alusta asti pystyä ehkäisemään kipua ja virheelisiä asentoja tiedon, kokemuksen ja innovaation kautta. Asiakkaille mahdollistetaan aktiivisempi elämä ja pyritään tekemään siitä mahdollisimman täysipainoinen.

Tekemällä mahdollittoman mahdolliseksi- Annetaan mahdollisuus parantaa ja lisätä elämänlaatua sitä tarvitseville.

Käsityötaito täydennettynä uudella teknologialla

Ajan ja kokemuksen myötä syntyy uusia ideoita ja uudella tavalla ajatella syntyy tuotekehitykseen uusia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on aina ollut luoda ja kehittää istumisen apuvälinratkaisuja niille, joilla on haasteellisia istumiseen liittyviä ongelmia. Erona historiaan ja tähän päivään on valmistusmahdollisuuksien parantuminen.

Vuosien valmistuskokemukset pehmeistä istuinratkaisuista johtivat haluun kehittää asiakkaille tuetumpaa ja dynaamisempaa istumista, jonka Anatomic Sitt on saavuttanut. Lähtökohtana on nähdä asiakkaan yksilöllinen tarve tuettuun istuma-asentoon ja dynaamiseen istumiseen. Haluamme yhdistää käytännön kokemuksen ja tiedon yhdessä uuden teknologian, materiaalien ja innovaation kanssa yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle.

Avaintekijänä koko tuotekehityksen aikana on ollut tasapaino istuma-asennon hallinnalla sekä oikeanlaisella paineen vähentämisellä. Helppo uudelleentilaaminen sekä erilaiset jousto ominaisuudet ovat osa valmistusprosessia.





Dynaamiset istuimet

Yksilölliset istuimet ovat dynaamisia. Istuimen runko on valmistettu polyeteenimuovista, joka mahdollistaa liikkumisen istuimessa. Jos istuimeen tarvitaan enemmän joustoa, sen voi tilata joustavalla nivelellä joka yhdistää istuimen ja selkäosan.

Anatomic istuimia käytetään usein joustavalla lonkkakulmalla, joka mahdollistaa säädettävän lonkan/selän kulman.

Uudelleentilaus on tehty helpoksi

Uuden edistyksellisen tekniikan ansiosta Anatomic Sits on mahdollista tilata uudelleen ilman uutta muovailua ja skannausta. Tämä helpottaa sekä potilaan, perheen että hoitohenkilökunnan toimintaa. Lisäksi prosessi lyhenee valmiiseen yksilölliseen Anatomic Soft Sitsiin.

Inkontinenssisuojaus

Kaikki istuimet ovat tilattavissa inkontinenssipäällisellä, joka säästää tuotteen ikää.

Anatomic istuimiin voi tilata myös erillisen inkontinenssipäällisen.

Coolmax® verhoilu

Anatomic Soft Sits Coolmax® -suojat ovat huipputeknisiä suojia, jotka on suunniteltu pitämään käyttäjän kuivana ja viileänä sekä lisäämään mukavuutta. Coolmax®-kankaat on valmistettu erikoiskäsitellyistä polyesterikuiduista, joiden pintarakente on ainutlaatuinen. Tämä neli- tai kuusikanavainen kuitu poistaa iholta kosteutta, jota syntyy, kun istumme pitkään, ja antaa viileän mukavan istuimen pidemmäksi aikaa.

Anatomic Soft Sits Coolmax® -päällinen yhdessä Anatomic Soft Sitsin "tuuletusaukon" kanssa antaa parhaan mukavuuden. Anatomic Seat voidaan tietenkin tilata muiden päällisien kanssa useissa eri yhdistelmissä ja väreissä.

Ilmanvaihtoaukot

Sekä muovikuoren että istuimateriaalin läpi olevien reikien ansiosta istuimemme ovat tuuletettuja ja ilma pääsee kiertämään, mikä tarkoittaa, että istuin on viileämpi.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Anatomic Sits on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4:2009 luokitukseen, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, toteuttamana.

Koska kaikki ihmiset näyttävät erilaisilta

Anatomic Sits -istuimia on saatavana eri materiaalivalinnoilla, jotta ne toimisivat hyvin ja vastaisivat erilaisiin paineenalennustarpeisiin. Päällisiä on saatavana erilaisissa variaatioissa ja väreissä. Kaikki lisävarusteet ovat saatavilla Anatomic Sits -istuimiin ja tietenkin myös Anatomic soft Sits- ja kombi-istuimiin.



Oikean valinnan tärkeys

Pystymme tarjoamaan joustavan valikoiman materiaaleja/malleja kunkin potilaan tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on löytää tarvittava tuki, jolla torjutaan asentovirheitä, ylläpidetään symmetriaa tai korjataan asentovirheitä, lievitetään ja ehkäistään painehaavoja sekä katkaistaan vakava spastisuus vakavissa istumisongelmissa.


Kaikilla materiaaleillamme on hyvä kestävyys, mittasuhteiden vakaus ja hyvä paineenalennus.

Mielestämme eri materiaalien yhdistelmä on todella hyvän yksilöllisen istuimen salaisuus! Yli 30 vuoden kokemus on antanut meille tietoa siitä, miten yhdistää kovia ja pehmeitä materiaaleja hyvän istuinasennon saavuttamiseksi. Nykyään käytämme valmistuksessa erilaisia materiaaleja. Kaikilla materiaaleilla on hyvät paineensieto-ominaisuudet, mutta ne käyttäytyvät eri tavoin kuumuudessa ja kylmyydessä. Niillä on myös erilaiset ilmavirrat.

Yksittäisten istuinten osalta olemme päättäneet käyttää PEHD-muovia, koska se on potilaalle parasta ja kestävintä. Se ei koskaan halkeile, kuten ABS-muovin kohdalla voi tapahtua. PEHD:llä on myös itsessään erittäin hyvä "sitkeys", mikä tarkoittaa, että se ei yksinkertaisesti hajoa esimerkiksi reikiä porattaessa tai kiinnikkeitä kiinnitettäessä esim. selkänöjan ja istuimen väliin.

PEHD:llä on myös itsessään suuri dynamiikka, mikä on hyvä spastisten potilaiden kannalta.

Joissakin muissa apuvälineissä olemme valinneet ABS-muovin, jossa olemme täydentäneet tuotteen toisella dynaamisella toiminnolla.

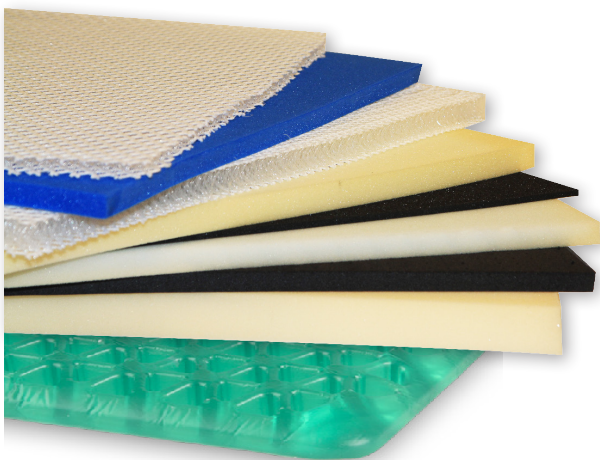

Esimerkkejä valittavista materiaaleista:

- Vaahtomuovi/Kylmävaahto
- Pehmeä vaahto
- RR/verkko
- PZ
- AZ
- Geeli



Anatomic Sits tarjoaa parhaan mahdollisen tuen yksilöllisellä istuimella, johon on mahdollista valita useita erilaisia lisävarusteita.

Hyvän tuen merkitys on ratkaisevan tärkeä, jotta estetään epämuodostumien syntyminen tai paheneminen. Hyvä tuki parantaa elinten toimintaa, lievittää kipua ja antaa liikkumisvapauden.



*yhdistettynä omiin alustoihimme

Anatomic Yksilöllinen istuin

- Korkean paineen poisto
- Yksilöllisesti valmistettu käyttäjän tarpeiden mukaan
- Suuri asentotuki
- Mahdollisuus säätää lonkkakulmaa
- Uudelleen tilaaminen on mahdollista ilman uutta skannausta.
- Ylivoimaiset kiinteät tuet

Vaihtoehdot:

- Tuuletusreikien lisääminen tekee istuimesta viileämmän ja antaa hyvän tuuletuksen koko istuimelle
- Valittavissa pestävä/irrotettava RR-vuori.
- Valittavissa eri vaahtomuovien/materiaalien välillä riippuen potilaan paineentasaus- ja asentotarpeesta.
- Mahdollisuus lisätä Airset, jotta istuimesta saadaan mahdollisimman viileä.



Istuin niille, jotka tarvitsevat hyvää tukea, mutta ovat paineherkkiä.

Anatomic Soft Sits -istuimissa on eri vaahtomuovivaihtoehtoja riippuen yksilöllisestä paineensietotarpeesta.



* Yhdistettynä omiin alustoihimme

Anatomic **Pehmeä** yksilöllinen istuin

- Ylivoimainen paineenalennus
- Yksilöllisesti tehty käyttäjän tarpeiden mukaan
- Korkea asentotuki
- Mahdollisuus säädettävään lantiokulmaan
- Uudelleen tilaaminen on mahdollista ilman uutta muotinvalmistusta ja skannausta.
- Hyvät kiinteät tuet

Vaihtoehdot:

- Tuuletusreikien lisääminen tekee istuimesta viileämmän ja antaa hyvän tuuletuksen
- Valittavissa pestävä/irrotettava RR-vuori.
- Valittavissa eri vaahtomuovien/materiaalien välillä riippuen potilaan paineentasaus- ja asentotarpeesta.
- Mahdollisuus lisätä Airset, jotta istuimesta saadaan mahdollisimman viileä.



Yhdistä kaksi parasta: pehmeä istuin yhdistettynä klassiseen anatomiseen istuimeen.

Anatomic Kombi Sitsissä yhdistämme kahden maailman parhaat puolet, Anatomic Sitsin ja Anatomic Soft Sitsin. Tämä istuin on tarkoitettu potilaille, jotka tarvitsevat tukea ja helpotusta.

Kuvassa näet aktiiviseen pyörätuoliin valmistetun istuimen, jossa on pehmeä istuin, joka helpottaa paineita, ja kova selkänoja (anatominen istuin), joka antaa potilaalle tukevamman asennon alaselkään.


Anatomic **Kombi** istuin

- Ylivoimainen ryhti tuki
- Istuin potilaille, joilla on suuri tuen tarve.
- Sopii erinomaisesti aktiivisiin pyörätuoleihin
- Yhdistä istuin tarvittaessa erityiseen joustoniveleen, jossa on sekä joustavuutta että selkänojan kulman säätömahdollisuus.
- Kiinteä tuki
- Lämmitystyyny, jotta istuin on lämmin talviaikana
- Mahdollisuus useampaan irroitettavaan päälliseen, mikä helpottaa paksumpien vaatteiden kanssa talviaikaan

Lisävarusteita mm.




Tuuletus/ilmaistuin

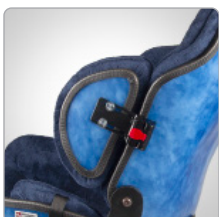

Taitettavat vartalo-
tuet



Painetta helpottavat
tuet

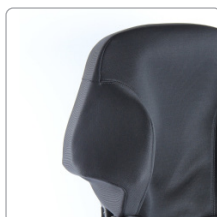

Yksilöllisetyläraajo-
jen tuet



Paineentasausaukot



Yksilölliset päätuet



Anatomic -yksilöllinen selkäosa

- Yksilöllisesti valmistettu selän asentotuki
- Auttaa varmistamaan oikean korkeussuhteen istuintyynyn ja selän välillä
- Mahdollisuus useampaan kuin yhteen irroitettavaan päälliseen, mikä helpottaa paksumpien vaatteiden kanssa talviaikaan
- Valittavana pestävä päällinen
- Mahdollista lisätä Airset, jotta istuin saadaan erityisen viileäksi.

Lisävarusteita mm.



Tuuletus/ilmaistuin



H-vyö



Lantiovyöt



Istuintyyny



Istuintyyny, jossa on mahdollisuus yksilölliseen säätöön.


Istuintyyny on valmistettu painetta keventävästä vaahtomuovista, minkä ansiosta sitä on helppo muokata ja mukauttaa potilaan tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Saatavana on myös räätälöityjä päällisiä tyynyn muodon mukaan. Kaikki päälliset ovat irrotettavia ja pestäviä, ja niitä on saatavana useissa eri väreissä. Tyynyihin voi myös integroida geeliä / RR-materiaalia paineenalennuksen lisäämiseksi.

”Pehmeä materiaali” on hyväksi todettu materiaali, jota käytetään suurella menestyksellä myös kaikissa yksilöllisesti valmistetuissa Anatomic Soft Sits -istuimissa.

Anatomic -Yksilöllinen istuintyyny


- Saatavana 5 vakiokokoa tai mahdollisuus yksilöllisesti tilattaviin mittoihin.
- Erittäin hyvä paineenalennus
- Saatavana tavallisella kankaalla tai Coolmax-kankaalla, joka tekee tuotteesta viileämmän.

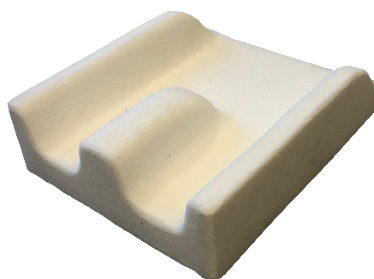

Kankaat




Coolmax
Incontinence

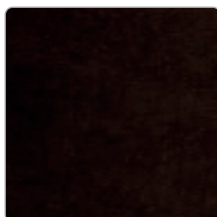

Musta



Sininen

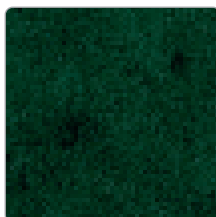

Vihreä



Luumu



Punainen

ESIMERKKEJÄ LISÄVARUSTEISTA JA TOIMINNOISTA



Puinen asennuslevy




Muovinen asennuslevy




Adapterilevy



Alasviety istuinlevy

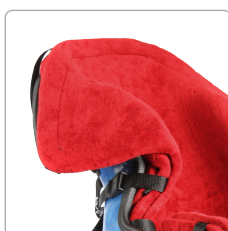

Yksilölliset yläraajojen tuet

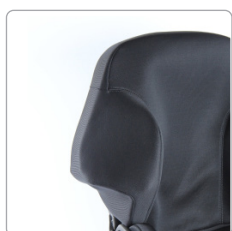

Yksilölliset yläraajojen tuet



Paineenalennusaukot



Integroitu istuintyyny




Tuuletusaukot




Tuuletusaukollinen pehmuste




Fan/Airseat

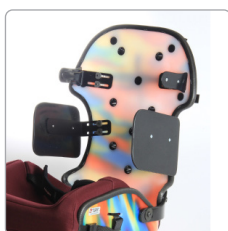

Säädettävät vartalo-
lotuet

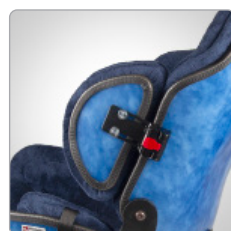

Taitettavat vartalon-
sivutuet

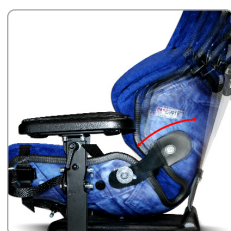

Joustava nivel sääd.
lonkka/selkälinjassa



Painetta alentavat
tuet



Irroitettava päätuen
päällinen




Säädettävät käsituet



Yksilöllinen päätuki



Plush -päätuet

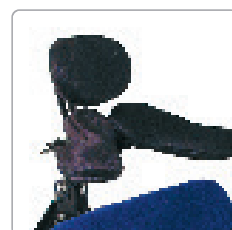

Pro Serie Adult
päätuet



Sivuttaissäädettävä
päätuen kiinnike



Säädettävä päätuki



Säädettävä jalkaluki /pohjetuet



Erilliset jalkalaudat



Dynaaminen jalkalauta



Säädettävä jalkalauta



Yhtenäinen jalkalauta



Pöytä



Vahvistettu pöytä



Sivulle taittuva pöytä



Puolipöytä



Kyynärvarsituet



Asennon tuet



Sternumliivi



H-vyö



Lantiovyöt



Rannemansetit



Nostokahvat



Nostohihnat




Lantiovyö



Rintavyö



Nilkkamansetit

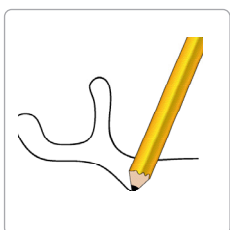

Yksilöllisesti valm. lisävarusteet (pöytä, jalkalauta, vartalontuet, käsituet)



Yksilöllisesti muokattava tukipöytä




Jalkapussi

Muovirungon ja verhoilun värivaihtoehdot

Vakiokankaat



Coolmax -kankaat

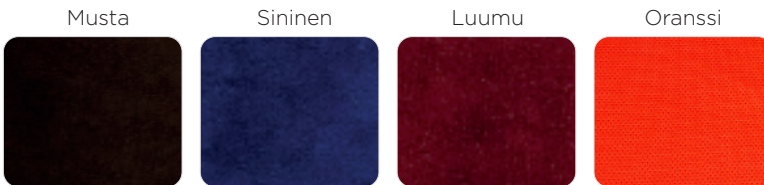

Coolmax® päällinen
Jäähdyttävä vaikutus, joka luo miellyttävän lämpötilan.

Coolmax® vaikutus
Poistaa kosteutta ja antaa viilentävän vaikutuksen.

Muovin värit/kuviot




Anatomic Hygieniaistuin

Yksilöllisesti valmistettu päätuki

Korkeus- ja kulmasäädettävä, irroitettava päällinen

Yksilöllisesti valmistettu

Kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin

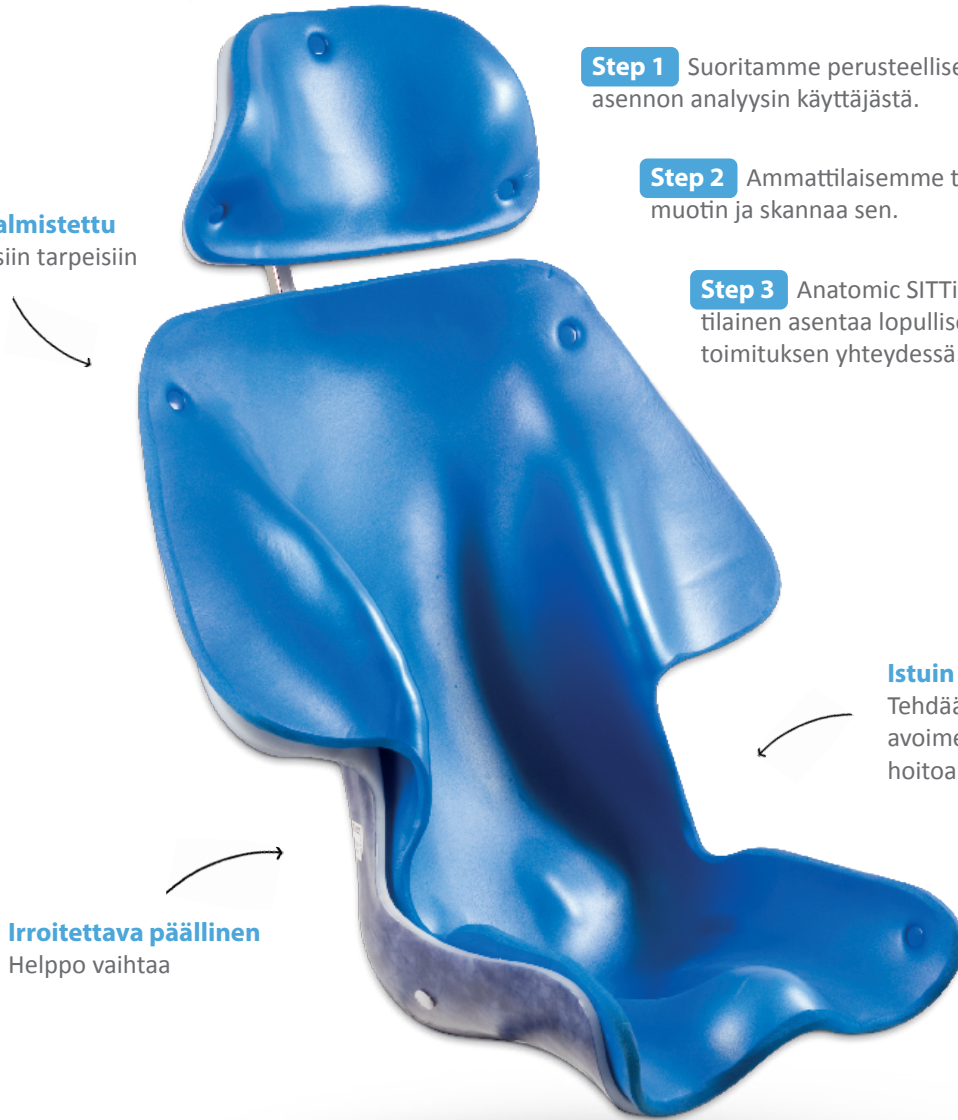

Irroitettava päällinen

Helppo vaihtaa

Step 1 Suoritamme perusteellisen istuma-asennon analyysin käyttäjästä.

Step 2 Ammattilaisemme tekee asiakkaasta muotin ja skannaa sen.

Step 3 Anatomic SITin koulutettu ammattilainen asentaa lopullisen Anatomic-istuimen toimituksen yhteydessä.

Istuin

Tehdään yksilöllisesti avoimeksi hygienian hoitoa varten

Yksilöllinen suihkutuoli

Yksilöllisesti muotoiltu Anatomic Hygiene Sits -istuin ja sen toiminnallinen asento voivat olla ainoa ratkaisu henkilöille, joilla on monimutkaisia istumiongelmia. Sopii erityisesti henkilöille, joilla on erityisiä tuen ja/tai paineenalennuksen tarpeita.

Samalla skannauksella voidaan tehdä anatominen istuin. Lisävarusteet, kuten pääntuki, jalkatuki, käsinojat, vyöt ja valjaat, voidaan kaikki valmistaa räätälöidysti kullekin käyttäjälle. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi hygieniaistuin voidaan asentaa Starfish-alustakehikkoon.

Lisävarusteita




Päätuoli



Päätuoli, pitkä



Yksilöllinen päätuoli

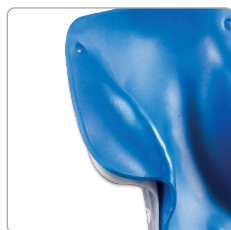

Käden taaksemeno suoja



Säädettävä lonkka-selkäkulma



Jalkatuoli



Erilliset jalkalaudat säädöllä



Pohjetuoli



Jalkalaudan pehmus-te



Alusastia



Käsituki
koko 1



Käsituki
koko 2



Käsituet alarun-gosta



Pöytä



Työntökahva



Sternum -liivi



H-liivi



Lantiovyö



Antirotatiolantiovyö



Yläohjurit



Rannemansetit



Nilkkamansetit



Kaatumasteet

Anatomic Hygieniaistuin

Hygieniaistuimessa on kaikki Anatomic Sitt -istuimen edut. Yksilöllisesti suunniteltu Anatomic Hygiene -istuin, jossa on toiminnallinen istuma-asento, auttaa potilaita, joilla on vaikeita istumisongelmia, huolehtimaan hygieniastaan suihku- ja WC-käyntien aikana. Tämä istuin on ylivoimainen, kun potilaalla on yksilöllisen tuen ja paineenalennuksen erityistarpeita.

Verhoilu

Anatomic Hygiene-istuimissa on painetta tasaava materiaali, joka on suunniteltu erityisesti hygieniatilanteisiin. Se hylkii nesteitä ja likaa sekä tuntuu miellyttävältä kehoa vasten. Yksilöllisesti suunniteltu Anatomic Hygiene Sits -istuimessa on toiminnallinen istuma-asento, joka auttaa yksilöä huolehtimaan hygieniasta suihku- ja WC-käyntien aikana.

Säädettävä istuin- ja lantiikulman säätö

Yksilön toiminnalliseen ja tuettuun istuma-asentoon tarvitaan kiinteitä tuentaratkaisuja. Istuimen dynaamisuus antaa istumiseen liikkumisvapautta, vaihtelua sekä rauhoittaa ekstensiospastisuutta. Istuimen kuori on valmistettu polyeteenimuovista, joka mahdollistaa liikkumisen.

Yhteensopivat kuljetusalustat

Starfish Pro -alusta.

Saatavana 3 eri kokoa ja eri mallia. Lisätietoja Starfish Pro -alustasta saat verkkosivuilta www.rehaco.fi Katso lisätietoja Starfish Pro -alustasta.

Starfish Pro -manuaalinen

Kiinteä alusta, mutta mekaaninen istuinkorkeuden säätö (ilman työkaluja) 53-63 cm:n välillä.



Starfish Pro Hydraulinen

Hydraulisesti säädettävä istuinkorkeus 53-78 cm:n välillä.



Starfish Pro sähköinen

Korkeussäädettävä istuinkorkeus, jossa on sähköinen säätö 53-78 cm:n istuinkorkeuden välillä.





rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy

2447737-2

Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-600 06 Norrköping

Phone +46 11-16 18 00

Email info@anatomicsitt.com

Web www.anatomicsitt.com

Kaavarinkatu 8 H 5

33840, Tampere

040 705 5886

info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7

90240, Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi