

Armadillo

Selkätuki

NXT Armadillo -selkätuki on asentoa tukeva säädettävä selkätuki, jossa on kolmiosainen modulaarinen kuori. Selkäpehmuste on geeli-viscomateriaalia (smartGEL™ Infused Visco Technology). Armadillo on suunniteltu mukautumaan käyttäjän yksilöllisen selkärangan muodon mukaan ja mukautumaan käyttäjille, joilla on kyfoosi ja muita yksilöllisiä selkärangan asentotarpeita.



YLEISTÄ

- A** Voidaan säätää selkärangan kaareen mukaisesti käyttäjille, joilla on kyfoosi ja muita yksilöllisiä selkärangan asentotarpeita.
- B** Keskilinjassa syvennys selkärangalle
- C** Levitettävät kiinnityskoukut

mahdollistavat selkätuen kiinnittämisen leveämpiin pyörätuoleihin. (jopa 2" leveämmät).

- D** Säädettävä pohjalevy tarjoaa yksilöllisen lantion tuen PSIS:n kohdalla.



smartx^{3D}


ON UUDISTANUT NXT PYÖRÄTUOLI-
ISTUINTYYNYT JA SELKÄOSAT

Innovatiivinen smartx3D-kangas tarjoaa uudenlaista mukavuutta ja kestävyyttä.


Pitkälle kehitetty kangas käyttää kolmikerroksista teknologiaa, joka sisältää ainutlaatuisen ilmatäytteisen kanavoidun keskikerroksen, joka imee lämpöä ja päästää kosteuden pois materiaalista.

smartx3D tarjoaa täydellistä mukavuutta pehmeydellään, hengittävyydellään ja kosteudenpoistollaan.

- Erittäin pehmeä ja mukautuva
- Antibakteerinen
- Parantaa asennon istuvuutta
- Vähentää kosteutta
- 20 kertaa hengittävämpi kuin tavalliset kankaat

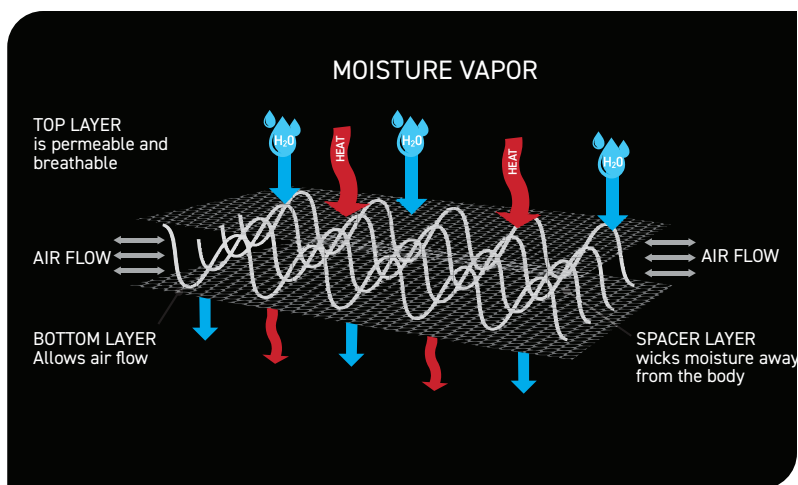

OMINAISUUDET

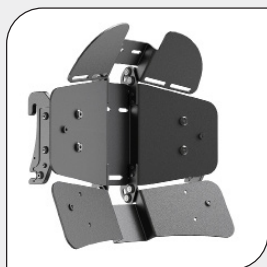

SÄÄDETTÄVISSÄ SELÄN KYFOOSIN MUKAAN

Sisältää lantiontuennan sekä varmistaa selkäpinnan kontaktipinnalla tasaisen paineen jakautumisen.



SÄÄDETTÄVISSÄ SELÄN LORDOOSIN TAI YLIPAINON HAASTEISIIN SOPIVAKSI

Selkäosan kulmia säätämällä saadaan tilaa muodokkaalle lantiolle.



LISÄVARUSTEENA LATERAALISET SELÄN SIVUTUET

Antavat lateraalista lisätukea istuma-asennon ylläpitämiseksi.



smartGEL™ INFUSED VISCO TECHNOLOGY

SMARTGEL™ INFUSED VISCO TEKNOLOGIA

Säätää pinnan lämpötilaa viemällä lämpöä pois iholta antaen käyttäjälle optimaalisen tuennan mukavuuden.

ARMADILLO



SISÄLTÄÄ

- Kevyt alumiininen kolmiosainen tukirakenne
- Kaksikerroksinen selkätyyny sisältää smartGEL™ Infused Visco Teknologia
- smartx3D antibakteerinen, joustava stretch polyesterpäällinen (pestävä)
- Asennustarvikkeet – QuickFit pikakiinnitys asennussarja

LISÄVARUSTEET JA VAIHTOEHDOT

- 2" lateraaliset sivutuennat
- Vartalonsivutuuet
- Päätuet
- Vaihtopäällinen ja pehmuste

Tekniset tiedot


ARMADILLO kokotaulukko

Leveys	Korkeus	Sopii pyörätuoliin:
14 in. (35.6 cm)	16 in. (40.6 cm)	14 in. to 16 in. (35.6 cm to 40.6 cm)
16 in. (40.6 cm)	16 in. (40.6 cm)	16 in. to 18 in. (40.6 cm to 45.7 cm)
18 in. (45.7 cm)	18 in. and 20 in. (45.7 cm and 50.8 cm)	18 in. to 20 in. (45.7 cm to 50.8 cm)
20 in. (50.8 cm)	18 in. and 20 in. (45.7 cm and 50.8 cm)	20 in. to 22 in. (50.8 cm to 55.9 cm)
22 in. (55.9 cm)	18 in. and 20 in. (45.7 cm and 50.8 cm)	22 in. to 24 in. (55.9 cm to 61 cm)
24 in. (61 cm)	18 in. and 20 in. (45.7 cm and 50.8 cm)	24 in. to 26 in. (61 cm to 66 cm)

ARMADILLO tekniset tiedot

Selkäkuoren paino*	3.9 lb. (1.77 kg)
Korkeus	16 in. to 20 in. (40.6 cm to 50.8 cm)
Leveys	14 in. to 24 in. (35.6 cm to 61 cm)
Yläosan säätö	40° Anterior / 20° Posterior
Alaosan säätö	30° Anterior / 30° Posterior
Max. käyttäjäpaino	leveydet 14"-20": 300 lb. (136 kg) leveydet 22"-24": 400 lb. (181 kg)

*Paino 16" 40.6 cm selkäosan kuorelle

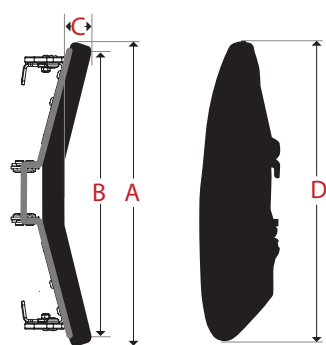


ARMADILLO selkäosan mitat – tuuma (senttimetri)

	14 (35.6)	16 (40.6)	18 (45.7)	18T (45.7)	20 (50.8)	20T (50.8)	22 (55.8)	22T (55.8)	24 (61)	24T (61)
A	14 (35.6)	16 (40.6)	18 (45.7)	18 (45.7)	20 (50.8)	20 (50.8)	22 (55.8)	22 (55.8)	24 (61)	24 (61)
B	11.5 (29.2)	13.5 (34.2)	15.5 (39.4)	15.5 (39.4)	17.5 (44.5)	17.5 (44.5)	19.75 (50.1)	19.75 (50.1)	21.5 (54.6)	21.5 (54.6)
C	1.75 (4.44)									
D	14 (35.6)	16 (40.6)	18 (45.7)	20 (50.8)	18 (45.7)	20 (50.8)	18 (45.7)	20 (50.8)	18 (45.7)	20 (50.8)

QuickFit™ Asennussarja

Mahdollistaa selkäosan säädön asiakkaan istuessa tuolissa.

- Käännettävissä syvyysalueen lisäämiseksi.
- 5 in. (12.7 cm) syvyyssäätöä, 2.5 in. (6.4 cm) putkien edessä tai takan.
- Helposti laajennettavissa, jotta selkätuki mahtuu leveämpiinkin pyörätuoleihin (jopa 2 tuumaa leveämpi kuin selkänoja).
- Asenna tai poista kiinnikkeet purkamatta niitä.
- Asennussarja on huomaamattoman kokoinen ja antaa lujuutta ja tukevuutta selkänojalle.
- Säädettävissä vartalon- tai lantionkierrolle.
- Fits metric & imperial tubing including, 0.75 in. to 1 in. (1.9 cm to 2.5 cm) back canes without shims.
- 25° kulmansäätö eteen/taakse

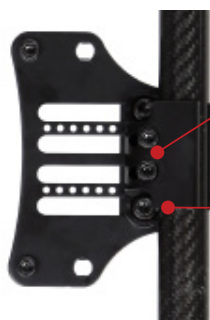

Lukitse asennuslevy selkäosan putkeen säätämällä selkäosan korkeus ja kierto

Säädä selkäosan syvyyttä ja kulmaa

rehaco.

Rehaco Oy FI24477372 Haaransuontie 6 A 7,
90240 Oulu +358407055886 info@rehaco.fi
www.rehaco.fi