

SANGO

ADVANCED



Sango-tuoteperheen sähköpyörätuolien tuotekehityksessä on asiakkailamme tärkeä rooli niin muotoilun kuin rakenteenkin suhteen. Sangossa on hyödynnetty useiden vuosien kokemusta; käyttäjien vaatimukset, huollon helppous sekä osien sujuvan vaihdon ja purkamisen tärkeys.

Sango-tuoteperheestä löytyvät myös **kapeat Sango Slimline** sähköpyörätuolit keski-, taka- ja takavetoisena, joissa kokonaisleveys alkaen 53 cm (kts. erillinen esite)

Junior-istuimet lapsille ja pienille aikuisille ovat saatavissa kaikkiin Sangon runkomalleihin

UUTTA! Sango Advanced keskiveto on nyt saatavilla **16" ajopyörillä, 6 pyöräinen versio 9" etupyörillä ja 8" takapyörillä.**

Loistavat ajo-ominaisuudet maastossa ja silti ketterä sisällä.

Sangon ylläpito ja huolto on helppoa, sillä osat kuten virtamoduuli (power module), istuintoimintojen ohjausmoduuli (ISM) sekä akut ovat helposti saavutettavissa.

Sangon rakenne on kestävä ja selkeä, mikä tekee sähköpyörätuolista erittäin tukevan. Sangon keskiveto takaa ainutlaatuisen vakaan ajokokemuksen, käyttäytyen keinumatta myös silloin kun ote irrotetaan ohjaussauvasta.


Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä mainittakoon Sango sähköpyörätuolien pehmeät ajo-ominaisuudet.



reha**co.**

Intohimo yhdistettynä kokemukseen on Poweria!

 **DIETZ**[®]
POWER

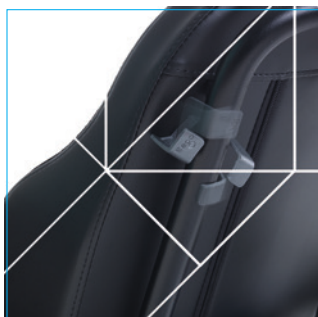

rehaCO.

info@rehaco.fi
www.rehaco.fi

DIETZ
POWER

Vlamovenweg 12
5708 JV Helmond
The Netherlands
T +31 492 792 196
info@dietz-power.com
www.dietz-power.com

Malli/tyyppi	Etuveto		Takaveto		Keskiveto		
Tekniset tiedot*	min.	max.	min.	max.	min.	max.	yksikkö
Käyttäjän paino		160		160		160	kg
Ajonopeus	6 / 10 / 12,5		6 / 10 / 12,5		6 / 10 / 12,5		km/h
Akut	60 / 78		60 / 78		60 / 78		Ah
Kokonaispituus sis.jalkatuet	985	1680	980	1680	1070	-	mm
Kokonaisleveys	615	700	615	700	615	700	mm
Istuinkulma	0 / 4 / 8		0 / 4 / 8		0 / 4 / 8		°
Toiminnallinen istuinsyvyys	420	560	420	560	420	560	mm
Toiminnallinen istuinleveys	420	540	420	540	420	540	mm
Istuinkorkeus edessä istuinraamassa	390	480	390	480	390	480	mm
Selkäosan kulma	90	120	90	120	90	120	°
Selkäosan korkeus	500	570	500	570	500	570	mm
Etupyörät	8 / 9		8 / 9		7 / 8		"
Ajopyörät	12 / 14		12 / 14		12 / 14		"

* Tekniset tiedot on mitattu 9" ja 14" pyörillä.



EN12184 (2014)
ISO 7176-19

Sango Advanced sähköpyörätuolit on varustettu R-net elektroniikalla. R-netiin voi lisätä Omni-moduulin millä tahansa erityisohjauksella yksilöllisiin tarpeisiin. Integroidun bluetoothin sekä infrapunayhteyden avulla voi R-netin ohjausyksikön yhdistää ulkoisiin laitteisiin, kuten älypuhelin tai tv. Näitä laitteita voi tällöin käyttää sähköpyörätuolin ohjaussauvalla. Gyro ajonvakautusmoduulin voi lisätä R-netiin, jolloin ajo-ominaisuudet ovat entistä vakaammat ja miellyttävämmät.

Mukavuus on minimivaatimus.

Sego istuinjärjestelmä takaa erinomaisen tuennan vartalolle, päälle sekä ylä- ja alaraajoille.

- Alin istuinkorkeus on 39 cm, jopa istuimen kallistusmoduulin kanssa. Hissin kanssa alin istuinkorkeus on 40 cm
- Helposäätöinen istuinsyvyys ja -leveys
- Laaja valikoima istuintyynyjä ja selkätyynyjä
- Valittavissa useita sähköisiä istuintoimintoja (hissi, selkäosa, istuimen kallistus)
- Useita jalkatukivaihtoehtoja : säädettävät jalkalevyt, vaakatasoon säätävät jalkatuet joko kaasujousella tai sähkötoimisina, keskikiinnityksellä sähkötoiminen jalkatuki (vaakatasoon säätö ja/tai pituussäätö).

