




Uuden sukupolven kallistettava pyörätuoli!

HD Balance on ruotsalainen kallistettava pyörätuoli, jonka suunnittelussa on otettu huomioon sekä käyttäjien että hoitajien tarpeet ja vaatimukset koko suunnitteluprosessin ajan.

Pyörätuolin valmistuksessa on käytetty yksinomaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisia materiaaleja ja komponentteja. Yksilöllisyys ja kestävyys ovat avainsanoja.

Istuinleveydet: 38, 42, 46, 50
Pyöräkoko: 16" & 24" stand.
Istuimen kallistus: n. 0° - 20° (standardi)
n. -5° - 30° (vaihtoeht.)
Selkäosan kulma: n. 90° - 120°
Maksimi käyttäjäpaino: 135 kg

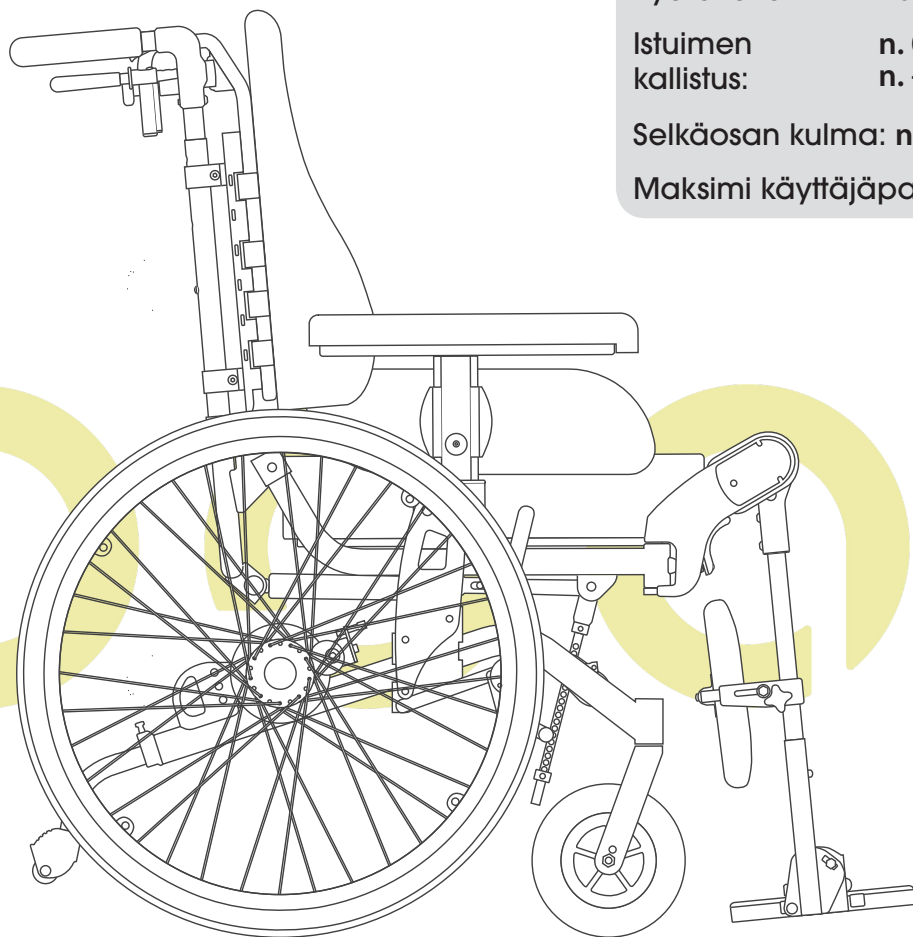

rehaco.



Made in Sweden

Tärkeät ominaisuudet:

- ▶ Helppo käsiteltävyys: Äärimmäisen lyhyt etäisyys tukipyörän ja kelauspyörän välillä antaa erittäin hyvän käsiteltävyyden sekä käyttäjille että hoitajille. Kelauspyörät ovat myös täydellisesti samassa linjassa kuin tukipyörät, joten tuoli kulkee helposti esim. kapeilla luiskilla.
- ▶ Istuimen kallistuspiste on sijoitettu lähelle käyttäjää. Tämä tarjoaa paremman kallistuksen hallinnan, koska se vaatii vähemmän voimaa kallistamiseen, mikä on erityisen tärkeää, kun asiakas on painavampi. Kallistuspisteen ansiosta kallistusta voidaan laajentaa erityistilanteissa.
- ▶ käyttäjäturvallisuus:
Asteikot eri säädöille
Hyvään istuinergonomiaan on yhdistetty useita asteikkoja, joiden avulla hoitajien ja omaisten on helpompi varmistaa, että käyttäjä istuu oikeassa asennossa. Tämä helpottaa huomattavasti viestintää istuma-asennon arvioinnin tehneen ammattilaisen ja hoitajien/käyttäjän/perheen välillä.
- ▶ Kallistuksen ja selkäkulman säätövivut on sijoitettu niin, että hoitaja voi pitää otteensa työntötangosta näitä toimintoja käyttäessään. Se antaa paremman kontrollin liikkeelle!
- ▶ Flexi selkänoja, jossa on säädettävät tarranauhat, on vakiovaruste HD Balance -pyörätuolissa. Lisävarusteena on mahdollista valita lisää pituutta ja/tai leveyttä.
- ▶ Jalkatukia voidaan vakiona säätää 90-180 asteen kulmaan ilman, että tukipyöriä on vaihdettava pienempiin. Jalkatuet on myös erittäin helppo irrottaa tai kääntää pois. Jalkatukiin on saatavana erilaisia lisävarusteita.
- ▶ Käsinoja on kiinnitetty yhteen kiinnityspisteeseen, minkä ansiosta se on helppo irrottaa ja asettaa paikalleen. Syvyyden ja korkeuden säätömahdollisuudet ovat runsaat. Käsinojassa on myös kiinnityskisko, johon voidaan kiinnittää erilaisia lisävarusteita, esimerkiksi pöytäkiinnikkeet.
- ▶ Lisävarusteita saatavilla mm. jalka- ja pohjetukia, vartalotukia, olkatukia, pöytätaisoja.
- ▶ Sisältää kuljetuskiinnikkeet

